

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport



**Nome Técnico:** Brocas Cirúrgicas

**Nome Comercial:** Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

**Registro ANVISA:** 81118460050

**Fabricante:**

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL  
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

**Nome Técnico:** Brocas Cirurgicas

**Nome Comercial:** Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

**Composto por:** Instrumentais

**Registro ANVISA:** 81118460050





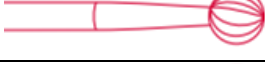
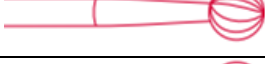


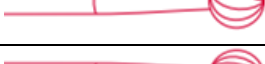
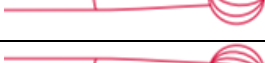
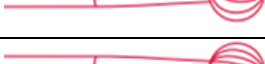
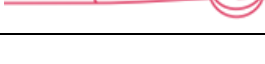
**Modelos comerciais:** Ver Tabela 1

**Metodo de Esterilização:** ETO

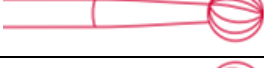
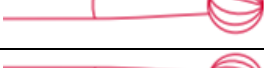
**Validade:** 3 anos apartir da data de Esterilização

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO




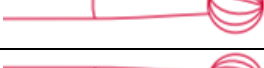
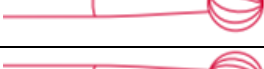
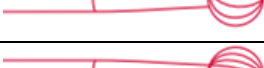
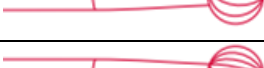
Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.






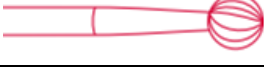
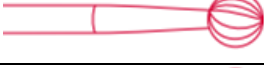
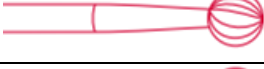
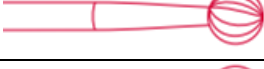
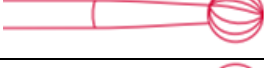
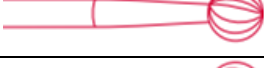
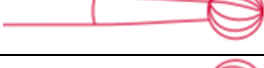

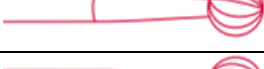

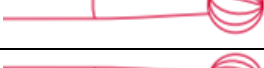
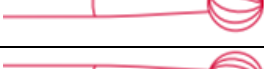
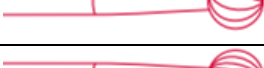
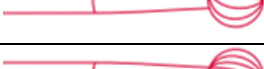
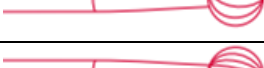
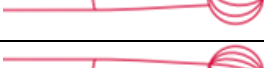
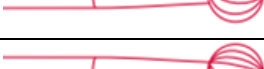
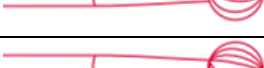
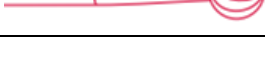
Tabela 1 – Modelos Comerciais		
Código	Descrição	Imagem Ilustrativa
TI134.0106.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 45,0mm	
TI134.1106.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 45,0mm ES	
TI134.2106.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 45,0mm NPR2	
TI134.3106.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 45,0mm CTES	
TI134.0106.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 55,0mm	
TI134.1106.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 55,0mm ES	
TI134.2106.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 55,0mm NPR2	
TI134.3106.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 55,0mm CTES	
TI134.0106.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 70,0mm	
TI134.1106.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 70,0mm ES	
TI134.2106.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 70,0mm NPR2	
TI134.3106.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 70,0mm CTES	

TI134.0106.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 80,0mm	
TI134.1106.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 80,0mm ES	
TI134.2106.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 80,0mm NPR2	
TI134.3106.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 80,0mm CTES	
TI134.0106.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 95,0mm	
TI134.1106.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 95,0mm ES	
TI134.2106.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 95,0mm NPR2	
TI134.3106.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 95,0mm CTES	
TI134.0106.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 100,0mm	
TI134.1106.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 100,0mm ES	
TI134.2106.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 100,0mm NPR2	
TI134.3106.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 100,0mm CTES	
TI134.0106.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 115,0mm	
TI134.1106.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 115,0mm ES	
TI134.2106.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 115,0mm NPR2	
TI134.3106.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 115,0mm CTES	
TI134.0106.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 130,0mm	
TI134.1106.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 130,0mm ES	
TI134.2106.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 130,0mm NPR2	
TI134.3106.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 130,0mm CTES	
TI134.0107.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 45,0mm	
TI134.1107.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 45,0mm ES	
TI134.2107.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 45,0mm NPR2	
TI134.3107.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 45,0mm CTES	

TI134.0107.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 55,0mm	
TI134.1107.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 55,0mm ES	
TI134.2107.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 55,0mm NPR2	
TI134.3107.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 55,0mm CTES	
TI134.0107.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 70,0mm	
TI134.1107.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 70,0mm ES	
TI134.2107.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 70,0mm NPR2	
TI134.3107.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 70,0mm CTES	
TI134.0107.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 80,0mm	
TI134.1107.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 80,0mm ES	
TI134.2107.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 80,0mm NPR2	
TI134.3107.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 80,0mm CTES	
TI134.0107.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 95,0mm	
TI134.1107.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 95,0mm ES	
TI134.2107.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 95,0mm NPR2	
TI134.3107.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 95,0mm CTES	
TI134.0107.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 100,0mm	
TI134.1107.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 100,0mm ES	
TI134.2107.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 100,0mm NPR2	
TI134.3107.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 100,0mm CTES	
TI134.0107.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 115,0mm	
TI134.1107.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 115,0mm ES	
TI134.2107.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 115,0mm NPR2	
TI134.3107.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 115,0mm CTES	

TI134.0107.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 130,0mm	
TI134.1107.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 130,0mm ES	
TI134.2107.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 130,0mm NPR2	
TI134.3107.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 130,0mm CTES	
TI134.0108.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 45,0mm	
TI134.1108.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 45,0mm ES	
TI134.2108.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 45,0mm NPR2	
TI134.3108.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 45,0mm CTES	
TI134.0108.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 55,0mm	
TI134.1108.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 55,0mm ES	
TI134.2108.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 55,0mm NPR2	
TI134.3108.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 55,0mm CTES	
TI134.0108.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 70,0mm	
TI134.1108.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 70,0mm ES	
TI134.2108.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 70,0mm NPR2	
TI134.3108.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 70,0mm CTES	
TI134.0108.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 80,0mm	
TI134.1108.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 80,0mm ES	
TI134.2108.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 80,0mm NPR2	
TI134.3108.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 80,0mm CTES	
TI134.0108.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 95,0mm	
TI134.1108.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 95,0mm ES	
TI134.2108.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 95,0mm NPR2	
TI134.3108.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 95,0mm CTES	


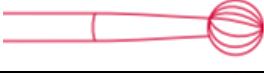
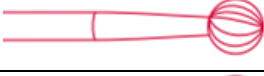
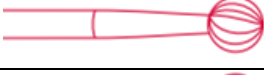
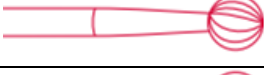
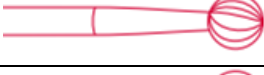
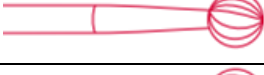
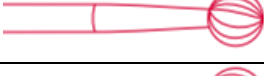
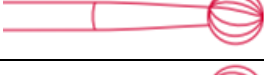
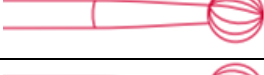
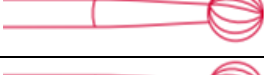
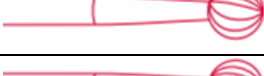
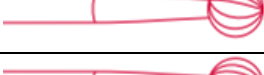
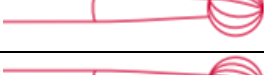
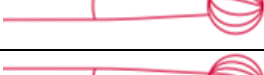

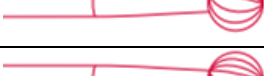
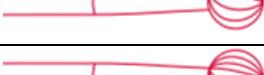
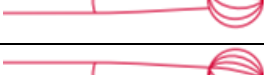
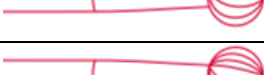
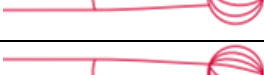
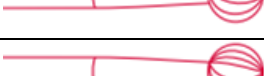
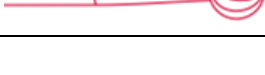
TI134.0108.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 100,0mm	
TI134.1108.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 100,0mm ES	
TI134.2108.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 100,0mm NPR2	
TI134.3108.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 100,0mm CTES	
TI134.0108.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 115,0mm	
TI134.1108.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 115,0mm ES	
TI134.2108.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 115,0mm NPR2	
TI134.3108.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 115,0mm CTES	
TI134.0108.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 130,0mm	
TI134.1108.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 130,0mm ES	
TI134.2108.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 130,0mm NPR2	
TI134.3108.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 130,0mm CTES	
TI134.0110.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 45,0mm	
TI134.1110.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 45,0mm ES	
TI134.2110.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 45,0mm NPR2	
TI134.3110.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 45,0mm CTES	
TI134.0110.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 55,0mm	
TI134.1110.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 55,0mm ES	
TI134.2110.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 55,0mm NPR2	
TI134.3110.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 55,0mm CTES	
TI134.0110.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 70,0mm	
TI134.1110.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 70,0mm ES	
TI134.2110.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 70,0mm NPR2	
TI134.3110.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 70,0mm CTES	

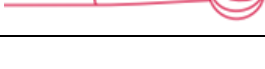
TI134.0110.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 80,0mm	
TI134.1110.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 80,0mm ES	
TI134.2110.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 80,0mm NPR2	
TI134.3110.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 80,0mm CTES	
TI134.0110.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 95,0mm	
TI134.1110.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 95,0mm ES	
TI134.2110.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 95,0mm NPR2	
TI134.3110.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 95,0mm CTES	
TI134.0110.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 100,0mm	
TI134.1110.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 100,0mm ES	
TI134.2110.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 100,0mm NPR2	
TI134.3110.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 100,0mm CTES	
TI134.0110.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 115,0mm	
TI134.1110.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 115,0mm ES	
TI134.2110.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 115,0mm NPR2	
TI134.3110.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 115,0mm CTES	
TI134.0110.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 130,0mm	
TI134.1110.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 130,0mm ES	
TI134.2110.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 130,0mm NPR2	
TI134.3110.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 130,0mm CTES	
TI134.0114.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 45,0mm	
TI134.1114.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 45,0mm ES	
TI134.2114.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 45,0mm NPR2	
TI134.3114.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 45,0mm CTES	





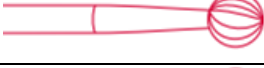
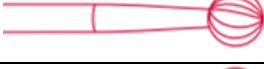
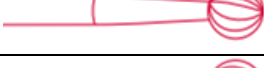
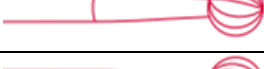

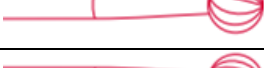
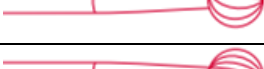
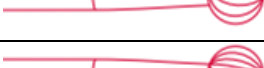
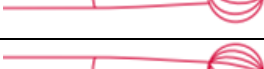
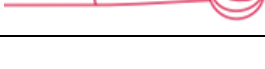
TI134.0114.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 55,0mm	
TI134.1114.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 55,0mm ES	
TI134.2114.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 55,0mm NPR2	
TI134.3114.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 55,0mm CTES	
TI134.0114.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 70,0mm	
TI134.1114.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 70,0mm ES	
TI134.2114.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 70,0mm NPR2	
TI134.3114.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 70,0mm CTES	
TI134.0114.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 80,0mm	
TI134.1114.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 80,0mm ES	
TI134.2114.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 80,0mm NPR2	
TI134.3114.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 80,0mm CTES	
TI134.0114.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 95,0mm	
TI134.1114.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 95,0mm ES	
TI134.2114.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 95,0mm NPR2	
TI134.3114.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 95,0mm CTES	
TI134.0114.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 100,0mm	
TI134.1114.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 100,0mm ES	
TI134.2114.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 100,0mm NPR2	
TI134.3114.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 100,0mm CTES	
TI134.0114.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 115,0mm	
TI134.1114.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 115,0mm ES	
TI134.2114.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 115,0mm NPR2	
TI134.3114.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 115,0mm CTES	



TI134.0114.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 130,0mm	
TI134.1114.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 130,0mm ES	
TI134.2114.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 130,0mm NPR2	
TI134.3114.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 130,0mm CTES	
TI134.0118.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 45,0mm	
TI134.1118.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 45,0mm ES	
TI134.2118.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 45,0mm NPR2	
TI134.3118.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 45,0mm CTES	
TI134.0118.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 55,0mm	
TI134.1118.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 55,0mm ES	
TI134.2118.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 55,0mm NPR2	
TI134.3118.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 55,0mm CTES	
TI134.0118.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 70,0mm	
TI134.1118.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 70,0mm ES	
TI134.2118.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 70,0mm NPR2	
TI134.3118.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 70,0mm CTES	
TI134.0118.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 80,0mm	
TI134.1118.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 80,0mm ES	
TI134.2118.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 80,0mm NPR2	
TI134.3118.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 80,0mm CTES	
TI134.0118.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 95,0mm	
TI134.1118.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 95,0mm ES	
TI134.2118.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 95,0mm NPR2	
TI134.3118.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 95,0mm CTES	

TI134.0118.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 100,0mm	
TI134.1118.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 100,0mm ES	
TI134.2118.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 100,0mm NPR2	
TI134.3118.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 100,0mm CTES	
TI134.0118.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 115,0mm	
TI134.1118.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 115,0mm ES	
TI134.2118.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 115,0mm NPR2	
TI134.3118.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 115,0mm CTES	
TI134.0118.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 130,0mm	
TI134.1118.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 130,0mm ES	
TI134.2118.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 130,0mm NPR2	
TI134.3118.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 130,0mm CTES	
TI134.0123.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 45,0mm	
TI134.1123.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 45,0mm ES	
TI134.2123.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 45,0mm NPR2	
TI134.3123.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 45,0mm CTES	
TI134.0123.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 55,0mm	
TI134.1123.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 55,0mm ES	
TI134.2123.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 55,0mm NPR2	
TI134.3123.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 55,0mm CTES	
TI134.0123.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 70,0mm	
TI134.1123.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 70,0mm ES	
TI134.2123.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 70,0mm NPR2	
TI134.3123.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 70,0mm CTES	

TI134.0123.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 80,0mm	
TI134.1123.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 80,0mm ES	
TI134.2123.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 80,0mm NPR2	
TI134.3123.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 80,0mm CTES	
TI134.0123.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 95,0mm	
TI134.1123.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 95,0mm ES	
TI134.2123.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 95,0mm NPR2	
TI134.3123.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 95,0mm CTES	
TI134.0123.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 100,0mm	
TI134.1123.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 100,0mm ES	
TI134.2123.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 100,0mm NPR2	
TI134.3123.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 100,0mm CTES	
TI134.0123.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 115,0mm	
TI134.1123.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 115,0mm ES	
TI134.2123.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 115,0mm NPR2	
TI134.3123.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 115,0mm CTES	
TI134.0123.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 130,0mm	
TI134.1123.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 130,0mm ES	
TI134.2123.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 130,0mm NPR2	
TI134.3123.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 130,0mm CTES	
TI134.0127.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 45,0mm	
TI134.1127.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 45,0mm ES	
TI134.2127.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 45,0mm NPR2	
TI134.3127.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 45,0mm CTES	

TI134.0127.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 55,0mm	
TI134.1127.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 55,0mm ES	
TI134.2127.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 55,0mm NPR2	
TI134.3127.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 55,0mm CTES	
TI134.0127.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 70,0mm	
TI134.1127.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 70,0mm ES	
TI134.2127.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 70,0mm NPR2	
TI134.3127.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 70,0mm CTES	
TI134.0127.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 80,0mm	
TI134.1127.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 80,0mm ES	
TI134.2127.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 80,0mm NPR2	
TI134.3127.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 80,0mm CTES	
TI134.0127.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 95,0mm	
TI134.1127.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 95,0mm ES	
TI134.2127.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 95,0mm NPR2	
TI134.3127.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 95,0mm CTES	
TI134.0127.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 100,0mm	
TI134.1127.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 100,0mm ES	
TI134.2127.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 100,0mm NPR2	
TI134.3127.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 100,0mm CTES	
TI134.0127.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 115,0mm	
TI134.1127.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 115,0mm ES	
TI134.2127.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 115,0mm NPR2	
TI134.3127.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 115,0mm CTES	

TI134.0127.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 130,0mm	
TI134.1127.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 130,0mm ES	
TI134.2127.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 130,0mm NPR2	
TI134.3127.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 130,0mm CTES	
TI134.0131.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 45,0mm	
TI134.1131.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 45,0mm ES	
TI134.2131.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 45,0mm NPR2	
TI134.3131.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 45,0mm CTES	
TI134.0131.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 55,0mm	
TI134.1131.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 55,0mm ES	
TI134.2131.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 55,0mm NPR2	
TI134.3131.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 55,0mm CTES	
TI134.0131.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 70,0mm	
TI134.1131.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 70,0mm ES	
TI134.2131.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 70,0mm NPR2	
TI134.3131.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 70,0mm CTES	
TI134.0131.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 80,0mm	
TI134.1131.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 80,0mm ES	
TI134.2131.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 80,0mm NPR2	
TI134.3131.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 80,0mm CTES	
TI134.0131.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 95,0mm	
TI134.1131.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 95,0mm ES	
TI134.2131.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 95,0mm NPR2	
TI134.3131.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 95,0mm CTES	

TI134.0131.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 100,0mm	
TI134.1131.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 100,0mm ES	
TI134.2131.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 100,0mm NPR2	
TI134.3131.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 100,0mm CTES	
TI134.0131.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 115,0mm	
TI134.1131.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 115,0mm ES	
TI134.2131.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 115,0mm NPR2	
TI134.3131.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 115,0mm CTES	
TI134.0131.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 130,0mm	
TI134.1131.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 130,0mm ES	
TI134.2131.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 130,0mm NPR2	
TI134.3131.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 130,0mm CTES	
TI134.0135.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 45,0mm	
TI134.1135.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 45,0mm ES	
TI134.2135.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 45,0mm NPR2	
TI134.3135.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 45,0mm CTES	
TI134.0135.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 55,0mm	
TI134.1135.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 55,0mm ES	
TI134.2135.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 55,0mm NPR2	
TI134.3135.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 55,0mm CTES	
TI134.0135.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 70,0mm	
TI134.1135.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 70,0mm ES	
TI134.2135.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 70,0mm NPR2	
TI134.3135.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 70,0mm CTES	




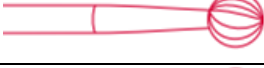
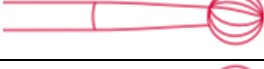

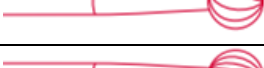
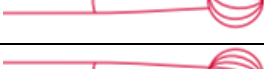
TI134.0135.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 80,0mm	
TI134.1135.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 80,0mm ES	
TI134.2135.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 80,0mm NPR2	
TI134.3135.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 80,0mm CTES	
TI134.0135.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 95,0mm	
TI134.1135.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 95,0mm ES	
TI134.2135.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 95,0mm NPR2	
TI134.3135.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 95,0mm CTES	
TI134.0135.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 100,0mm	
TI134.1135.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 100,0mm ES	
TI134.2135.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 100,0mm NPR2	
TI134.3135.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 100,0mm CTES	
TI134.0135.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 115,0mm	
TI134.1135.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 115,0mm ES	
TI134.2135.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 115,0mm NPR2	
TI134.3135.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 115,0mm CTES	
TI134.0135.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 130,0mm	
TI134.1135.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 130,0mm ES	
TI134.2135.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 130,0mm NPR2	
TI134.3135.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 130,0mm CTES	
TI134.0140.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 45,0mm	
TI134.1140.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 45,0mm ES	
TI134.2140.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 45,0mm NPR2	
TI134.3140.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 45,0mm CTES	




TI134.0140.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 55,0mm	
TI134.1140.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 55,0mm ES	
TI134.2140.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 55,0mm NPR2	
TI134.3140.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 55,0mm CTES	
TI134.0140.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 70,0mm	
TI134.1140.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 70,0mm ES	
TI134.2140.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 70,0mm NPR2	
TI134.3140.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 70,0mm CTES	
TI134.0140.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 80,0mm	
TI134.1140.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 80,0mm ES	
TI134.2140.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 80,0mm NPR2	
TI134.3140.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 80,0mm CTES	
TI134.0140.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 95,0mm	
TI134.1140.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 95,0mm ES	
TI134.2140.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 95,0mm NPR2	
TI134.3140.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 95,0mm CTES	
TI134.0140.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 100,0mm	
TI134.1140.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 100,0mm ES	
TI134.2140.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 100,0mm NPR2	
TI134.3140.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 100,0mm CTES	
TI134.0140.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 115,0mm	
TI134.1140.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 115,0mm ES	
TI134.2140.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 115,0mm NPR2	
TI134.3140.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 115,0mm CTES	








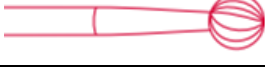
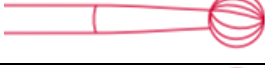
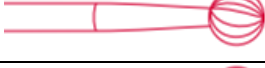
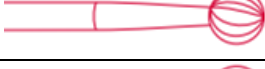
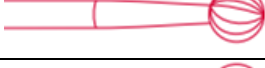
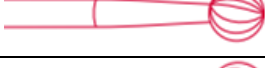
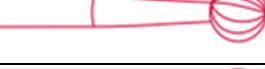



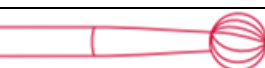
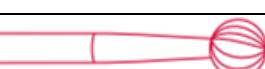
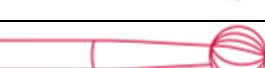

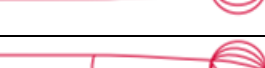
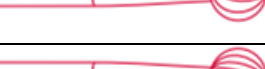
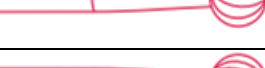
TI134.0140.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 130,0mm	
TI134.1140.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 130,0mm ES	
TI134.2140.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 130,0mm NPR2	
TI134.3140.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 130,0mm CTES	
TI134.0145.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 45,0mm	
TI134.1145.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 45,0mm ES	
TI134.2145.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 45,0mm NPR2	
TI134.3145.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 45,0mm CTES	
TI134.0145.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 55,0mm	
TI134.1145.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 55,0mm ES	
TI134.2145.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 55,0mm NPR2	
TI134.3145.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 55,0mm CTES	
TI134.0145.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 70,0mm	
TI134.1145.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 70,0mm ES	
TI134.2145.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 70,0mm NPR2	
TI134.3145.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 70,0mm CTES	
TI134.0145.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 80,0mm	
TI134.1145.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 80,0mm ES	
TI134.2145.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 80,0mm NPR2	
TI134.3145.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 80,0mm CTES	
TI134.0145.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 95,0mm	
TI134.1145.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 95,0mm ES	
TI134.2145.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 95,0mm NPR2	
TI134.3145.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 95,0mm CTES	



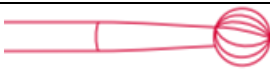
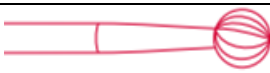
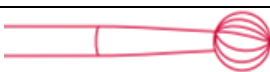
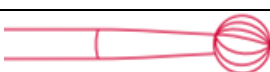
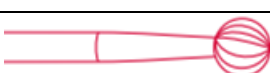
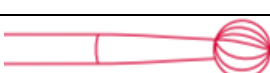
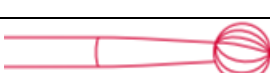
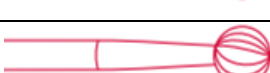
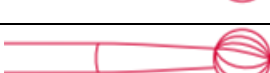
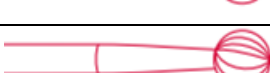
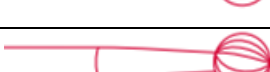
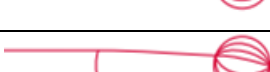
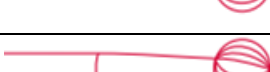
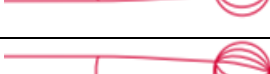
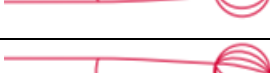
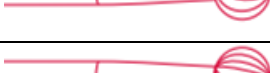
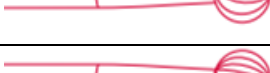
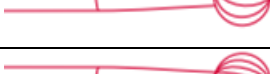
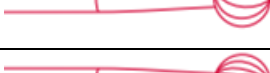
TI134.0145.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 100,0mm	
TI134.1145.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 100,0mm ES	
TI134.2145.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 100,0mm NPR2	
TI134.3145.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 100,0mm CTES	
TI134.0145.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 115,0mm	
TI134.1145.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 115,0mm ES	
TI134.2145.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 115,0mm NPR2	
TI134.3145.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 115,0mm CTES	
TI134.0145.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 130,0mm	
TI134.1145.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 130,0mm ES	
TI134.2145.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 130,0mm NPR2	
TI134.3145.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 130,0mm CTES	
TI134.0150.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 45,0mm	
TI134.1150.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 45,0mm ES	
TI134.2150.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 45,0mm NPR2	
TI134.3150.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 45,0mm CTES	
TI134.0150.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 55,0mm	
TI134.1150.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 55,0mm ES	
TI134.2150.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 55,0mm NPR2	
TI134.3150.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 55,0mm CTES	
TI134.0150.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 70,0mm	
TI134.1150.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 70,0mm ES	
TI134.2150.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 70,0mm NPR2	
TI134.3150.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 70,0mm CTES	

TI134.0150.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 80,0mm	
TI134.1150.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 80,0mm ES	
TI134.2150.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 80,0mm NPR2	
TI134.3150.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 80,0mm CTES	
TI134.0150.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 95,0mm	
TI134.1150.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 95,0mm ES	
TI134.2150.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 95,0mm NPR2	
TI134.3150.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 95,0mm CTES	
TI134.0150.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 100,0mm	
TI134.1150.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 100,0mm ES	
TI134.2150.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 100,0mm NPR2	
TI134.3150.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 100,0mm CTES	
TI134.0150.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 115,0mm	
TI134.1150.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 115,0mm ES	
TI134.2150.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 115,0mm NPR2	
TI134.3150.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 115,0mm CTES	
TI134.0150.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 130,0mm	
TI134.1150.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 130,0mm ES	
TI134.2150.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 130,0mm NPR2	
TI134.3150.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 130,0mm CTES	
TI134.0155.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 45,0mm	
TI134.1155.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 45,0mm ES	
TI134.2155.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 45,0mm NPR2	
TI134.3155.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 45,0mm CTES	



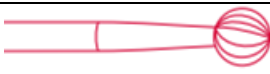
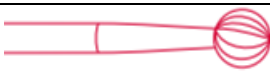
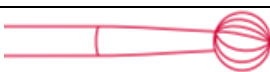
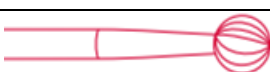
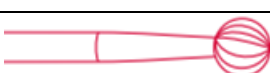
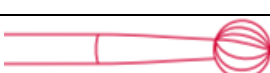
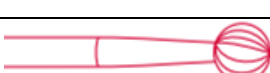
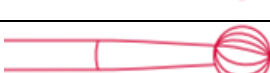
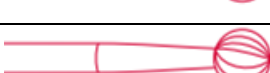
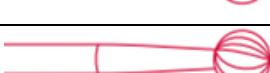
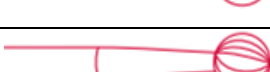
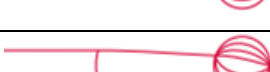
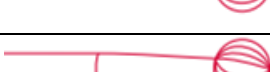
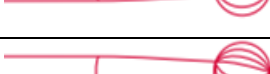
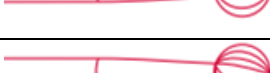
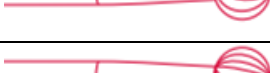
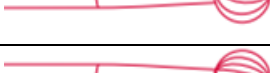
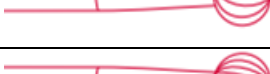
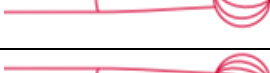
TI134.0155.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 55,0mm	
TI134.1155.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 55,0mm ES	
TI134.2155.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 55,0mm NPR2	
TI134.3155.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 55,0mm CTES	
TI134.0155.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 70,0mm	
TI134.1155.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 70,0mm ES	
TI134.2155.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 70,0mm NPR2	
TI134.3155.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 70,0mm CTES	
TI134.0155.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 80,0mm	
TI134.1155.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 80,0mm ES	
TI134.2155.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 80,0mm NPR2	
TI134.3155.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 80,0mm CTES	
TI134.0155.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 95,0mm	
TI134.1155.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 95,0mm ES	
TI134.2155.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 95,0mm NPR2	
TI134.3155.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 95,0mm CTES	
TI134.0155.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 100,0mm	
TI134.1155.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 100,0mm ES	
TI134.2155.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 100,0mm NPR2	
TI134.3155.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 100,0mm CTES	
TI134.0155.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 115,0mm	
TI134.1155.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 115,0mm ES	
TI134.2155.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 115,0mm NPR2	
TI134.3155.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 115,0mm CTES	

TI134.0155.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 130,0mm	
TI134.1155.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 130,0mm ES	
TI134.2155.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 130,0mm NPR2	
TI134.3155.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 130,0mm CTES	
TI134.0160.045	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 45,0mm	
TI134.1160.045	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 45,0mm ES	
TI134.2160.045	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 45,0mm NPR2	
TI134.3160.045	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 45,0mm CTES	
TI134.0160.055	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 55,0mm	
TI134.1160.055	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 55,0mm ES	
TI134.2160.055	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 55,0mm NPR2	
TI134.3160.055	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 55,0mm CTES	
TI134.0160.070	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 70,0mm	
TI134.1160.070	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 70,0mm ES	
TI134.2160.070	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 70,0mm NPR2	
TI134.3160.070	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 70,0mm CTES	
TI134.0160.080	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 80,0mm	
TI134.1160.080	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 80,0mm ES	
TI134.2160.080	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 80,0mm NPR2	
TI134.3160.080	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 80,0mm CTES	
TI134.0160.095	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 95,0mm	
TI134.1160.095	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 95,0mm ES	
TI134.2160.095	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 95,0mm NPR2	
TI134.3160.095	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 95,0mm CTES	



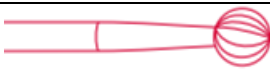
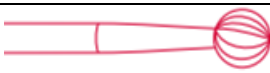
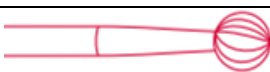
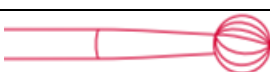
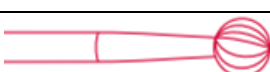
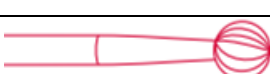
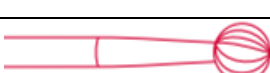
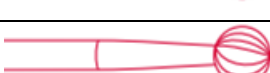
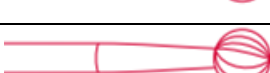
TI134.0160.100	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 100,0mm	
TI134.1160.100	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 100,0mm ES	
TI134.2160.100	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 100,0mm NPR2	
TI134.3160.100	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 100,0mm CTES	
TI134.0160.115	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 115,0mm	
TI134.1160.115	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 115,0mm ES	
TI134.2160.115	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 115,0mm NPR2	
TI134.3160.115	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 115,0mm CTES	
TI134.0160.130	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 130,0mm	
TI134.1160.130	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 130,0mm ES	
TI134.2160.130	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 130,0mm NPR2	
TI134.0120.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 45,0mm	
TI134.1120.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 45,0mm ES	
TI134.2120.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 45,0mm NPR2	
TI134.3120.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 45,0mm CTES	
TI134.0120.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 55,0mm	
TI134.1120.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 55,0mm ES	
TI134.2120.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 55,0mm NPR2	
TI134.3120.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 55,0mm CTES	
TI134.0120.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 70,0mm	
TI134.1120.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 70,0mm ES	
TI134.2120.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 70,0mm NPR2	

TI134.3120.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 70,0mm CTES	
TI134.0120.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 80,0mm	
TI134.1120.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 80,0mm ES	
TI134.2120.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 80,0mm NPR2	
TI134.3120.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 80,0mm CTES	
TI134.0120.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 95,0mm	
TI134.1120.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 95,0mm ES	
TI134.2120.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 95,0mm NPR2	
TI134.3120.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 95,0mm CTES	
TI134.0120.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 100,0mm	
TI134.1120.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 100,0mm ES	
TI134.2120.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 100,0mm NPR2	
TI134.3120.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 100,0mm CTES	
TI134.0120.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 115,0mm	
TI134.1120.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 115,0mm ES	
TI134.2120.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 115,0mm NPR2	
TI134.3120.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 115,0mm CTES	
TI134.0120.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 130,0mm	
TI134.1120.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 130,0mm ES	
TI134.2120.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 130,0mm NPR2	
TI134.3120.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 130,0mm CTES	




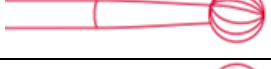
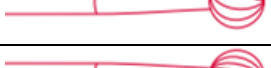
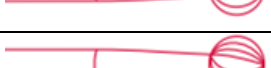
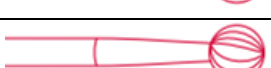
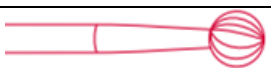

TI134.0130.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 45,0mm	
TI134.1130.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 45,0mm ES	
TI134.2130.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 45,0mm NPR2	
TI134.3130.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 45,0mm CTES	
TI134.0130.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 55,0mm	
TI134.1130.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 55,0mm ES	
TI134.2130.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 55,0mm NPR2	
TI134.3130.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 55,0mm CTES	
TI134.0130.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 70,0mm	
TI134.1130.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 70,0mm ES	
TI134.2130.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 70,0mm NPR2	
TI134.3130.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 70,0mm CTES	
TI134.0130.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 80,0mm	
TI134.1130.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 80,0mm ES	
TI134.2130.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 80,0mm NPR2	
TI134.3130.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 80,0mm CTES	
TI134.0130.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 95,0mm	
TI134.1130.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 95,0mm ES	
TI134.2130.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 95,0mm NPR2	
TI134.3130.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 95,0mm CTES	
TI134.0130.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 100,0mm	



TI134.1130.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 100,0mm ES	
TI134.2130.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 100,0mm NPR2	
TI134.3130.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 100,0mm CTES	
TI134.0130.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 115,0mm	
TI134.1130.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 115,0mm ES	
TI134.2130.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 115,0mm NPR2	
TI134.3130.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 115,0mm CTES	
TI134.0130.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 130,0mm	
TI134.1130.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 130,0mm ES	
TI134.2130.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 130,0mm NPR2	
TI134.3130.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 130,0mm CTES	

## COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

Código	Descrição	Imagem Ilustrativa	Materia-Prima
TI134.0106.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1106.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2106.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3106.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0106.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1106.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2106.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3106.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0106.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1106.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2106.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3106.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0106.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1106.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2106.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3106.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0106.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1106.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2106.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3106.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0106.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1106.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2106.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3106.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0106.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1106.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2106.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3106.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0106.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1106.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2106.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3106.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,6 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0107.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1107.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2107.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3107.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0107.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1107.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2107.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3107.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0107.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1107.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2107.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3107.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0107.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1107.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2107.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3107.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0107.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1107.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2107.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3107.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0107.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1107.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2107.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3107.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0107.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1107.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2107.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3107.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0107.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1107.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2107.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3107.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,7 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0108.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1108.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2108.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3108.045	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0108.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1108.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2108.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3108.055	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0108.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1108.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2108.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3108.070	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0108.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1108.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2108.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio



Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3108.080	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0108.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1108.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2108.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3108.095	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0108.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1108.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2108.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3108.100	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0108.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1108.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2108.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3108.115	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0108.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1108.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2108.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3108.130	Fresa Esférica Diamantada Ø0,8 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0110.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1110.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2110.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3110.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0110.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1110.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2110.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3110.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0110.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1110.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2110.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3110.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0110.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1110.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2110.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3110.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0110.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1110.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2110.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3110.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0110.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1110.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2110.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3110.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0110.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1110.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2110.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3110.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0110.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1110.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2110.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3110.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,0 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0114.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1114.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2114.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3114.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0114.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1114.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2114.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3114.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0114.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1114.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2114.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3114.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0114.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1114.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2114.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3114.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0114.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1114.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2114.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3114.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0114.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1114.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2114.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3114.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0114.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1114.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2114.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3114.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0114.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1114.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2114.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3114.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,4 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0118.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1118.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2118.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3118.045	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0118.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1118.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2118.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3118.055	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0118.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1118.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2118.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3118.070	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0118.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1118.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2118.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio



Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3118.080	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0118.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1118.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2118.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3118.095	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0118.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1118.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2118.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3118.100	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0118.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1118.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2118.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3118.115	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0118.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1118.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2118.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3118.130	Fresa Esférica Diamantada Ø1,8 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0123.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1123.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2123.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3123.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0123.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1123.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2123.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3123.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0123.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1123.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2123.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3123.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0123.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1123.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2123.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3123.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0123.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1123.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2123.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3123.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0123.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1123.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2123.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3123.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0123.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1123.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2123.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3123.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0123.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1123.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2123.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3123.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,3 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0127.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1127.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2127.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3127.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0127.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1127.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2127.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3127.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0127.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1127.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2127.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3127.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0127.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1127.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2127.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3127.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0127.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1127.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2127.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3127.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0127.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1127.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2127.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3127.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0127.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1127.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2127.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3127.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0127.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1127.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2127.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3127.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,7 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0131.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1131.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2131.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3131.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0131.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1131.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2131.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3131.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0131.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1131.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2131.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3131.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0131.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1131.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2131.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio



Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3131.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0131.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1131.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2131.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3131.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0131.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1131.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2131.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3131.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0131.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1131.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2131.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3131.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0131.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1131.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2131.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3131.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,1 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0135.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1135.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2135.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3135.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0135.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1135.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2135.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3135.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0135.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1135.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2135.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3135.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0135.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1135.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2135.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3135.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0135.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1135.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2135.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3135.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0135.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1135.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2135.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3135.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0135.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1135.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2135.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3135.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0135.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1135.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2135.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio



Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3135.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,5 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0140.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1140.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2140.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3140.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0140.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1140.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2140.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3140.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0140.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1140.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2140.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3140.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0140.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1140.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2140.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3140.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0140.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1140.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2140.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3140.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0140.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1140.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2140.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3140.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0140.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1140.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2140.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3140.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0140.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1140.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2140.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3140.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,0 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0145.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1145.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2145.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3145.045	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0145.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1145.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2145.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3145.055	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0145.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1145.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2145.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3145.070	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0145.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1145.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2145.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3145.080	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0145.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1145.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2145.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3145.095	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0145.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1145.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2145.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3145.100	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0145.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1145.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2145.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3145.115	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0145.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1145.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2145.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3145.130	Fresa Esférica Diamantada Ø4,5 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0150.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1150.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2150.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3150.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0150.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1150.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2150.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3150.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0150.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1150.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2150.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3150.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0150.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1150.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2150.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3150.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0150.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1150.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2150.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3150.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0150.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1150.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2150.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3150.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0150.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1150.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2150.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3150.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0150.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1150.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2150.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio



Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3150.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,0 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0155.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1155.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2155.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3155.045	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0155.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1155.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2155.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3155.055	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0155.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1155.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2155.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3155.070	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0155.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1155.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2155.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3155.080	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0155.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1155.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2155.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3155.095	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0155.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1155.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2155.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3155.100	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0155.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1155.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2155.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3155.115	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0155.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1155.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2155.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3155.130	Fresa Esférica Diamantada Ø5,5 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0160.045	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1160.045	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2160.045	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3160.045	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0160.055	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1160.055	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2160.055	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3160.055	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0160.070	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1160.070	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2160.070	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3160.070	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0160.080	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1160.080	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2160.080	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio



Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.3160.080	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0160.095	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1160.095	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2160.095	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3160.095	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0160.100	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1160.100	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2160.100	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3160.100	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0160.115	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1160.115	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2160.115	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3160.115	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0160.130	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1160.130	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2160.130	Fresa Esférica Diamantada Ø6,0 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0120.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1120.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2120.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3120.045	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0120.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1120.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2120.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3120.055	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio






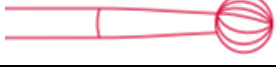
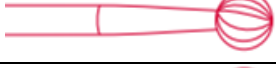

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.0120.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1120.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2120.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3120.070	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0120.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1120.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2120.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3120.080	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0120.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1120.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2120.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3120.095	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0120.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1120.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2120.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3120.100	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0120.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1120.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2120.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3120.115	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0120.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1120.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2120.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3120.130	Fresa Esférica Diamantada Ø2,0 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.0130.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 45,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1130.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 45,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2130.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 45,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3130.045	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 45,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0130.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 55,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1130.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 55,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2130.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 55,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3130.055	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 55,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0130.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 70,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1130.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 70,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2130.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 70,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3130.070	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 70,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0130.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 80,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1130.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 80,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2130.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 80,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3130.080	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 80,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0130.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 95,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1130.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 95,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2130.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 95,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3130.095	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 95,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0130.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 100,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1130.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 100,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2130.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 100,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3130.100	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 100,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

Instrução de Uso  
Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport

TI134.0130.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 115,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1130.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 115,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2130.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 115,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3130.115	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 115,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.0130.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 130,0mm		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.1130.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 130,0mm ES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.2130.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 130,0mm NPR2		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio
TI134.3130.130	Fresa Esférica Diamantada Ø3,0 x 130,0mm CTES		Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) com revestimento de nitreto de titânio

### INDICAÇÃO E FINALIDADE

Os modelos comerciais que integram o **Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis** possuem a função de auxiliar os procedimentos cirurgicos.

### CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

### ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais aqui descritos devem ser utilizados apenas com produtos Techimport.

### ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

### MARCAÇÃO

A identificação do produto é feita através de gravação a laser que deve ser gravado conforme orientação de gravação contida no desenho técnico do produto.

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

### **PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO**

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.

### **DESCARTE DO DISPOSITIVO**

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

**RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE:** Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA** através do e-mail [qualidade@techimportimplantes.com.br](mailto:qualidade@techimportimplantes.com.br) ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

### **FORMA DE APRESENTAÇÃO**

O **Brocas e Fresas Diamantadas Estéreis - Techimport** é fornecido na condição esteril, comercializado em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:



Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP  
 RODO WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) - LOTE B-8 - JD ANHANQUERA - RIO CLARO - SP  
 CNPJ: 16524734000147 - Fone: +55 (19)3622-9600 - SAC: +55 (19)3622-9600  
 E.T.: Eduardo Henrique Silva Wolf - CREA 6070058408 - Instrução de Uso pelo Site <http://www.techimportimplantes.com.br>

**STERILE EO**




Nome Técnico:

Nome Comercial:

Modelo Comercial:

Registro ANVISA n. \_\_\_\_\_ Qtde.: un. Proibido Reprocessar / Uso Único










Material:

Ref:   





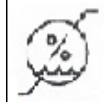


Lote: SN: \_\_\_\_\_

Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso - Revisão \_\_\_\_\_ - Consulte pelo Site

PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO

Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

**ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO**

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de



Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



**ALERTA INSTRUÇÃO DE USO**

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para: **qualidade@techimportimplantes.com.br** ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:  
**www.techimportimplantes.com.br**

Revisão: 01  
Emissão: 2022

## EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

### **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

[comercial@techimportimplantes.com.br](mailto:comercial@techimportimplantes.com.br)

[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)

Telefone: +55 19 3522 – 9500