

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport



Nome Técnico: Instrumental para Implante Ortopédico

Nome Comercial: Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

Registro ANVISA: 81118460031

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL
ESTERILIZAR ANTES DO USO**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Instrumental para Implante Ortopédico

Nome Comercial: Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

Composto por: Instrumentais






Registro ANVISA: 81118460031

Modelos comerciais: Ver Tabela 1

Metodo de Esterilização: AutoClave










DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.

Tabela 1 – Modelos Comerciais		
Código	Descrição	Imagem Ilustrativa
TI130.0010.070	Broca Ø1,0 x 070 mm	
TI130.0010.090	Broca Ø1,0 x 090 mm	
TI130.0010.110	Broca Ø1,0 x 110 mm	
TI130.0010.130	Broca Ø1,0 x 130 mm	
TI130.0010.150	Broca Ø1,0 x 150 mm	
TI130.0011.070	Broca Ø1,1 x 070 mm	
TI130.0011.090	Broca Ø1,1 x 090 mm	
TI130.0011.110	Broca Ø1,1 x 110 mm	
TI130.0011.130	Broca Ø1,1 x 130 mm	
TI130.0011.150	Broca Ø1,1 x 150 mm	
TI130.0012.070	Broca Ø1,2 x 070 mm	
TI130.0012.090	Broca Ø1,2 x 090 mm	
TI130.0012.110	Broca Ø1,2 x 110 mm	
TI130.0012.130	Broca Ø1,2 x 130 mm	
TI130.0012.150	Broca Ø1,2 x 150 mm	
TI130.0013.070	Broca Ø1,3 x 070 mm	
TI130.0013.090	Broca Ø1,3 x 090 mm	
TI130.0013.110	Broca Ø1,3 x 110 mm	
TI130.0013.130	Broca Ø1,3 x 130 mm	
TI130.0013.150	Broca Ø1,3 x 150 mm	
TI130.0014.070	Broca Ø1,4 x 070 mm	
TI130.0014.090	Broca Ø1,4 x 090 mm	
TI130.0014.110	Broca Ø1,4 x 110 mm	
TI130.0014.130	Broca Ø1,4 x 130 mm	






Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0014.150	Broca Ø1,4 x 150 mm	
TI130.0015.070	Broca Ø1,5 x 070 mm	
TI130.0015.090	Broca Ø1,5 x 090 mm	
TI130.0015.110	Broca Ø1,5 x 110 mm	
TI130.0015.130	Broca Ø1,5 x 130 mm	
TI130.0015.150	Broca Ø1,5 x 150 mm	
TI130.0016.070	Broca Ø1,6 x 070 mm	
TI130.0016.090	Broca Ø1,6 x 090 mm	
TI130.0016.110	Broca Ø1,6 x 110 mm	
TI130.0016.130	Broca Ø1,6 x 130 mm	
TI130.0016.150	Broca Ø1,6 x 150 mm	
TI130.0017.070	Broca Ø1,7 x 070 mm	
TI130.0017.090	Broca Ø1,7 x 090 mm	
TI130.0017.110	Broca Ø1,7 x 110 mm	
TI130.0017.130	Broca Ø1,7 x 130 mm	
TI130.0017.150	Broca Ø1,7 x 150 mm	
TI130.0018.070	Broca Ø1,8 x 070 mm	
TI130.0018.090	Broca Ø1,8 x 090 mm	
TI130.0018.110	Broca Ø1,8 x 110 mm	
TI130.0018.130	Broca Ø1,8 x 130 mm	
TI130.0018.150	Broca Ø1,8 x 150 mm	
TI130.0019.070	Broca Ø1,9 x 070 mm	
TI130.0019.090	Broca Ø1,9 x 090 mm	
TI130.0019.110	Broca Ø1,9 x 110 mm	
TI130.0019.130	Broca Ø1,9 x 130 mm	
TI130.0019.150	Broca Ø1,9 x 150 mm	
TI130.0020.070	Broca Ø2,0 x 070 mm	
TI130.0020.090	Broca Ø2,0 x 090 mm	
TI130.0020.110	Broca Ø2,0 x 110 mm	
TI130.0020.130	Broca Ø2,0 x 130 mm	
TI130.0020.150	Broca Ø2,0 x 150 mm	
TI130.0021.070	Broca Ø2,1 x 070 mm	
TI130.0021.090	Broca Ø2,1 x 090 mm	
TI130.0021.110	Broca Ø2,1 x 110 mm	
TI130.0021.130	Broca Ø2,1 x 130 mm	
TI130.0021.150	Broca Ø2,1 x 150 mm	
TI130.0022.070	Broca Ø2,2 x 070 mm	
TI130.0022.090	Broca Ø2,2 x 090 mm	
TI130.0022.110	Broca Ø2,2 x 110 mm	
TI130.0022.130	Broca Ø2,2 x 130 mm	
TI130.0022.150	Broca Ø2,2 x 150 mm	
TI130.0023.070	Broca Ø2,3 x 070 mm	
TI130.0023.090	Broca Ø2,3 x 090 mm	
TI130.0023.110	Broca Ø2,3 x 110 mm	
TI130.0023.130	Broca Ø2,3 x 130 mm	









Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0023.150	Broca Ø2,3 x 150 mm	
TI130.0024.070	Broca Ø2,4 x 070 mm	
TI130.0024.090	Broca Ø2,4 x 090 mm	
TI130.0024.110	Broca Ø2,4 x 110 mm	
TI130.0024.130	Broca Ø2,4 x 130 mm	
TI130.0024.150	Broca Ø2,4 x 150 mm	
TI130.0025.070	Broca Ø2,5 x 070 mm	
TI130.0025.090	Broca Ø2,5 x 090 mm	
TI130.0025.110	Broca Ø2,5 x 110 mm	
TI130.0025.130	Broca Ø2,5 x 130 mm	
TI130.0025.150	Broca Ø2,5 x 150 mm	
TI130.0026.070	Broca Ø2,6 x 070 mm	
TI130.0026.090	Broca Ø2,6 x 090 mm	
TI130.0026.110	Broca Ø2,6 x 110 mm	
TI130.0026.130	Broca Ø2,6 x 130 mm	
TI130.0026.150	Broca Ø2,6 x 150 mm	
TI130.0027.070	Broca Ø2,7 x 070 mm	
TI130.0027.090	Broca Ø2,7 x 090 mm	
TI130.0027.110	Broca Ø2,7 x 110 mm	
TI130.0027.130	Broca Ø2,7 x 130 mm	
TI130.0027.150	Broca Ø2,7 x 150 mm	
TI130.0028.070	Broca Ø2,8 x 070 mm	
TI130.0028.090	Broca Ø2,8 x 090 mm	
TI130.0028.110	Broca Ø2,8 x 110 mm	
TI130.0028.130	Broca Ø2,8 x 130 mm	
TI130.0028.150	Broca Ø2,8 x 150 mm	
TI130.0029.070	Broca Ø2,9 x 070 mm	
TI130.0029.090	Broca Ø2,9 x 090 mm	
TI130.0029.110	Broca Ø2,9 x 110 mm	
TI130.0029.130	Broca Ø2,9 x 130 mm	
TI130.0029.150	Broca Ø2,9 x 150 mm	
TI130.0030.080	Broca Ø3,0 x 080 mm	
TI130.0030.100	Broca Ø3,0 x 100 mm	
TI130.0030.130	Broca Ø3,0 x 130 mm	
TI130.0030.160	Broca Ø3,0 x 160 mm	
TI130.0030.180	Broca Ø3,0 x 180 mm	
TI130.0030.200	Broca Ø3,0 x 200 mm	
TI130.0031.080	Broca Ø3,1 x 080 mm	
TI130.0031.100	Broca Ø3,1 x 100 mm	
TI130.0031.130	Broca Ø3,1 x 130 mm	
TI130.0031.160	Broca Ø3,1 x 160 mm	
TI130.0031.180	Broca Ø3,1 x 180 mm	
TI130.0031.200	Broca Ø3,1 x 200 mm	
TI130.0032.080	Broca Ø3,2 x 080 mm	
TI130.0032.100	Broca Ø3,2 x 100 mm	












Instrução de Uso





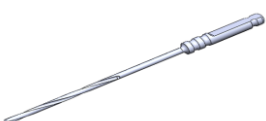




Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI130.0032.130	Broca Ø3,2 x 130 mm	
TI130.0032.160	Broca Ø3,2 x 160 mm	
TI130.0032.180	Broca Ø3,2 x 180 mm	
TI130.0032.200	Broca Ø3,2 x 200 mm	
TI130.0033.080	Broca Ø3,3 x 080 mm	
TI130.0033.100	Broca Ø3,3 x 100 mm	
TI130.0033.130	Broca Ø3,3 x 130 mm	
TI130.0033.160	Broca Ø3,3 x 160 mm	
TI130.0033.180	Broca Ø3,3 x 180 mm	
TI130.0033.200	Broca Ø3,3 x 200 mm	
TI130.0034.080	Broca Ø3,4 x 080 mm	
TI130.0034.100	Broca Ø3,4 x 100 mm	
TI130.0034.130	Broca Ø3,4 x 130 mm	
TI130.0034.160	Broca Ø3,4 x 160 mm	
TI130.0034.180	Broca Ø3,4 x 180 mm	
TI130.0034.200	Broca Ø3,4 x 200 mm	
TI130.0035.080	Broca Ø3,5 x 080 mm	
TI130.0035.100	Broca Ø3,5 x 100 mm	
TI130.0035.130	Broca Ø3,5 x 130 mm	
TI130.0035.160	Broca Ø3,5 x 160 mm	
TI130.0035.180	Broca Ø3,5 x 180 mm	
TI130.0035.200	Broca Ø3,5 x 200 mm	
TI130.0036.080	Broca Ø3,6 x 080 mm	
TI130.0036.100	Broca Ø3,6 x 100 mm	
TI130.0036.130	Broca Ø3,6 x 130 mm	
TI130.0036.160	Broca Ø3,6 x 160 mm	
TI130.0036.180	Broca Ø3,6 x 180 mm	
TI130.0036.200	Broca Ø3,6 x 200 mm	
TI130.0037.080	Broca Ø3,7 x 080 mm	
TI130.0037.100	Broca Ø3,7 x 100 mm	
TI130.0037.130	Broca Ø3,7 x 130 mm	
TI130.0037.160	Broca Ø3,7 x 160 mm	
TI130.0037.180	Broca Ø3,7 x 180 mm	
TI130.0037.200	Broca Ø3,7 x 200 mm	
TI130.0038.080	Broca Ø3,8 x 080 mm	
TI130.0038.100	Broca Ø3,8 x 100 mm	
TI130.0038.130	Broca Ø3,8 x 130 mm	
TI130.0038.160	Broca Ø3,8 x 160 mm	
TI130.0038.180	Broca Ø3,8 x 180 mm	
TI130.0038.200	Broca Ø3,8 x 200 mm	
TI130.0039.080	Broca Ø3,9 x 080 mm	
TI130.0039.100	Broca Ø3,9 x 100 mm	
TI130.0039.130	Broca Ø3,9 x 130 mm	
TI130.0039.160	Broca Ø3,9 x 160 mm	
TI130.0039.180	Broca Ø3,9 x 180 mm	

Instrução de Uso








Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0039.200	Broca Ø3,9 x 200 mm	
TI130.0040.100	Broca Ø4,0 x 100 mm	
TI130.0040.130	Broca Ø4,0 x 130 mm	
TI130.0040.160	Broca Ø4,0 x 160 mm	
TI130.0040.200	Broca Ø4,0 x 200 mm	
TI130.0041.100	Broca Ø4,1 x 100 mm	
TI130.0041.130	Broca Ø4,1 x 130 mm	
TI130.0041.160	Broca Ø4,1 x 160 mm	
TI130.0041.200	Broca Ø4,1 x 200 mm	
TI130.0042.100	Broca Ø4,2 x 100 mm	
TI130.0042.130	Broca Ø4,2 x 130 mm	
TI130.0042.160	Broca Ø4,2 x 160 mm	
TI130.0042.200	Broca Ø4,2 x 200 mm	
TI130.0043.100	Broca Ø4,3 x 100 mm	
TI130.0043.130	Broca Ø4,3 x 130 mm	
TI130.0043.160	Broca Ø4,3 x 160 mm	
TI130.0043.200	Broca Ø4,3 x 200 mm	
TI130.0044.100	Broca Ø4,4 x 100 mm	
TI130.0044.130	Broca Ø4,4 x 130 mm	
TI130.0044.160	Broca Ø4,4 x 160 mm	
TI130.0044.200	Broca Ø4,4 x 200 mm	
TI130.0045.100	Broca Ø4,5 x 100 mm	
TI130.0045.130	Broca Ø4,5 x 130 mm	
TI130.0045.160	Broca Ø4,5 x 160 mm	
TI130.0045.200	Broca Ø4,5 x 200 mm	
TI130.0046.100	Broca Ø4,6 x 100 mm	
TI130.0046.130	Broca Ø4,6 x 130 mm	
TI130.0046.160	Broca Ø4,6 x 160 mm	
TI130.0046.200	Broca Ø4,6 x 200 mm	
TI130.0047.100	Broca Ø4,7 x 100 mm	
TI130.0047.130	Broca Ø4,7 x 130 mm	
TI130.0047.160	Broca Ø4,7 x 160 mm	
TI130.0047.200	Broca Ø4,7 x 200 mm	
TI130.0048.100	Broca Ø4,8 x 100 mm	
TI130.0048.130	Broca Ø4,8 x 130 mm	
TI130.0048.160	Broca Ø4,8 x 160 mm	
TI130.0048.200	Broca Ø4,8 x 200 mm	
TI130.0049.100	Broca Ø4,9 x 100 mm	
TI130.0049.130	Broca Ø4,9 x 130 mm	
TI130.0049.160	Broca Ø4,9 x 160 mm	
TI130.0049.200	Broca Ø4,9 x 200 mm	
TI130.0050.100	Broca Ø5,0 x 100 mm	
TI130.0050.130	Broca Ø5,0 x 130 mm	
TI130.0050.160	Broca Ø5,0 x 160 mm	
TI130.0050.200	Broca Ø5,0 x 200 mm	

TI130.0055.100	Broca Ø5,5 x 100 mm	
TI130.0055.130	Broca Ø5,5 x 130 mm	
TI130.0055.160	Broca Ø5,5 x 160 mm	
TI130.0055.200	Broca Ø5,5 x 200 mm	
TI130.0060.100	Broca Ø6,0 x 100 mm	
TI130.0060.130	Broca Ø6,0 x 130 mm	
TI130.0060.160	Broca Ø6,0 x 160 mm	
TI130.0060.200	Broca Ø6,0 x 200 mm	
TI130.0065.100	Broca Ø6,5 x 100 mm	
TI130.0065.130	Broca Ø6,5 x 130 mm	
TI130.0065.160	Broca Ø6,5 x 160 mm	
TI130.0065.200	Broca Ø6,5 x 200 mm	
TI130.0070.100	Broca Ø7,0 x 100 mm	
TI130.0070.130	Broca Ø7,0 x 130 mm	
TI130.0070.160	Broca Ø7,0 x 160 mm	
TI130.0070.200	Broca Ø7,0 x 200 mm	
TI130.0075.100	Broca Ø7,5 x 100 mm	
TI130.0075.130	Broca Ø7,5 x 130 mm	
TI130.0075.160	Broca Ø7,5 x 160 mm	
TI130.0075.200	Broca Ø7,5 x 200 mm	
TI130.0080.100	Broca Ø8,0 x 100 mm	
TI130.0080.130	Broca Ø8,0 x 130 mm	
TI130.0080.160	Broca Ø8,0 x 160 mm	
TI130.0080.200	Broca Ø8,0 x 200 mm	
TI131.0010.070	Broca Canulada Ø1,0 x 070 mm	
TI131.0010.090	Broca Canulada Ø1,0 x 090 mm	
TI131.0010.110	Broca Canulada Ø1,0 x 110 mm	
TI131.0010.130	Broca Canulada Ø1,0 x 130 mm	
TI131.0010.150	Broca Canulada Ø1,0 x 150 mm	
TI131.0011.070	Broca Canulada Ø1,1 x 070 mm	
TI131.0011.090	Broca Canulada Ø1,1 x 090 mm	
TI131.0011.110	Broca Canulada Ø1,1 x 110 mm	
TI131.0011.130	Broca Canulada Ø1,1 x 130 mm	
TI131.0011.150	Broca Canulada Ø1,1 x 150 mm	
TI131.0012.070	Broca Canulada Ø1,2 x 070 mm	
TI131.0012.090	Broca Canulada Ø1,2 x 090 mm	
TI131.0012.110	Broca Canulada Ø1,2 x 110 mm	
TI131.0012.130	Broca Canulada Ø1,2 x 130 mm	









Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0012.150	Broca Canulada Ø1,2 x 150 mm	
TI131.0013.070	Broca Canulada Ø1,3 x 070 mm	
TI131.0013.090	Broca Canulada Ø1,3 x 090 mm	
TI131.0013.110	Broca Canulada Ø1,3 x 110 mm	
TI131.0013.130	Broca Canulada Ø1,3 x 130 mm	
TI131.0013.150	Broca Canulada Ø1,3 x 150 mm	
TI131.0014.070	Broca Canulada Ø1,4 x 070 mm	
TI131.0014.090	Broca Canulada Ø1,4 x 090 mm	
TI131.0014.110	Broca Canulada Ø1,4 x 110 mm	
TI131.0014.130	Broca Canulada Ø1,4 x 130 mm	
TI131.0014.150	Broca Canulada Ø1,4 x 150 mm	
TI131.0015.070	Broca Canulada Ø1,5 x 070 mm	
TI131.0015.090	Broca Canulada Ø1,5 x 090 mm	
TI131.0015.110	Broca Canulada Ø1,5 x 110 mm	
TI131.0015.130	Broca Canulada Ø1,5 x 130 mm	
TI131.0015.150	Broca Canulada Ø1,5 x 150 mm	
TI131.0016.070	Broca Canulada Ø1,6 x 070 mm	
TI131.0016.090	Broca Canulada Ø1,6 x 090 mm	
TI131.0016.110	Broca Canulada Ø1,6 x 110 mm	
TI131.0016.130	Broca Canulada Ø1,6 x 130 mm	
TI131.0016.150	Broca Canulada Ø1,6 x 150 mm	
TI131.0017.070	Broca Canulada Ø1,7 x 070 mm	
TI131.0017.090	Broca Canulada Ø1,7 x 090 mm	
TI131.0017.110	Broca Canulada Ø1,7 x 110 mm	
TI131.0017.130	Broca Canulada Ø1,7 x 130 mm	
TI131.0017.150	Broca Canulada Ø1,7 x 150 mm	
TI131.0018.070	Broca Canulada Ø1,8 x 070 mm	
TI131.0018.090	Broca Canulada Ø1,8 x 090 mm	
TI131.0018.110	Broca Canulada Ø1,8 x 110 mm	
TI131.0018.130	Broca Canulada Ø1,8 x 130 mm	
TI131.0018.150	Broca Canulada Ø1,8 x 150 mm	
TI131.0019.070	Broca Canulada Ø1,9 x 070 mm	
TI131.0019.090	Broca Canulada Ø1,9 x 090 mm	
TI131.0019.110	Broca Canulada Ø1,9 x 110 mm	
TI131.0019.130	Broca Canulada Ø1,9 x 130 mm	
TI131.0019.150	Broca Canulada Ø1,9 x 150 mm	








Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0020.070	Broca Canulada Ø2,0 x 070 mm	
TI131.0020.090	Broca Canulada Ø2,0 x 090 mm	
TI131.0020.110	Broca Canulada Ø2,0 x 110 mm	
TI131.0020.130	Broca Canulada Ø2,0 x 130 mm	
TI131.0020.150	Broca Canulada Ø2,0 x 150 mm	
TI131.0021.070	Broca Canulada Ø2,1 x 070 mm	
TI131.0021.090	Broca Canulada Ø2,1 x 090 mm	
TI131.0021.110	Broca Canulada Ø2,1 x 110 mm	
TI131.0021.130	Broca Canulada Ø2,1 x 130 mm	
TI131.0021.150	Broca Canulada Ø2,1 x 150 mm	
TI131.0022.070	Broca Canulada Ø2,2 x 070 mm	
TI131.0022.090	Broca Canulada Ø2,2 x 090 mm	
TI131.0022.110	Broca Canulada Ø2,2 x 110 mm	
TI131.0022.130	Broca Canulada Ø2,2 x 130 mm	
TI131.0022.150	Broca Canulada Ø2,2 x 150 mm	
TI131.0023.070	Broca Canulada Ø2,3 x 070 mm	
TI131.0023.090	Broca Canulada Ø2,3 x 090 mm	
TI131.0023.110	Broca Canulada Ø2,3 x 110 mm	
TI131.0023.130	Broca Canulada Ø2,3 x 130 mm	
TI131.0023.150	Broca Canulada Ø2,3 x 150 mm	
TI131.0024.070	Broca Canulada Ø2,4 x 070 mm	
TI131.0024.090	Broca Canulada Ø2,4 x 090 mm	
TI131.0024.110	Broca Canulada Ø2,4 x 110 mm	
TI131.0024.130	Broca Canulada Ø2,4 x 130 mm	
TI131.0024.150	Broca Canulada Ø2,4 x 150 mm	
TI131.0025.070	Broca Canulada Ø2,5 x 070 mm	
TI131.0025.090	Broca Canulada Ø2,5 x 090 mm	
TI131.0025.110	Broca Canulada Ø2,5 x 110 mm	
TI131.0025.130	Broca Canulada Ø2,5 x 130 mm	
TI131.0025.150	Broca Canulada Ø2,5 x 150 mm	
TI131.0026.070	Broca Canulada Ø2,6 x 070 mm	
TI131.0026.090	Broca Canulada Ø2,6 x 090 mm	
TI131.0026.110	Broca Canulada Ø2,6 x 110 mm	
TI131.0026.130	Broca Canulada Ø2,6 x 130 mm	
TI131.0026.150	Broca Canulada Ø2,6 x 150 mm	
TI131.0027.070	Broca Canulada Ø2,7 x 070 mm	
TI131.0027.090	Broca Canulada Ø2,7 x 090 mm	







Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0027.110	Broca Canulada Ø2,7 x 110 mm	
TI131.0027.130	Broca Canulada Ø2,7 x 130 mm	
TI131.0027.150	Broca Canulada Ø2,7 x 150 mm	
TI131.0028.070	Broca Canulada Ø2,8 x 070 mm	
TI131.0028.090	Broca Canulada Ø2,8 x 090 mm	
TI131.0028.110	Broca Canulada Ø2,8 x 110 mm	
TI131.0028.130	Broca Canulada Ø2,8 x 130 mm	
TI131.0028.150	Broca Canulada Ø2,8 x 150 mm	
TI131.0029.070	Broca Canulada Ø2,9 x 070 mm	
TI131.0029.090	Broca Canulada Ø2,9 x 090 mm	
TI131.0029.110	Broca Canulada Ø2,9 x 110 mm	
TI131.0029.130	Broca Canulada Ø2,9 x 130 mm	
TI131.0029.150	Broca Canulada Ø2,9 x 150 mm	
TI131.0030.080	Broca Canulada Ø3,0 x 080 mm	
TI131.0030.100	Broca Canulada Ø3,0 x 100 mm	
TI131.0030.130	Broca Canulada Ø3,0 x 130 mm	
TI131.0030.160	Broca Canulada Ø3,0 x 160 mm	
TI131.0030.180	Broca Canulada Ø3,0 x 180 mm	
TI131.0030.200	Broca Canulada Ø3,0 x 200 mm	
TI131.0031.080	Broca Canulada Ø3,1 x 080 mm	
TI131.0031.100	Broca Canulada Ø3,1 x 100 mm	
TI131.0031.130	Broca Canulada Ø3,1 x 130 mm	
TI131.0031.160	Broca Canulada Ø3,1 x 160 mm	
TI131.0031.180	Broca Canulada Ø3,1 x 180 mm	
TI131.0031.200	Broca Canulada Ø3,1 x 200 mm	
TI131.0032.080	Broca Canulada Ø3,2 x 080 mm	
TI131.0032.100	Broca Canulada Ø3,2 x 100 mm	
TI131.0032.130	Broca Canulada Ø3,2 x 130 mm	
TI131.0032.160	Broca Canulada Ø3,2 x 160 mm	
TI131.0032.180	Broca Canulada Ø3,2 x 180 mm	
TI131.0032.200	Broca Canulada Ø3,2 x 200 mm	
TI131.0033.080	Broca Canulada Ø3,3 x 080 mm	
TI131.0033.100	Broca Canulada Ø3,3 x 100 mm	
TI131.0033.130	Broca Canulada Ø3,3 x 130 mm	
TI131.0033.160	Broca Canulada Ø3,3 x 160 mm	
TI131.0033.180	Broca Canulada Ø3,3 x 180 mm	
TI131.0033.200	Broca Canulada Ø3,3 x 200 mm	

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	200 mm	
TI131.0034.080	Broca Canulada Ø3,4 x 080 mm	
TI131.0034.100	Broca Canulada Ø3,4 x 100 mm	
TI131.0034.130	Broca Canulada Ø3,4 x 130 mm	
TI131.0034.160	Broca Canulada Ø3,4 x 160 mm	
TI131.0034.180	Broca Canulada Ø3,4 x 180 mm	
TI131.0034.200	Broca Canulada Ø3,4 x 200 mm	
TI131.0035.080	Broca Canulada Ø3,5 x 080 mm	
TI131.0035.100	Broca Canulada Ø3,5 x 100 mm	
TI131.0035.130	Broca Canulada Ø3,5 x 130 mm	
TI131.0035.160	Broca Canulada Ø3,5 x 160 mm	
TI131.0035.180	Broca Canulada Ø3,5 x 180 mm	
TI131.0035.200	Broca Canulada Ø3,5 x 200 mm	
TI131.0036.080	Broca Canulada Ø3,6 x 080 mm	
TI131.0036.100	Broca Canulada Ø3,6 x 100 mm	
TI131.0036.130	Broca Canulada Ø3,6 x 130 mm	
TI131.0036.160	Broca Canulada Ø3,6 x 160 mm	
TI131.0036.180	Broca Canulada Ø3,6 x 180 mm	
TI131.0036.200	Broca Canulada Ø3,6 x 200 mm	
TI131.0037.080	Broca Canulada Ø3,7 x 080 mm	
TI131.0037.100	Broca Canulada Ø3,7 x 100 mm	
TI131.0037.130	Broca Canulada Ø3,7 x 130 mm	
TI131.0037.160	Broca Canulada Ø3,7 x 160 mm	
TI131.0037.180	Broca Canulada Ø3,7 x 180 mm	
TI131.0037.200	Broca Canulada Ø3,7 x 200 mm	
TI131.0038.080	Broca Canulada Ø3,8 x 080 mm	
TI131.0038.100	Broca Canulada Ø3,8 x 100 mm	
TI131.0038.130	Broca Canulada Ø3,8 x 130 mm	
TI131.0038.160	Broca Canulada Ø3,8 x 160 mm	
TI131.0038.180	Broca Canulada Ø3,8 x 180 mm	
TI131.0038.200	Broca Canulada Ø3,8 x 200 mm	
TI131.0039.080	Broca Canulada Ø3,9 x 080 mm	
TI131.0039.100	Broca Canulada Ø3,9 x 100 mm	
TI131.0039.130	Broca Canulada Ø3,9 x 130 mm	
TI131.0039.160	Broca Canulada Ø3,9 x 160 mm	
TI131.0039.180	Broca Canulada Ø3,9 x 180 mm	
TI131.0039.200	Broca Canulada Ø3,9 x 200 mm	










Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0040.100	Broca Canulada Ø4,0 x 100 mm	
TI131.0040.130	Broca Canulada Ø4,0 x 130 mm	
TI131.0040.160	Broca Canulada Ø4,0 x 160 mm	
TI131.0040.200	Broca Canulada Ø4,0 x 200 mm	
TI131.0041.100	Broca Canulada Ø4,1 x 100 mm	
TI131.0041.130	Broca Canulada Ø4,1 x 130 mm	
TI131.0041.160	Broca Canulada Ø4,1 x 160 mm	
TI131.0041.200	Broca Canulada Ø4,1 x 200 mm	
TI131.0042.100	Broca Canulada Ø4,2 x 100 mm	
TI131.0042.130	Broca Canulada Ø4,2 x 130 mm	
TI131.0042.160	Broca Canulada Ø4,2 x 160 mm	
TI131.0042.200	Broca Canulada Ø4,2 x 200 mm	
TI131.0043.100	Broca Canulada Ø4,3 x 100 mm	
TI131.0043.130	Broca Canulada Ø4,3 x 130 mm	
TI131.0043.160	Broca Canulada Ø4,3 x 160 mm	
TI131.0043.200	Broca Canulada Ø4,3 x 200 mm	
TI131.0044.100	Broca Canulada Ø4,4 x 100 mm	
TI131.0044.130	Broca Canulada Ø4,4 x 130 mm	
TI131.0044.160	Broca Canulada Ø4,4 x 160 mm	
TI131.0044.200	Broca Canulada Ø4,4 x 200 mm	
TI131.0045.100	Broca Canulada Ø4,5 x 100 mm	
TI131.0045.130	Broca Canulada Ø4,5 x 130 mm	
TI131.0045.160	Broca Canulada Ø4,5 x 160 mm	
TI131.0045.200	Broca Canulada Ø4,5 x 200 mm	
TI131.0046.100	Broca Canulada Ø4,6 x 100 mm	
TI131.0046.130	Broca Canulada Ø4,6 x 130 mm	
TI131.0046.160	Broca Canulada Ø4,6 x 160 mm	
TI131.0046.200	Broca Canulada Ø4,6 x 200 mm	
TI131.0047.100	Broca Canulada Ø4,7 x 100 mm	
TI131.0047.130	Broca Canulada Ø4,7 x 130 mm	
TI131.0047.160	Broca Canulada Ø4,7 x 160 mm	
TI131.0047.200	Broca Canulada Ø4,7 x 200 mm	
TI131.0048.100	Broca Canulada Ø4,8 x 100 mm	
TI131.0048.130	Broca Canulada Ø4,8 x 130 mm	





Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport







TI131.0048.160	Broca Canulada Ø4,8 x 160 mm	
TI131.0048.200	Broca Canulada Ø4,8 x 200 mm	
TI131.0049.100	Broca Canulada Ø4,9 x 100 mm	
TI131.0049.130	Broca Canulada Ø4,9 x 130 mm	
TI131.0049.160	Broca Canulada Ø4,9 x 160 mm	
TI131.0049.200	Broca Canulada Ø4,9 x 200 mm	
TI131.0050.100	Broca Canulada Ø5,0 x 100 mm	
TI131.0050.130	Broca Canulada Ø5,0 x 130 mm	
TI131.0050.160	Broca Canulada Ø5,0 x 160 mm	
TI131.0050.200	Broca Canulada Ø5,0 x 200 mm	
TI131.0055.100	Broca Canulada Ø5,5 x 100 mm	
TI131.0055.130	Broca Canulada Ø5,5 x 130 mm	
TI131.0055.160	Broca Canulada Ø5,5 x 160 mm	
TI131.0055.200	Broca Canulada Ø5,5 x 200 mm	
TI131.0060.100	Broca Canulada Ø6,0 x 100 mm	
TI131.0060.130	Broca Canulada Ø6,0 x 130 mm	
TI131.0060.160	Broca Canulada Ø6,0 x 160 mm	
TI131.0060.200	Broca Canulada Ø6,0 x 200 mm	
TI131.0065.100	Broca Canulada Ø6,5 x 100 mm	
TI131.0065.130	Broca Canulada Ø6,5 x 130 mm	
TI131.0065.160	Broca Canulada Ø6,5 x 160 mm	
TI131.0065.200	Broca Canulada Ø6,5 x 200 mm	
TI131.0070.100	Broca Canulada Ø7,0 x 100 mm	
TI131.0070.130	Broca Canulada Ø7,0 x 130 mm	
TI131.0070.160	Broca Canulada Ø7,0 x 160 mm	
TI131.0070.200	Broca Canulada Ø7,0 x 200 mm	
TI131.0075.100	Broca Canulada Ø7,5 x 100 mm	
TI131.0075.130	Broca Canulada Ø7,5 x 130 mm	
TI131.0075.160	Broca Canulada Ø7,5 x 160 mm	
TI131.0075.200	Broca Canulada Ø7,5 x 200 mm	
TI131.0080.100	Broca Canulada Ø8,0 x 100 mm	
TI131.0080.130	Broca Canulada Ø8,0 x 130 mm	
TI131.0080.160	Broca Canulada Ø8,0 x 160 mm	

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0080.200	Broca Canulada Ø8,0 x 200 mm	
TI133.1008.003	Broca Ø0,8 com Stop 3 mm ES	
TI133.1008.004	Broca Ø0,8 com Stop 4 mm ES	
TI133.1008.005	Broca Ø0,8 com Stop 5 mm ES	
TI133.1008.006	Broca Ø0,8 com Stop 6 mm ES	
TI133.1008.007	Broca Ø0,8 com Stop 7 mm ES	
TI133.1009.010	Broca Ø0,9 com Stop 10 mm ES	
TI133.1009.003	Broca Ø0,9 com Stop 3 mm ES	
TI133.1009.004	Broca Ø0,9 com Stop 4 mm ES	
TI133.1009.005	Broca Ø0,9 com Stop 5 mm ES	
TI133.1009.006	Broca Ø0,9 com Stop 6 mm ES	
TI133.1009.007	Broca Ø0,9 com Stop 7 mm ES	
TI133.0009.050	Broca Ø0,9 x 050 mm ES	
TI133.0009.060	Broca Ø0,9 x 060 mm ES	
TI133.0009.070	Broca Ø0,9 x 070 mm ES	
TI133.0009.080	Broca Ø0,9 x 080 mm ES	
TI133.0009.090	Broca Ø0,9 x 090 mm ES	
TI133.0009.120	Broca Ø0,9 x 120 mm ES	
TI133.1011.010	Broca Ø1,1 com Stop 10 mm ES	
TI133.1011.015	Broca Ø1,1 com Stop 15 mm ES	
TI133.1011.004	Broca Ø1,1 com Stop 4 mm ES	
TI133.1011.005	Broca Ø1,1 com Stop 5 mm ES	
TI133.1011.006	Broca Ø1,1 com Stop 6 mm ES	
TI133.1011.008	Broca Ø1,1 com Stop 8 mm ES	
TI133.0011.050	Broca Ø1,1 x 050 mm ES	
TI133.0011.070	Broca Ø1,1 x 070 mm ES	
TI133.0011.090	Broca Ø1,1 x 090 mm ES	
TI133.0011.120	Broca Ø1,1 x 120 mm ES	
TI133.1012.010	Broca Ø1,2 com Stop 10 mm ES	
TI133.1012.015	Broca Ø1,2 com Stop 15 mm ES	
TI133.1012.004	Broca Ø1,2 com Stop 4 mm ES	
TI133.1012.005	Broca Ø1,2 com Stop 5 mm ES	
TI133.1012.006	Broca Ø1,2 com Stop 6 mm ES	
TI133.1012.008	Broca Ø1,2 com Stop 8 mm ES	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI133.0012.050	Broca Ø1,2 x 050 mm ES	
TI133.0012.070	Broca Ø1,2 x 070 mm ES	
TI133.0012.090	Broca Ø1,2 x 090 mm ES	
TI133.0012.120	Broca Ø1,2 x 120 mm ES	
TI133.1014.004	Broca Ø1,4 com Stop 04 mm ES	
TI133.1014.006	Broca Ø1,4 com Stop 06 mm ES	
TI133.1014.008	Broca Ø1,4 com Stop 08 mm ES	
TI133.1014.010	Broca Ø1,4 com Stop 10 mm ES	
TI133.1014.012	Broca Ø1,4 com Stop 12 mm ES	
TI133.1014.015	Broca Ø1,4 com Stop 15 mm ES	
TI133.1014.020	Broca Ø1,4 com Stop 20 mm ES	
TI133.0014.070	Broca Ø1,4 x 070 mm ES	
TI133.0014.090	Broca Ø1,4 x 090 mm ES	
TI133.0014.120	Broca Ø1,4 x 120 mm ES	
TI133.0014.150	Broca Ø1,4 x 150 mm ES	
TI133.1018.010	Broca Ø1,8 com Stop 10 mm ES	
TI133.1018.015	Broca Ø1,8 com Stop 15 mm ES	
TI133.1018.020	Broca Ø1,8 com Stop 20 mm ES	
TI133.1018.025	Broca Ø1,8 com Stop 25 mm ES	
TI133.0018.070	Broca Ø1,8 x 070 mm ES	
TI133.0018.090	Broca Ø1,8 x 090 mm ES	
TI133.0018.120	Broca Ø1,8 x 120 mm ES	
TI133.0018.150	Broca Ø1,8 x 150 mm ES	
TI130.0025.160	Broca Ø2,5 x 160 mm	
TI130.0025.170	Broca Ø2,5 x 170 mm	
TI130.0025.180	Broca Ø2,5 x 180 mm	
TI130.0025.190	Broca Ø2,5 x 190 mm	
TI130.0025.200	Broca Ø2,5 x 200 mm	
TI130.0025.210	Broca Ø2,5 x 210 mm	
TI130.0025.220	Broca Ø2,5 x 220 mm	
TI130.0025.230	Broca Ø2,5 x 230 mm	
TI130.0025.240	Broca Ø2,5 x 240 mm	
TI130.0025.250	Broca Ø2,5 x 250 mm	
TI130.0025.260	Broca Ø2,5 x 260 mm	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI130.0025.270	Broca Ø2,5 x 270 mm
TI130.0025.280	Broca Ø2,5 x 280 mm
TI130.0025.290	Broca Ø2,5 x 290 mm
TI130.0025.300	Broca Ø2,5 x 300 mm
TI130.0025.310	Broca Ø2,5 x 310 mm
TI130.0025.320	Broca Ø2,5 x 320 mm
TI130.0025.330	Broca Ø2,5 x 330 mm
TI130.0025.340	Broca Ø2,5 x 340 mm
TI130.0025.350	Broca Ø2,5 x 350 mm
TI130.0025.360	Broca Ø2,5 x 360 mm
TI130.0025.370	Broca Ø2,5 x 370 mm
TI130.0025.380	Broca Ø2,5 x 380 mm
TI130.0025.390	Broca Ø2,5 x 390 mm
TI130.0025.400	Broca Ø2,5 x 400 mm
TI130.0040.150	Broca Ø4,0 x 150 mm
TI130.0040.170	Broca Ø4,0 x 170 mm
TI130.0040.180	Broca Ø4,0 x 180 mm
TI130.0040.190	Broca Ø4,0 x 190 mm
TI130.0040.210	Broca Ø4,0 x 210 mm
TI130.0040.220	Broca Ø4,0 x 220 mm
TI130.0040.230	Broca Ø4,0 x 230 mm
TI130.0040.240	Broca Ø4,0 x 240 mm
TI130.0040.250	Broca Ø4,0 x 250 mm
TI130.0040.260	Broca Ø4,0 x 260 mm
TI130.0040.270	Broca Ø4,0 x 270 mm
TI130.0040.280	Broca Ø4,0 x 280 mm
TI130.0040.290	Broca Ø4,0 x 290 mm
TI130.0040.300	Broca Ø4,0 x 300 mm
TI130.0040.310	Broca Ø4,0 x 310 mm
TI130.0040.320	Broca Ø4,0 x 320 mm
TI130.0040.330	Broca Ø4,0 x 330 mm
TI130.0040.340	Broca Ø4,0 x 340 mm
TI130.0040.350	Broca Ø4,0 x 350 mm
TI130.0040.360	Broca Ø4,0 x 360 mm


Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

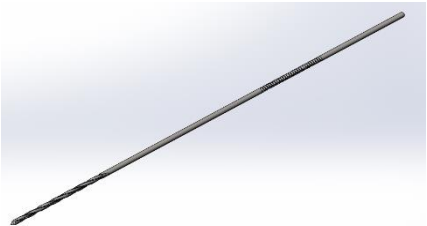
TI130.0040.370	Broca Ø4,0 x 370 mm
TI130.0040.380	Broca Ø4,0 x 380 mm
TI130.0040.390	Broca Ø4,0 x 390 mm
TI130.0040.400	Broca Ø4,0 x 400 mm
TI130.0040.410	Broca Ø4,0 x 410 mm
TI130.0040.420	Broca Ø4,0 x 420 mm
TI130.0040.430	Broca Ø4,0 x 430 mm
TI130.0040.440	Broca Ø4,0 x 440 mm
TI130.0040.450	Broca Ø4,0 x 450 mm
TI130.0042.150	Broca Ø4,2 x 150 mm
TI130.0042.170	Broca Ø4,2 x 170 mm
TI130.0042.180	Broca Ø4,2 x 180 mm
TI130.0042.190	Broca Ø4,2 x 190 mm
TI130.0042.210	Broca Ø4,2 x 210 mm
TI130.0042.220	Broca Ø4,2 x 220 mm
TI130.0042.230	Broca Ø4,2 x 230 mm
TI130.0042.240	Broca Ø4,2 x 240 mm
TI130.0042.250	Broca Ø4,2 x 250 mm
TI130.0042.260	Broca Ø4,2 x 260 mm
TI130.0042.270	Broca Ø4,2 x 270 mm
TI130.0042.280	Broca Ø4,2 x 280 mm
TI130.0042.290	Broca Ø4,2 x 290 mm
TI130.0042.300	Broca Ø4,2 x 300 mm
TI130.0042.310	Broca Ø4,2 x 310 mm
TI130.0042.320	Broca Ø4,2 x 320 mm
TI130.0042.330	Broca Ø4,2 x 330 mm
TI130.0042.340	Broca Ø4,2 x 340 mm
TI130.0042.350	Broca Ø4,2 x 350 mm
TI130.0042.360	Broca Ø4,2 x 360 mm
TI130.0042.370	Broca Ø4,2 x 370 mm
TI130.0042.380	Broca Ø4,2 x 380 mm
TI130.0042.390	Broca Ø4,2 x 390 mm
TI130.0042.400	Broca Ø4,2 x 400 mm
TI130.0042.410	Broca Ø4,2 x 410 mm

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI130.0042.420	Broca Ø4,2 x 420 mm	
TI130.0042.430	Broca Ø4,2 x 430 mm	
TI130.0042.440	Broca Ø4,2 x 440 mm	
TI130.0042.450	Broca Ø4,2 x 450 mm	
TI130.0042.460	Broca Ø4,2 x 460 mm	
TI130.0042.470	Broca Ø4,2 x 470 mm	
TI130.0042.480	Broca Ø4,2 x 480 mm	
TI130.0042.490	Broca Ø4,2 x 490 mm	
TI130.0042.500	Broca Ø4,2 x 500 mm	
TI130.9998.001	Broca Canulada Padrão Modelo 1	
TI130.9998.002	Broca Canulada Padrão Modelo 2	
TI130.9998.003	Broca Canulada Padrão Modelo 3	
TI130.9998.004	Broca Canulada Padrão Modelo 4	
TI130.9998.005	Broca Canulada Padrão Modelo 5	
TI130.9998.006	Broca Canulada Padrão Modelo 6	
TI130.9998.007	Broca Canulada Padrão Modelo 7	
TI130.9998.008	Broca Canulada Padrão Modelo 8	
TI130.9998.009	Broca Canulada Padrão Modelo 9	
TI130.9998.010	Broca Canulada Padrão Modelo 10	
TI130.9998.011	Broca Canulada Padrão Modelo 11	
TI130.9998.012	Broca Canulada Padrão Modelo 12	
TI130.9998.013	Broca Canulada Padrão Modelo 13	
TI130.9998.014	Broca Canulada Padrão Modelo 14	
TI130.9998.015	Broca Canulada Padrão Modelo 15	
TI130.9998.016	Broca Canulada Padrão Modelo 16	
TI130.9998.017	Broca Canulada Padrão Modelo 17	
TI130.9998.018	Broca Canulada Padrão Modelo 18	
TI130.9998.019	Broca Canulada Padrão Modelo 19	
TI130.9998.020	Broca Canulada Padrão Modelo 20	
TI130.9999.001	Broca Padrão Modelo 1	
TI130.9999.002	Broca Padrão Modelo 2	
TI130.9999.003	Broca Padrão Modelo 3	
TI130.9999.004	Broca Padrão Modelo 4	
TI130.9999.005	Broca Padrão Modelo 5	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI130.9999.006	Broca Padrão Modelo 6		
TI130.9999.007	Broca Padrão Modelo 7		
TI130.9999.008	Broca Padrão Modelo 8		
TI130.9999.009	Broca Padrão Modelo 9		
TI130.9999.010	Broca Padrão Modelo 10		
TI130.9999.011	Broca Padrão Modelo 11		
TI130.9999.012	Broca Padrão Modelo 12		
TI130.9999.013	Broca Padrão Modelo 13		
TI130.9999.014	Broca Padrão Modelo 14		
TI130.9999.015	Broca Padrão Modelo 15		
TI130.9999.016	Broca Padrão Modelo 16		
TI130.9999.017	Broca Padrão Modelo 17		
TI130.9999.018	Broca Padrão Modelo 18		
TI130.9999.019	Broca Padrão Modelo 19		
TI130.9999.020	Broca Padrão Modelo 20		
TI132.0025.100	Broca Graduada Ø2,5 x 100 mm		
TI132.0025.110	Broca Graduada Ø2,5 x 110 mm		
TI132.0025.120	Broca Graduada Ø2,5 x 120 mm		
TI132.0025.130	Broca Graduada Ø2,5 x 130 mm		
TI132.0025.140	Broca Graduada Ø2,5 x 140 mm		
TI132.0025.150	Broca Graduada Ø2,5 x 150 mm		
TI132.0025.160	Broca Graduada Ø2,5 x 160 mm		
TI132.0025.170	Broca Graduada Ø2,5 x 170 mm		
TI132.0025.180	Broca Graduada Ø2,5 x 180 mm		
TI132.0025.190	Broca Graduada Ø2,5 x 190 mm		
TI132.0025.200	Broca Graduada Ø2,5 x 200 mm		
TI132.0025.210	Broca Graduada Ø2,5 x 210 mm		
TI132.0025.220	Broca Graduada Ø2,5 x 220 mm		
TI132.0025.230	Broca Graduada Ø2,5 x 230 mm		
TI132.0025.240	Broca Graduada Ø2,5 x 240 mm		
TI132.0025.250	Broca Graduada Ø2,5 x 250 mm		
TI132.0025.260	Broca Graduada Ø2,5 x 260 mm		
TI132.0025.270	Broca Graduada Ø2,5 x 270 mm		
TI132.0025.280	Broca Graduada Ø2,5 x 280 mm		

Instrução de Uso

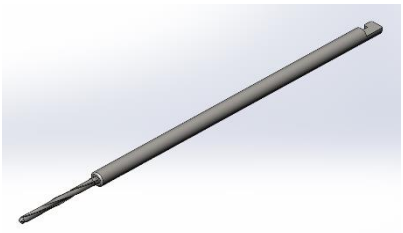

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI132.0025.290	Broca Graduada Ø2,5 x 290 mm
TI132.0025.300	Broca Graduada Ø2,5 x 300 mm
TI132.0025.310	Broca Graduada Ø2,5 x 310 mm
TI132.0025.320	Broca Graduada Ø2,5 x 320 mm
TI132.0025.330	Broca Graduada Ø2,5 x 330 mm
TI132.0025.340	Broca Graduada Ø2,5 x 340 mm
TI132.0025.350	Broca Graduada Ø2,5 x 350 mm
TI132.0025.360	Broca Graduada Ø2,5 x 360 mm
TI132.0025.370	Broca Graduada Ø2,5 x 370 mm
TI132.0025.380	Broca Graduada Ø2,5 x 380 mm
TI132.0025.390	Broca Graduada Ø2,5 x 390 mm
TI132.0025.400	Broca Graduada Ø2,5 x 400 mm
TI132.0040.150	Broca Graduada Ø4,0 x 150 mm
TI132.0040.160	Broca Graduada Ø4,0 x 160 mm
TI132.0040.170	Broca Graduada Ø4,0 x 170 mm
TI132.0040.180	Broca Graduada Ø4,0 x 180 mm
TI132.0040.190	Broca Graduada Ø4,0 x 190 mm
TI132.0040.200	Broca Graduada Ø4,0 x 200 mm
TI132.0040.210	Broca Graduada Ø4,0 x 210 mm
TI132.0040.220	Broca Graduada Ø4,0 x 220 mm
TI132.0040.230	Broca Graduada Ø4,0 x 230 mm
TI132.0040.240	Broca Graduada Ø4,0 x 240 mm
TI132.0040.250	Broca Graduada Ø4,0 x 250 mm
TI132.0040.260	Broca Graduada Ø4,0 x 260 mm
TI132.0040.270	Broca Graduada Ø4,0 x 270 mm
TI132.0040.280	Broca Graduada Ø4,0 x 280 mm
TI132.0040.290	Broca Graduada Ø4,0 x 290 mm
TI132.0040.300	Broca Graduada Ø4,0 x 300 mm
TI132.0040.310	Broca Graduada Ø4,0 x 310 mm
TI132.0040.320	Broca Graduada Ø4,0 x 320 mm
TI132.0040.330	Broca Graduada Ø4,0 x 330 mm
TI132.0040.340	Broca Graduada Ø4,0 x 340 mm
TI132.0040.350	Broca Graduada Ø4,0 x 350 mm
TI132.0040.360	Broca Graduada Ø4,0 x 360 mm

Instrução de Uso




Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport







TI132.0040.370	Broca Graduada Ø4,0 x 370 mm
TI132.0040.380	Broca Graduada Ø4,0 x 380 mm
TI132.0040.390	Broca Graduada Ø4,0 x 390 mm
TI132.0040.400	Broca Graduada Ø4,0 x 400 mm
TI132.0042.250	Broca Graduada Ø4,2 x 250 mm
TI132.0042.260	Broca Graduada Ø4,2 x 260 mm
TI132.0042.270	Broca Graduada Ø4,2 x 270 mm
TI132.0042.280	Broca Graduada Ø4,2 x 280 mm
TI132.0042.290	Broca Graduada Ø4,2 x 290 mm
TI132.0042.300	Broca Graduada Ø4,2 x 300 mm
TI132.0042.310	Broca Graduada Ø4,2 x 310 mm
TI132.0042.320	Broca Graduada Ø4,2 x 320 mm
TI132.0042.330	Broca Graduada Ø4,2 x 330 mm
TI132.0042.340	Broca Graduada Ø4,2 x 340 mm
TI132.0042.350	Broca Graduada Ø4,2 x 350 mm
TI132.0042.360	Broca Graduada Ø4,2 x 360 mm
TI132.0042.370	Broca Graduada Ø4,2 x 370 mm
TI132.0042.380	Broca Graduada Ø4,2 x 380 mm
TI132.0042.390	Broca Graduada Ø4,2 x 390 mm
TI132.0042.400	Broca Graduada Ø4,2 x 400 mm
TI132.0042.410	Broca Graduada Ø4,2 x 410 mm
TI132.0042.420	Broca Graduada Ø4,2 x 420 mm
TI132.0042.430	Broca Graduada Ø4,2 x 430 mm
TI132.0042.440	Broca Graduada Ø4,2 x 440 mm
TI132.0042.450	Broca Graduada Ø4,2 x 450 mm
TI132.0042.460	Broca Graduada Ø4,2 x 460 mm
TI132.0042.470	Broca Graduada Ø4,2 x 470 mm
TI132.0042.480	Broca Graduada Ø4,2 x 480 mm
TI132.0042.490	Broca Graduada Ø4,2 x 490 mm
TI132.0042.500	Broca Graduada Ø4,2 x 500 mm
TI132.0042.510	Broca Graduada Ø4,2 x 510 mm
TI132.0042.520	Broca Graduada Ø4,2 x 520 mm
TI132.0042.530	Broca Graduada Ø4,2 x 530 mm
TI132.0042.540	Broca Graduada Ø4,2 x 540 mm

TI132.0042.550	Broca Graduada Ø4,2 x 550 mm		
TI133.0015.070	Broca Ø1,5 x 070 mm ES		
TI133.0015.090	Broca Ø1,5 x 090 mm ES		
TI133.0015.120	Broca Ø1,5 x 120 mm ES		
TI133.0015.150	Broca Ø1,5 x 150 mm ES		
TI133.0020.070	Broca Ø2,0 x 070 mm ES		
TI133.0020.090	Broca Ø2,0 x 090 mm ES		
TI133.0020.100	Broca Ø2,0 x 100 mm ES		
TI133.0020.120	Broca Ø2,0 x 120 mm ES		
TI133.0020.150	Broca Ø2,0 x 150 mm ES		
TI133.1015.005	Broca Ø1,5 com Stop 05 mm ES		
TI133.1015.010	Broca Ø1,5 com Stop 10 mm ES		
TI133.1015.015	Broca Ø1,5 com Stop 15 mm ES		
TI133.1015.020	Broca Ø1,5 com Stop 20 mm ES		
TI133.1020.010	Broca Ø2,0 com Stop 10 mm ES		
TI133.1020.015	Broca Ø2,0 com Stop 15 mm ES		
TI133.1020.020	Broca Ø2,0 com Stop 20 mm ES		
TI133.1020.025	Broca Ø2,0 com Stop 25 mm ES		
TI131.0067.100	Broca Canulada Ø6,7 x 100mm		
TI131.0067.110	Broca Canulada Ø6,7 x 110mm		
TI131.0067.120	Broca Canulada Ø6,7 x 120mm		
TI131.0067.130	Broca Canulada Ø6,7 x 130mm		
TI131.0067.140	Broca Canulada Ø6,7 x 140mm		
TI131.0067.150	Broca Canulada Ø6,7 x 150mm		
TI131.0067.160	Broca Canulada Ø6,7 x 160mm		
TI131.0067.170	Broca Canulada Ø6,7 x 170mm		
TI131.0067.180	Broca Canulada Ø6,7 x 180mm		
TI131.0067.190	Broca Canulada Ø6,7 x 190mm		
TI131.0067.200	Broca Canulada Ø6,7 x 200mm		
TI131.0067.210	Broca Canulada Ø6,7 x 210mm		
TI131.0067.220	Broca Canulada Ø6,7 x 220mm		
TI131.0067.230	Broca Canulada Ø6,7 x 230mm		
TI131.0067.240	Broca Canulada Ø6,7 x 240mm		
TI131.0067.250	Broca Canulada Ø6,7 x 250mm		














Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport














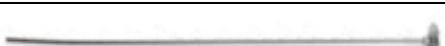
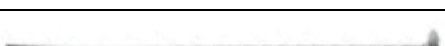
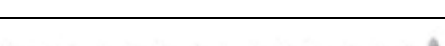
TI131.0067.260	Broca Canulada Ø6,7 x 260mm	
TI131.0067.270	Broca Canulada Ø6,7 x 270mm	
TI131.0067.280	Broca Canulada Ø6,7 x 280mm	
TI131.0067.290	Broca Canulada Ø6,7 x 290mm	
TI131.0067.300	Broca Canulada Ø6,7 x 300mm	
TI131.0067.310	Broca Canulada Ø6,7 x 310mm	
TI131.0067.320	Broca Canulada Ø6,7 x 320mm	
TI131.0067.330	Broca Canulada Ø6,7 x 330mm	
TI131.0067.340	Broca Canulada Ø6,7 x 340mm	
TI131.0067.350	Broca Canulada Ø6,7 x 350mm	
TI131.0067.360	Broca Canulada Ø6,7 x 360mm	
TI131.0067.370	Broca Canulada Ø6,7 x 370mm	
TI131.0067.380	Broca Canulada Ø6,7 x 380mm	
TI131.0067.390	Broca Canulada Ø6,7 x 390mm	
TI131.0067.400	Broca Canulada Ø6,7 x 400mm	
TI122.0020.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 10 x 50mm	
TI122.0020.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 15 x 50mm	
TI122.0020.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 20 x 50mm	
TI122.0020.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 25 x 50mm	
TI122.0020.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 30 x 50mm	
TI122.0025.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 10 x 50mm	
TI122.0025.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 15 x 50mm	
TI122.0025.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 20 x 50mm	
TI122.0025.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 25 x 50mm	
TI122.0025.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 30 x 50mm	
TI122.0030.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 10 x 50mm	
TI122.0030.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 15 x 50mm	
TI122.0030.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 20 x 50mm	
TI122.0030.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 25 x 50mm	

TI122.0030.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 30 x 50mm	
TI122.2020.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 10 x 50mm	
TI122.2020.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 15 x 50mm	
TI122.2020.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 20 x 50mm	
TI122.2020.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 25 x 50mm	
TI122.2020.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 30 x 50mm	
TI122.2025.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 10 x 50mm	
TI122.2025.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 15 x 50mm	
TI122.2025.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 20 x 50mm	
TI122.2025.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 25 x 50mm	
TI122.2025.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 30 x 50mm	
TI122.2030.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 10 x 50mm	
TI122.2030.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 15 x 50mm	
TI122.2030.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 20 x 50mm	
TI122.2030.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 25 x 50mm	
TI122.2030.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 30 x 50mm	
TI270.1035.001	MACHO CORTICAL Ø3,5 MM MODELO 1	
TI135.0030.180	BROCA GRADUADA CANULADA Ø3,0 X 180 MM	
TI135.0040.220	BROCA GRADUADA CANULADA Ø4,0 X 220 MM	













Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0000.009	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - MINI	
TI130.0000.013	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - MINI	
TI130.0000.015	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - MINI	
TI130.0000.021	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - MINI	
TI130.0000.024	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - MINI	
TI130.0000.029	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - MINI	
TI130.0000.109	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - CURTA	
TI130.0000.113	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - CURTA	
TI130.0000.115	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - CURTA	
TI130.0000.121	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - CURTA	
TI130.0000.124	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - CURTA	
TI130.0000.129	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - CURTA	
TI130.0000.209	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - STD	








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport




TI130.0000.213	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - STD	
TI130.0000.215	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - STD	
TI130.0000.221	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - STD	
TI130.0000.224	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - STD	
TI130.0000.229	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - STD	
TI130.0000.309	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - LONGA	
TI130.0000.313	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - LONGA	
TI130.0000.315	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - LONGA	
TI130.0000.321	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - LONGA	
TI130.0000.324	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - LONGA	
TI130.0000.329	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - LONGA	
TI131.2000.009	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø0,9	
TI131.2000.013	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø1,3	
TI131.2000.015	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø1,5	
TI131.2000.021	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,1	
TI131.2000.024	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,4	



Instrução de Uso
 Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.2000.029	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,9	
TI130.0037.110	BROCA Ø3,7 X 110 MM	
TI130.0037.120	BROCA Ø3,7 X 120 MM	
TI130.0037.140	BROCA Ø3,7 X 140 MM	
TI130.0037.150	BROCA Ø3,7 X 150 MM	
TI130.0037.170	BROCA Ø3,7 X 170 MM	
TI130.0037.190	BROCA Ø3,7 X 190 MM	
TI131.0037.110	BROCA CANULADA Ø3,7 X 110MM	
TI131.0037.120	BROCA CANULADA Ø3,7 X 120MM	
TI131.0037.140	BROCA CANULADA Ø3,7 X 140MM	
TI131.0037.150	BROCA CANULADA Ø3,7 X 150MM	
TI131.0037.170	BROCA CANULADA Ø3,7 X 170MM	

Instrução de Uso
 Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport


TI131.0037.190	BROCA CANULADA Ø3,7 X 190MM	
TI131.0053.100	BROCA CANULADA Ø5,3 X 100 MM	
TI131.0053.120	BROCA CANULADA Ø5,3 X 120 MM	
TI131.0053.140	BROCA CANULADA Ø5,3 X 140 MM	
TI131.0053.160	BROCA CANULADA Ø5,3 X 160 MM	
TI131.0053.200	BROCA CANULADA Ø5,3 X 200 MM	
TI131.0053.220	BROCA CANULADA Ø5,3 X 220 MM	
TI131.0053.240	BROCA CANULADA Ø5,3 X 240 MM	
TI131.0053.260	BROCA CANULADA Ø5,3 X 260 MM	
TI131.0053.280	BROCA CANULADA Ø5,3 X 280 MM	
TI131.0053.300	BROCA CANULADA Ø5,3 X 300 MM	

TI172.0000.001	SONDA PONTA TIPO GANCHO 3,4MM MARCAÇÕES DE 5MM	
TI131.0080.120	BROCA CANULADA Ø8,0 X 120 MM	
TI131.0080.150	BROCA CANULADA Ø8,0 X 150 MM	
TI131.0080.180	BROCA CANULADA Ø8,0 X 180 MM	
TI131.0080.220	BROCA CANULADA Ø8,0 X 220 MM	
TI131.0080.240	BROCA CANULADA Ø8,0 X 240 MM	
TI131.0080.260	BROCA CANULADA Ø8,0 X 260 MM	
TI131.0080.280	BROCA CANULADA Ø8,0 X 280 MM	
TI131.0080.300	BROCA CANULADA Ø8,0 X 300 MM	
TI131.0090.100	BROCA CANULADA Ø9,0 X 100 MM	
TI131.0090.110	BROCA CANULADA Ø9,0 X 110 MM	
TI131.0090.120	BROCA CANULADA Ø9,0 X 120 MM	
TI131.0090.130	BROCA CANULADA Ø9,0 X 130 MM	
TI131.0090.140	BROCA CANULADA Ø9,0 X 140 MM	
TI131.0090.150	BROCA CANULADA Ø9,0 X 150 MM	
TI131.0090.160	BROCA CANULADA Ø9,0 X 160 MM	
TI131.0090.170	BROCA CANULADA Ø9,0 X 170 MM	
TI131.0090.180	BROCA CANULADA Ø9,0 X 180 MM	
TI131.0090.190	BROCA CANULADA Ø9,0 X 190 MM	
TI131.0090.200	BROCA CANULADA Ø9,0 X 200 MM	
TI131.0090.210	BROCA CANULADA Ø9,0 X 210 MM	
TI131.0090.220	BROCA CANULADA Ø9,0 X 220 MM	
TI131.0090.230	BROCA CANULADA Ø9,0 X 230 MM	
TI131.0090.240	BROCA CANULADA Ø9,0 X 240 MM	
TI131.0090.250	BROCA CANULADA Ø9,0 X 250 MM	
TI131.0090.260	BROCA CANULADA Ø9,0 X 260 MM	
TI131.0090.270	BROCA CANULADA Ø9,0 X 270 MM	
TI131.0090.280	BROCA CANULADA Ø9,0 X 280 MM	
TI131.0090.290	BROCA CANULADA Ø9,0 X 290 MM	
TI131.0090.300	BROCA CANULADA Ø9,0 X 300 MM	

TI131.0100.100	BROCA CANULADA Ø10,0 X 100 MM	
TI131.0100.110	BROCA CANULADA Ø10,0 X 110 MM	
TI131.0100.120	BROCA CANULADA Ø10,0 X 120 MM	
TI131.0100.130	BROCA CANULADA Ø10,0 X 130 MM	
TI131.0100.140	BROCA CANULADA Ø10,0 X 140 MM	
TI131.0100.150	BROCA CANULADA Ø10,0 X 150 MM	
TI131.0100.160	BROCA CANULADA Ø10,0 X 160 MM	
TI131.0100.170	BROCA CANULADA Ø10,0 X 170 MM	
TI131.0100.180	BROCA CANULADA Ø10,0 X 180 MM	
TI131.0100.190	BROCA CANULADA Ø10,0 X 190 MM	
TI131.0100.200	BROCA CANULADA Ø10,0 X 200 MM	
TI131.0100.210	BROCA CANULADA Ø10,0 X 210 MM	
TI131.0100.220	BROCA CANULADA Ø10,0 X 220 MM	
TI131.0100.230	BROCA CANULADA Ø10,0 X 230 MM	
TI131.0100.240	BROCA CANULADA Ø10,0 X 240 MM	
TI131.0100.250	BROCA CANULADA Ø10,0 X 250 MM	
TI131.0100.260	BROCA CANULADA Ø10,0 X 260 MM	
TI131.0100.270	BROCA CANULADA Ø10,0 X 270 MM	
TI131.0100.280	BROCA CANULADA Ø10,0 X 280 MM	
TI131.0100.290	BROCA CANULADA Ø10,0 X 290 MM	
TI131.0100.300	BROCA CANULADA Ø10,0 X 300 MM	
TI131.0110.100	BROCA CANULADA Ø11,0 X 100 MM	
TI131.0110.110	BROCA CANULADA Ø11,0 X 110 MM	
TI131.0110.120	BROCA CANULADA Ø11,0 X 120 MM	
TI131.0110.130	BROCA CANULADA Ø11,0 X 130 MM	
TI131.0110.140	BROCA CANULADA Ø11,0 X 140 MM	
TI131.0110.150	BROCA CANULADA Ø11,0 X 150 MM	
TI131.0110.160	BROCA CANULADA Ø11,0 X 160 MM	
TI131.0110.170	BROCA CANULADA Ø11,0 X 170 MM	
TI131.0110.180	BROCA CANULADA Ø11,0 X 180 MM	
TI131.0110.190	BROCA CANULADA Ø11,0 X 190 MM	
TI131.0110.200	BROCA CANULADA Ø11,0 X 200 MM	
TI131.0110.210	BROCA CANULADA Ø11,0 X 210 MM	
TI131.0110.220	BROCA CANULADA Ø11,0 X 220 MM	



Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI131.0110.230	BROCA CANULADA Ø11,0 X 230 MM		
TI131.0110.240	BROCA CANULADA Ø11,0 X 240 MM		
TI131.0110.250	BROCA CANULADA Ø11,0 X 250 MM		
TI131.0110.260	BROCA CANULADA Ø11,0 X 260 MM		
TI131.0110.270	BROCA CANULADA Ø11,0 X 270 MM		
TI131.0110.280	BROCA CANULADA Ø11,0 X 280 MM		
TI131.0110.290	BROCA CANULADA Ø11,0 X 290 MM		
TI131.0110.300	BROCA CANULADA Ø11,0 X 300 MM		
TI380.0080.100	FRESA CANULADA Ø8,0 X 100 MM		
TI380.0080.110	FRESA CANULADA Ø8,0 X 110 MM		
TI380.0080.120	FRESA CANULADA Ø8,0 X 120 MM		
TI380.0080.130	FRESA CANULADA Ø8,0 X 130 MM		
TI380.0080.140	FRESA CANULADA Ø8,0 X 140 MM		
TI380.0080.150	FRESA CANULADA Ø8,0 X 150 MM		
TI380.0080.160	FRESA CANULADA Ø8,0 X 160 MM		
TI380.0080.170	FRESA CANULADA Ø8,0 X 170 MM		
TI380.0080.180	FRESA CANULADA Ø8,0 X 180 MM		
TI380.0080.190	FRESA CANULADA Ø8,0 X 190 MM		
TI380.0080.200	FRESA CANULADA Ø8,0 X 200 MM		
TI380.0080.210	FRESA CANULADA Ø8,0 X 210 MM		
TI380.0080.220	FRESA CANULADA Ø8,0 X 220 MM		
TI380.0080.230	FRESA CANULADA Ø8,0 X 230 MM		
TI380.0080.240	FRESA CANULADA Ø8,0 X 240 MM		
TI380.0080.250	FRESA CANULADA Ø8,0 X 250 MM		
TI380.0080.260	FRESA CANULADA Ø8,0 X 260 MM		
TI380.0080.270	FRESA CANULADA Ø8,0 X 270 MM		
TI380.0080.280	FRESA CANULADA Ø8,0 X 280 MM		
TI380.0080.290	FRESA CANULADA Ø8,0 X 290 MM		
TI380.0080.300	FRESA CANULADA Ø8,0 X 300 MM		
TI380.0090.100	FRESA CANULADA Ø9,0 X 100 MM		
TI380.0090.110	FRESA CANULADA Ø9,0 X 110 MM		
TI380.0090.120	FRESA CANULADA Ø9,0 X 120 MM		
TI380.0090.130	FRESA CANULADA Ø9,0 X 130 MM		
TI380.0090.140	FRESA CANULADA Ø9,0 X 140 MM		




Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport









TI380.0090.150	FRESA CANULADA Ø9,0 X 150 MM	
TI380.0090.160	FRESA CANULADA Ø9,0 X 160 MM	
TI380.0090.170	FRESA CANULADA Ø9,0 X 170 MM	
TI380.0090.180	FRESA CANULADA Ø9,0 X 180 MM	
TI380.0090.190	FRESA CANULADA Ø9,0 X 190 MM	
TI380.0090.200	FRESA CANULADA Ø9,0 X 200 MM	
TI380.0090.210	FRESA CANULADA Ø9,0 X 210 MM	
TI380.0090.220	FRESA CANULADA Ø9,0 X 220 MM	
TI380.0090.230	FRESA CANULADA Ø9,0 X 230 MM	
TI380.0090.240	FRESA CANULADA Ø9,0 X 240 MM	
TI380.0090.250	FRESA CANULADA Ø9,0 X 250 MM	
TI380.0090.260	FRESA CANULADA Ø9,0 X 260 MM	
TI380.0090.270	FRESA CANULADA Ø9,0 X 270 MM	
TI380.0090.280	FRESA CANULADA Ø9,0 X 280 MM	
TI380.0090.290	FRESA CANULADA Ø9,0 X 290 MM	
TI380.0090.300	FRESA CANULADA Ø9,0 X 300 MM	
TI380.0100.100	FRESA CANULADA Ø10,0 X 100 MM	
TI380.0100.110	FRESA CANULADA Ø10,0 X 110 MM	
TI380.0100.120	FRESA CANULADA Ø10,0 X 120 MM	
TI380.0100.130	FRESA CANULADA Ø10,0 X 130 MM	
TI380.0100.140	FRESA CANULADA Ø10,0 X 140 MM	
TI380.0100.150	FRESA CANULADA Ø10,0 X 150 MM	
TI380.0100.160	FRESA CANULADA Ø10,0 X 160 MM	
TI380.0100.170	FRESA CANULADA Ø10,0 X 170 MM	
TI380.0100.180	FRESA CANULADA Ø10,0 X 180 MM	
TI380.0100.190	FRESA CANULADA Ø10,0 X 190 MM	
TI380.0100.200	FRESA CANULADA Ø10,0 X 200 MM	
TI380.0100.210	FRESA CANULADA Ø10,0 X 210 MM	
TI380.0100.220	FRESA CANULADA Ø10,0 X 220 MM	
TI380.0100.230	FRESA CANULADA Ø10,0 X 230 MM	
TI380.0100.240	FRESA CANULADA Ø10,0 X 240 MM	
TI380.0100.250	FRESA CANULADA Ø10,0 X 250 MM	
TI380.0100.260	FRESA CANULADA Ø10,0 X 260 MM	
TI380.0100.270	FRESA CANULADA Ø10,0 X 270 MM	

Instrução de Uso







Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

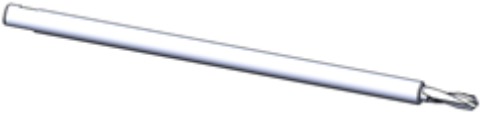



TI380.0100.280	FRESA CANULADA Ø10,0 X 280 MM	
TI380.0100.290	FRESA CANULADA Ø10,0 X 290 MM	
TI380.0100.300	FRESA CANULADA Ø10,0 X 300 MM	
TI380.0110.100	FRESA CANULADA Ø11,0 X 100 MM	
TI380.0110.110	FRESA CANULADA Ø11,0 X 110 MM	
TI380.0110.120	FRESA CANULADA Ø11,0 X 120 MM	
TI380.0110.130	FRESA CANULADA Ø11,0 X 130 MM	
TI380.0110.140	FRESA CANULADA Ø11,0 X 140 MM	
TI380.0110.150	FRESA CANULADA Ø11,0 X 150 MM	
TI380.0110.160	FRESA CANULADA Ø11,0 X 160 MM	
TI380.0110.170	FRESA CANULADA Ø11,0 X 170 MM	
TI380.0110.180	FRESA CANULADA Ø11,0 X 180 MM	
TI380.0110.190	FRESA CANULADA Ø11,0 X 190 MM	
TI380.0110.200	FRESA CANULADA Ø11,0 X 200 MM	
TI380.0110.210	FRESA CANULADA Ø11,0 X 210 MM	
TI380.0110.220	FRESA CANULADA Ø11,0 X 220 MM	
TI380.0110.230	FRESA CANULADA Ø11,0 X 230 MM	
TI380.0110.240	FRESA CANULADA Ø11,0 X 240 MM	
TI380.0110.250	FRESA CANULADA Ø11,0 X 250 MM	
TI380.0110.260	FRESA CANULADA Ø11,0 X 260 MM	
TI380.0110.270	FRESA CANULADA Ø11,0 X 270 MM	
TI380.0110.280	FRESA CANULADA Ø11,0 X 280 MM	
TI380.0110.290	FRESA CANULADA Ø11,0 X 290 MM	
TI380.0110.300	FRESA CANULADA Ø11,0 X 300 MM	
TI136.0000.060	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø6,0 MM	
TI136.0000.065	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø6,5 MM	



Instrução de Uso
 Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport


TI136.0000.070	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø7,0 MM	
TI136.0000.075	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø7,5 MM	
TI136.0000.080	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø8,0 MM	
TI136.0000.085	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø8,5 MM	
TI136.0000.090	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø9,0 MM	
TI136.0000.095	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø9,5 MM	
TI136.0000.100	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø10,0 MM	
TI136.0000.105	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø10,5 MM	

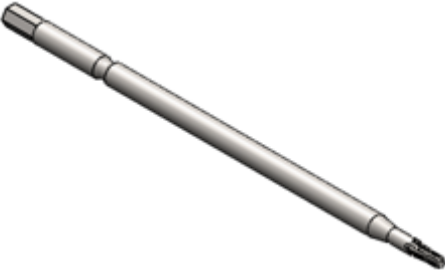

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI136.0000.110	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø11,0 MM	
TI136.0000.115	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø11,5 MM	
TI136.0000.120	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø12,0 MM	
TI310.0000.005	PINO DE GUIA DE BROCA OFFSET 3,5 MM	
TI154.0018.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 60MM	
TI154.0018.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 70MM	
TI154.0018.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 80MM	
TI154.0018.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 90MM	
TI154.0018.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 100MM	
TI154.0018.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 110MM	
TI154.0018.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 120MM	
TI154.0027.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 60MM	
TI154.0027.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 70MM	
TI154.0027.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 80MM	
TI154.0027.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 90MM	

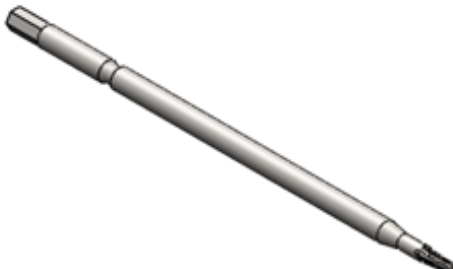
TI154.0027.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 100MM	
TI154.0027.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 110MM	
TI154.0027.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 120MM	
TI131.0019.060	BROCA CANULADA Ø1,9 X 60 MM	
TI131.0019.080	BROCA CANULADA Ø1,9 X 80 MM	
TI131.0019.100	BROCA CANULADA Ø1,9 X 100 MM	
TI131.0019.120	BROCA CANULADA Ø1,9 X 120 MM	
TI131.0019.140	BROCA CANULADA Ø1,9 X 140 MM	
TI131.0019.160	BROCA CANULADA Ø1,9 X 160 MM	
TI154.0031.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 60MM	
TI154.0031.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 70MM	
TI154.0031.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 80MM	
TI154.0031.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 90MM	
TI154.0031.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 100MM	
TI154.0031.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 110MM	
TI154.0031.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 120MM	
TI131.0030.070	BROCA CANULADA Ø3,0 X 70 MM	
TI131.0030.090	BROCA CANULADA Ø3,0 X 90 MM	
TI131.0030.110	BROCA CANULADA Ø3,0 X 110 MM	
TI131.0030.120	BROCA CANULADA Ø3,0 X 120 MM	
TI131.0030.140	BROCA CANULADA Ø3,0 X 140 MM	
TI131.0030.150	BROCA CANULADA Ø3,0 X 150 MM	
TI131.0031.070	BROCA CANULADA Ø3,1 X 70 MM	
TI131.0031.090	BROCA CANULADA Ø3,1 X 90 MM	
TI131.0031.110	BROCA CANULADA Ø3,1 X 110 MM	
TI131.0031.120	BROCA CANULADA Ø3,1 X 120 MM	
TI131.0031.140	BROCA CANULADA Ø3,1 X 140 MM	

TI131.0031.150	BROCA CANULADA Ø3,1 X 150 MM	
TI154.0042.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 60MM	
TI154.0042.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 70MM	
TI154.0042.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 80MM	
TI154.0042.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 90MM	
TI154.0042.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 100MM	
TI154.0042.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 110MM	
TI154.0042.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 120MM	
TI154.0042.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 130MM	
TI154.0042.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 140MM	
TI154.0042.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 150MM	
TI154.0042.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 160MM	
TI154.0042.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 170MM	
TI154.0042.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 180MM	
TI154.0062.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 60MM	
TI154.0062.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 70MM	
TI154.0062.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 80MM	
TI154.0062.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 90MM	
TI154.0062.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 100MM	
TI154.0062.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 110MM	
TI154.0062.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 120MM	


TI154.0062.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 130MM	
TI154.0062.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 140MM	
TI154.0062.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 150MM	
TI154.0062.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 160MM	
TI154.0062.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 170MM	
TI154.0062.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 180MM	
TI131.0042.070	BROCA CANULADA Ø4,2 X 70 MM	
TI131.0042.080	BROCA CANULADA Ø4,2 X 80 MM	
TI131.0042.090	BROCA CANULADA Ø4,2 X 90 MM	
TI131.0042.110	BROCA CANULADA Ø4,2 X 110 MM	
TI131.0042.120	BROCA CANULADA Ø4,2 X 120 MM	
TI131.0042.140	BROCA CANULADA Ø4,2 X 140 MM	
TI131.0042.150	BROCA CANULADA Ø4,2 X 150 MM	
TI131.0042.170	BROCA CANULADA Ø4,2 X 170 MM	
TI131.0042.180	BROCA CANULADA Ø4,2 X 180 MM	
TI131.0042.190	BROCA CANULADA Ø4,2 X 190 MM	
TI131.0042.210	BROCA CANULADA Ø4,2 X 210 MM	
TI131.0042.220	BROCA CANULADA Ø4,2 X 220 MM	
TI131.0042.230	BROCA CANULADA Ø4,2 X 230 MM	
TI131.0042.240	BROCA CANULADA Ø4,2 X 240 MM	
TI131.0042.250	BROCA CANULADA Ø4,2 X 250 MM	
TI131.0042.260	BROCA CANULADA Ø4,2 X 260 MM	
TI131.0042.270	BROCA CANULADA Ø4,2 X 270 MM	
TI131.0042.280	BROCA CANULADA Ø4,2 X 280 MM	
TI131.0042.290	BROCA CANULADA Ø4,2 X 290 MM	
TI131.0042.300	BROCA CANULADA Ø4,2 X 300 MM	
TI154.2017.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 50MM (ES)	
TI154.2017.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 60MM	

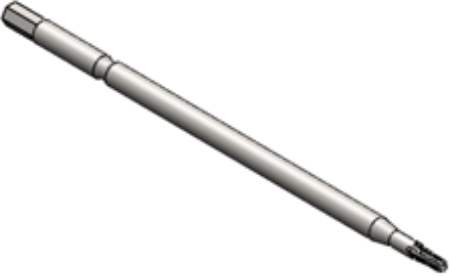

	(ES)	
TI154.2017.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 70MM (ES)	
TI154.2017.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 80MM (ES)	
TI154.2017.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 90MM (ES)	
TI154.2017.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 100MM (ES)	
TI154.2017.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 110MM (ES)	
TI154.2017.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 120MM (ES)	
TI154.2018.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 50MM (ES)	
TI154.2018.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 60MM (ES)	
TI154.2018.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 70MM (ES)	
TI154.2018.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 80MM (ES)	
TI154.2018.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 90MM (ES)	
TI154.2018.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 100MM (ES)	
TI154.2018.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 110MM (ES)	
TI154.2018.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 120MM (ES)	
TI154.0029.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 50MM	
TI154.0029.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 60MM	
TI154.0029.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 70MM	
TI154.0029.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 80MM	
TI154.0029.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 90MM	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport


TI154.0029.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 100MM		
TI154.0029.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 110MM		
TI154.0029.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 120MM		
TI154.0029.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 130MM		
TI154.0029.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 140 MM		
TI154.0029.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 150MM		
TI154.0029.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 160MM		
TI154.0029.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 170MM		
TI154.0029.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 180MM		
TI154.0029.190	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 190MM		
TI154.0029.200	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 200MM		
TI154.2021.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 50MM (ES)		
TI154.2021.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 60MM (ES)		
TI154.2021.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 70MM (ES)		
TI154.2021.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 80MM (ES)		
TI154.2021.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 90MM (ES)		
TI154.2021.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 100MM (ES)		
TI154.2021.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 110MM (ES)		
TI154.2021.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x		

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport










	120MM (ES)	
TI154.0025.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 50MM	
TI154.0025.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 60MM	
TI154.0025.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 70MM	
TI154.0025.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 80MM	
TI154.0025.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 90MM	
TI154.0025.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 100MM	
TI154.0025.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 110MM	
TI154.0025.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 120MM	
TI154.0025.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 150MM	
TI154.0035.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 50MM	
TI154.0035.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 60MM	
TI154.0035.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 70MM	
TI154.0035.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 80MM	
TI154.0035.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 90MM	
TI154.0035.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 100MM	
TI154.0035.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 110MM	
TI154.0035.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 120MM	
TI154.0035.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 130MM	
TI154.0035.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 140 MM	
TI154.0035.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 150MM	
TI154.0035.180	ESCAREADOR CANULADO PARA	

	PARAFUSO Ø3,5 x 180MM	
TI154.3017.050	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 50MM (ES)	
TI154.3017.060	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 60MM (ES)	
TI154.3017.070	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 70MM (ES)	
TI154.3017.080	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 80MM (ES)	
TI154.3017.090	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 90MM (ES)	
TI154.3017.100	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 100MM (ES)	
TI154.3017.110	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 110MM (ES)	
TI154.3017.120	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 120MM (ES)	
TI150.2020.050	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 050MM	
TI150.2020.060	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 060MM	
TI150.2020.070	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 070MM	
TI150.2020.080	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 080MM	
TI150.2020.090	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 090MM	
TI150.2020.100	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 100MM	
TI150.2020.110	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 110MM	
TI150.2020.120	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 120MM	
TI150.2020.130	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 130MM	
TI150.2020.140	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 140MM	
TI150.2020.150	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 150MM	
TI130.1012.050	BROCA Ø1,2 X 050 MM	
TI130.1012.060	BROCA Ø1,2 X 060 MM	
TI130.1012.070	BROCA Ø1,2 X 070 MM	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport






















TI130.1012.080	BROCA Ø1,2 X 080 MM	
TI130.1012.090	BROCA Ø1,2 X 090 MM	
TI130.1012.100	BROCA Ø1,2 X 100 MM	
TI130.1012.110	BROCA Ø1,2 X 110 MM	
TI130.1012.120	BROCA Ø1,2 X 120 MM	
TI130.1012.130	BROCA Ø1,2 X 130 MM	
TI130.1012.140	BROCA Ø1,2 X 140 MM	
TI130.1012.150	BROCA Ø1,2 X 150 MM	
TI130.1015.050	BROCA Ø1,5 X 050 MM	
TI130.1015.060	BROCA Ø1,5 X 060 MM	
TI130.1015.070	BROCA Ø1,5 X 070 MM	
TI130.1015.080	BROCA Ø1,5 X 080 MM	
TI130.1015.090	BROCA Ø1,5 X 090 MM	
TI130.1015.100	BROCA Ø1,5 X 100 MM	
TI130.1015.110	BROCA Ø1,5 X 110 MM	
TI130.1015.120	BROCA Ø1,5 X 120 MM	
TI130.1015.130	BROCA Ø1,5 X 130 MM	
TI130.1015.140	BROCA Ø1,5 X 140 MM	
TI130.1015.150	BROCA Ø1,5 X 150 MM	
TI132.0020.100	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 100 MM	
TI132.0020.110	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 110 MM	
TI132.0020.120	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 120 MM	
TI132.0020.130	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 130 MM	
TI132.0020.140	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 140 MM	
TI132.0020.150	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 150 MM	
TI132.0020.160	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 160 MM	
TI132.0020.170	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 170 MM	
TI132.0020.180	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 180 MM	
TI132.0020.190	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 190 MM	
TI132.0020.200	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 200 MM	
TI132.0020.210	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 210 MM	
TI132.0020.220	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 220 MM	
TI132.0020.230	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 230 MM	
TI132.0020.240	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 240 MM	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport




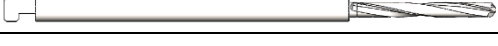

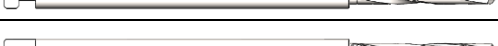
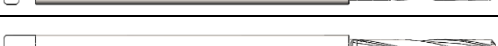
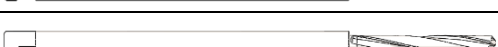




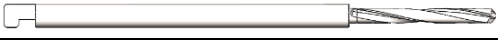
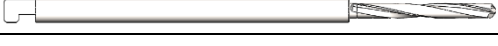



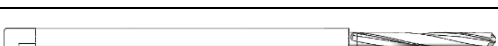







TI132.0020.250	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 250 MM	
TI132.0020.260	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 260 MM	
TI132.0020.270	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 270 MM	
TI132.0020.280	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 280 MM	
TI132.0020.290	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 290 MM	
TI132.0020.300	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 300 MM	
TI133.2009.005	BROCA Ø0,9 COM STOP 5MM CA	
TI133.2012.005	BROCA Ø1,2 COM STOP 5MM CA	
TI133.2015.005	BROCA Ø1,5 COM STOP 5MM CA	
TI133.2009.007	BROCA Ø0,9 COM STOP 7MM CA	
TI133.2012.007	BROCA Ø1,2 COM STOP 7MM CA	
TI133.2015.007	BROCA Ø1,5 COM STOP 7MM CA	
TI144.1200.001	CHAVE CROSS-DRIVE S1,2 - CA	
TI144.1520.001	CHAVE CROSS-DRIVE S1,5/2,0 - CA	
TI132.0042.200	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 200 MM	
TI132.0042.210	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 210 MM	

Instrução de Uso





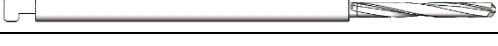


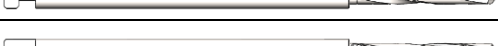
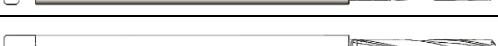
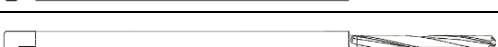





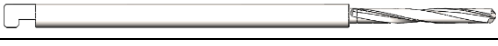
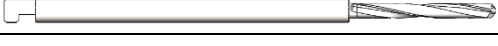

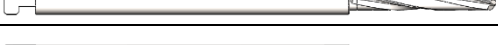



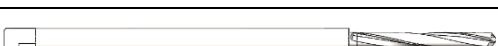










Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI132.0042.220	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 220 MM	
TI132.0042.230	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 230 MM	
TI132.0042.240	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 240 MM	
TI132.0042.250	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 250 MM	
TI132.0032.130	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 130 MM	
TI132.0032.140	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 140 MM	
TI132.0032.150	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 150 MM	
TI132.0032.160	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 160 MM	
TI132.0032.170	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 170 MM	
TI132.0032.180	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 180 MM	
TI132.0032.190	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 190 MM	
TI132.0032.200	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 200 MM	
TI380.0060.000	Fresa Canulada Ø6,0 mm	
TI380.0070.000	Fresa Canulada Ø7,0 mm	
TI380.0080.000	Fresa Canulada Ø8,0 mm	
TI380.0090.000	Fresa Canulada Ø9,0 mm	
TI380.0100.000	Fresa Canulada Ø10,0 mm	
TI380.0110.000	Fresa Canulada Ø11,0 mm	
TI380.1060.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø6,0 mm	
TI380.1070.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø7,0 mm	
TI380.1080.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø8,0 mm	
TI380.1090.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø9,0 mm	
TI380.1100.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø10,0 mm	
TI380.1110.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø11,0 mm	
TI380.2045.000	Fresa Endoscópica Canulada Ø4,5 mm	
TI137.0024.000	Broca de Passagem de Enxerto Ø2,4 mm	
TI133.0009.100	Broca Ø0,9 X 100MM ES	
TI133.0009.110	Broca Ø0,9 X 110MM ES	
TI133.0009.130	Broca Ø0,9 X 130mm ES	
TI133.0009.140	Broca Ø0,9 X 140mm ES	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport





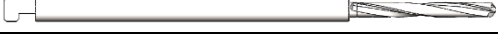


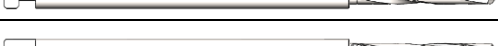
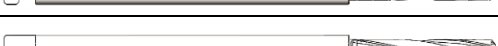
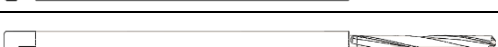





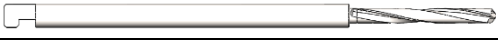
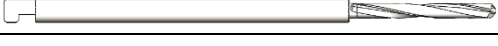

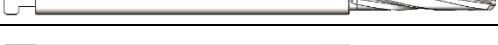



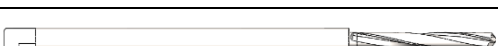











TI133.0009.150	Broca Ø0,9 X 150mm ES	
TI133.0011.060	Broca Ø1,1 X 60mm ES	
TI133.0011.080	Broca Ø1,1 X 80mm ES	
TI133.0011.100	Broca Ø1,1 X 100mm ES	
TI133.0011.110	Broca Ø1,1 X 110mm ES	
TI133.0011.130	Broca Ø1,1 X 130mm ES	
TI133.0011.140	Broca Ø1,1 X 140mm ES	
TI133.0011.150	Broca Ø1,1 X 150mm ES	
TI133.0012.060	Broca Ø1,2 X 60mm ES	
TI133.0012.080	Broca Ø1,2 X 80mm ES	
TI133.0012.100	Broca Ø1,2 X 100mm ES	
TI133.0012.110	Broca Ø1,2 X 110mm ES	
TI133.0012.130	Broca Ø1,2 X 130mm ES	
TI133.0012.140	Broca Ø1,2 X 140mm ES	
TI133.0012.150	Broca Ø1,2 X 150mm ES	
TI133.0014.050	Broca Ø1,4 X 50mm ES	
TI133.0014.060	Broca Ø1,4 X 60mm ES	
TI133.0014.080	Broca Ø1,4 X 80mm ES	
TI133.0014.100	Broca Ø1,4 X 100mm ES	
TI133.0014.110	Broca Ø1,4 X 110mm ES	
TI133.0014.130	Broca Ø1,4 X 130mm ES	
TI133.0014.140	Broca Ø1,4 X 140mm ES	
TI133.0015.050	Broca Ø1,5 X 50mm ES	
TI133.0015.060	Broca Ø1,5 X 60mm ES	
TI133.0015.080	Broca Ø1,5 X 80mm ES	
TI133.0015.100	Broca Ø1,5 X 100mm ES	
TI133.0015.110	Broca Ø1,5 X 110mm ES	
TI133.0015.130	Broca Ø1,5 X 130mm ES	
TI133.0015.140	Broca Ø1,5 X 140mm ES	
TI133.0018.050	Broca Ø1,8 X 50mm ES	
TI133.0018.060	Broca Ø1,8 X 60mm ES	
TI133.0018.080	Broca Ø1,8 X 80mm ES	
TI133.0018.100	Broca Ø1,8 X 100mm ES	
TI133.0018.110	Broca Ø1,8 X 110mm ES	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.0018.130	Broca Ø1,8 X 130mm ES	
TI133.0018.140	Broca Ø1,8 X 140mm ES	
TI133.0020.050	Broca Ø2,0 X 50mm ES	
TI133.0020.060	Broca Ø2,0 X 60mm ES	
TI133.0020.080	Broca Ø2,0 X 80mm ES	
TI133.0020.110	Broca Ø2,0 X 110mm ES	
TI133.0020.130	Broca Ø2,0 X 130mm ES	
TI133.0020.140	Broca Ø2,0 X 140mm ES	
TI133.1008.008	Broca Ø0,8 Com Stop 8mm ES	
TI133.1008.009	Broca Ø0,8 Com Stop 9mm ES	
TI133.1008.010	Broca Ø0,8 Com Stop 10mm ES	
TI133.1008.011	Broca Ø0,8 Com Stop 11mm ES	
TI133.1008.012	Broca Ø0,8 Com Stop 12mm ES	
TI133.1008.013	Broca Ø0,8 Com Stop 13mm ES	
TI133.1008.014	Broca Ø0,8 Com Stop 14mm ES	
TI133.1008.015	Broca Ø0,8 Com Stop 15mm ES	
TI133.1009.008	Broca Ø0,9 Com Stop 8mm ES	
TI133.1009.009	Broca Ø0,9 Com Stop 9mm ES	
TI133.1009.011	Broca Ø0,9 Com Stop 11mm ES	
TI133.1009.012	Broca Ø0,9 Com Stop 12mm ES	
TI133.1009.013	Broca Ø0,9 Com Stop 13mm ES	
TI133.1009.014	Broca Ø0,9 Com Stop 14mm ES	
TI133.1009.015	Broca Ø0,9 Com Stop 15mm ES	
TI133.1011.007	Broca Ø1,1 Com Stop 7mm ES	
TI133.1011.009	Broca Ø1,1 Com Stop 9mm ES	
TI133.1011.011	Broca Ø1,1 Com Stop 11mm ES	
TI133.1011.012	Broca Ø1,1 Com Stop 12mm ES	
TI133.1011.013	Broca Ø1,1 Com Stop 13mm ES	
TI133.1011.014	Broca Ø1,1 Com Stop 14mm ES	
TI133.1012.007	Broca Ø1,2 Com Stop 7mm ES	
TI133.1012.009	Broca Ø1,2 Com Stop 9mm ES	
TI133.1012.011	Broca Ø1,2 Com Stop 11mm ES	
TI133.1012.012	Broca Ø1,2 Com Stop 12mm ES	
TI133.1012.013	Broca Ø1,2 Com Stop 13mm ES	









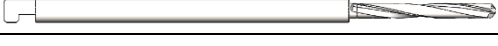


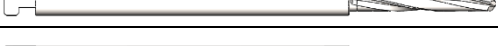







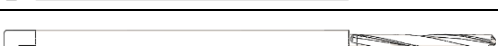
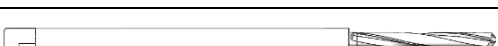









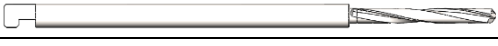


Instrução de Uso









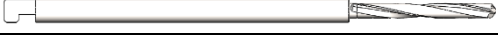


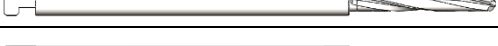







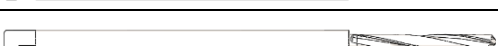
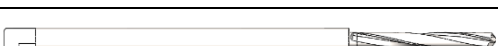










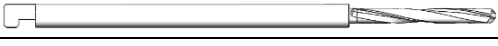


Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.1012.014	Broca Ø1,2 Com Stop 14mm ES	
TI133.1014.005	Broca Ø1,4 Com Stop 05mm ES	
TI133.1014.007	Broca Ø1,4 Com Stop 07mm ES	
TI133.1014.009	Broca Ø1,4 Com Stop 09mm ES	
TI133.1014.011	Broca Ø1,4 Com Stop 11mm ES	
TI133.1014.013	Broca Ø1,4 Com Stop 13mm ES	
TI133.1014.014	Broca Ø1,4 Com Stop 14mm ES	
TI133.1014.016	Broca Ø1,4 Com Stop 16mm ES	
TI133.1014.017	Broca Ø1,4 Com Stop 17mm ES	
TI133.1014.018	Broca Ø1,4 Com Stop 18mm ES	
TI133.1014.019	Broca Ø1,4 Com Stop 19mm ES	
TI133.1015.004	Broca Ø1,5 Com Stop 04mm ES	
TI133.1015.006	Broca Ø1,5 Com Stop 06mm ES	
TI133.1015.007	Broca Ø1,5 Com Stop 07mm ES	
TI133.1015.008	Broca Ø1,5 Com Stop 08mm ES	
TI133.1015.009	Broca Ø1,5 Com Stop 09mm ES	
TI133.1015.011	Broca Ø1,5 Com Stop 11mm ES	
TI133.1015.012	Broca Ø1,5 Com Stop 12mm ES	
TI133.1015.013	Broca Ø1,5 Com Stop 13mm ES	
TI133.1015.014	Broca Ø1,5 Com Stop 14mm ES	
TI133.1015.016	Broca Ø1,5 Com Stop 16mm ES	
TI133.1015.017	Broca Ø1,5 Com Stop 17mm ES	
TI133.1015.018	Broca Ø1,5 Com Stop 18mm ES	
TI133.1015.019	Broca Ø1,5 Com Stop 19mm ES	
TI133.1018.004	Broca Ø1,8 Com Stop 04mm ES	
TI133.1018.005	Broca Ø1,8 Com Stop 05mm ES	
TI133.1018.006	Broca Ø1,8 Com Stop 06mm ES	
TI133.1018.007	Broca Ø1,8 Com Stop 07mm ES	
TI133.1018.008	Broca Ø1,8 Com Stop 08mm ES	
TI133.1018.009	Broca Ø1,8 Com Stop 09mm ES	
TI133.1018.011	Broca Ø1,8 Com Stop 11mm ES	
TI133.1018.012	Broca Ø1,8 Com Stop 12mm ES	
TI133.1018.013	Broca Ø1,8 Com Stop 13mm ES	
TI133.1018.014	Broca Ø1,8 Com Stop 14mm ES	

Instrução de Uso





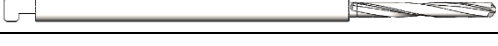


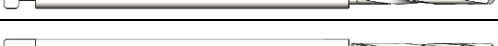
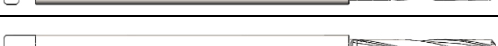
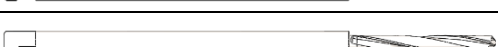





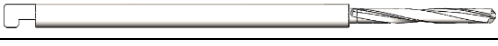
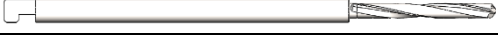

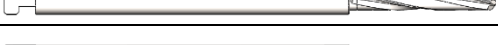



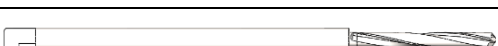











Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.1018.016	Broca Ø1,8 Com Stop 16mm ES	
TI133.1018.017	Broca Ø1,8 Com Stop 17mm ES	
TI133.1018.018	Broca Ø1,8 Com Stop 18mm ES	
TI133.1018.019	Broca Ø1,8 Com Stop 19mm ES	
TI133.1018.021	Broca Ø1,8 Com Stop 21mm ES	
TI133.1018.022	Broca Ø1,8 Com Stop 22mm ES	
TI133.1018.023	Broca Ø1,8 Com Stop 23mm ES	
TI133.1018.024	Broca Ø1,8 Com Stop 24mm ES	
TI133.1020.004	Broca Ø2,0 Com Stop 04mm ES	
TI133.1020.005	Broca Ø2,0 Com Stop 05mm ES	
TI133.1020.006	Broca Ø2,0 Com Stop 06mm ES	
TI133.1020.007	Broca Ø2,0 Com Stop 07mm ES	
TI133.1020.008	Broca Ø2,0 Com Stop 08mm ES	
TI133.1020.009	Broca Ø2,0 Com Stop 09mm ES	
TI133.1020.011	Broca Ø2,0 Com Stop 11mm ES	
TI133.1020.012	Broca Ø2,0 Com Stop 12mm ES	
TI133.1020.013	Broca Ø2,0 Com Stop 13mm ES	
TI133.1020.014	Broca Ø2,0 Com Stop 14mm ES	
TI133.1020.016	Broca Ø2,0 Com Stop 16mm ES	
TI133.1020.017	Broca Ø2,0 Com Stop 17mm ES	
TI133.1020.018	Broca Ø2,0 Com Stop 18mm ES	
TI133.1020.019	Broca Ø2,0 Com Stop 19mm ES	
TI133.1020.021	Broca Ø2,0 Com Stop 21mm ES	
TI133.1020.022	Broca Ø2,0 Com Stop 22mm ES	
TI133.1020.023	Broca Ø2,0 Com Stop 23mm ES	
TI133.1020.024	Broca Ø2,0 Com Stop 24mm ES	
TI133.1109.050	Broca Ø0,9 X 50mm ES Com Stop	
TI133.1109.060	Broca Ø0,9 X 60mm ES Com Stop	
TI133.1109.070	Broca Ø0,9 X 70mm ES Com Stop	
TI133.1109.080	Broca Ø0,9 X 80mm ES Com Stop	
TI133.1109.090	Broca Ø0,9 X 90mm ES Com Stop	
TI133.1109.100	Broca Ø0,9 X 100mm ES Com Stop	
TI133.1109.110	Broca Ø0,9 X 110mm ES Com Stop	
TI133.1109.120	Broca Ø0,9 X 120mm ES Com Stop	

TI133.1109.130	Broca Ø0,9 X 130mm ES Com Stop	
TI133.1109.140	Broca Ø0,9 X 140mm ES Com Stop	
TI133.1109.150	Broca Ø0,9 X 150mm ES Com Stop	
TI133.1111.050	Broca Ø1,1 X 50mm ES Com Stop	
TI133.1111.060	Broca Ø1,1 X 60mm ES Com Stop	
TI133.1111.070	Broca Ø1,1 X 70mm ES Com Stop	
TI133.1111.080	Broca Ø1,1 X 80mm ES Com Stop	
TI133.1111.090	Broca Ø1,1 X 90mm ES Com Stop	
TI133.1111.100	Broca Ø1,1 X 100mm ES Com Stop	
TI133.1111.110	Broca Ø1,1 X 110mm ES Com Stop	
TI133.1111.120	Broca Ø1,1 X 120mm ES C Com Stop	
TI133.1111.130	Broca Ø1,1 X 130mm ES Com Stop	
TI133.1111.140	Broca Ø1,1 X 140mm ES Com Stop	
TI133.1111.150	Broca Ø1,1 X 150mm ES Com Stop	
TI133.1112.050	Broca Ø1,2 X 50mm ES Com Stop	
TI133.1112.060	Broca Ø1,2 X 60mm ES Com Stop	
TI133.1112.070	Broca Ø1,2 X 70mm ES Com Stop	
TI133.1112.080	Broca Ø1,2 X 80mm ES Com Stop	
TI133.1112.090	Broca Ø1,2 X 90mm ES Com Stop	
TI133.1112.100	Broca Ø1,2 X 100mm ES Com Stop	
TI133.1112.110	Broca Ø1,2 X 110mm ES Com Stop	
TI133.1112.120	Broca Ø1,2 X 120mm ES Com Stop	
TI133.1112.130	Broca Ø1,2 X 130mm ES Com Stop	
TI133.1112.140	Broca Ø1,2 X 140mm ES Com Stop	
TI133.1112.150	Broca Ø1,2 X 150mm ES Com Stop	
TI133.1114.050	Broca Ø1,4 X 50mm ES Com Stop	
TI133.1114.060	Broca Ø1,4 X 60mm ES Com Stop	
TI133.1114.070	Broca Ø1,4 X 70mm ES Com Stop	
TI133.1114.080	Broca Ø1,4 X 80mm ES Com Stop	
TI133.1114.090	Broca Ø1,4 X 90mm ES Com Stop	
TI133.1114.100	Broca Ø1,4 X 100mm ES Com Stop	
TI133.1114.110	Broca Ø1,4 X 110mm ES Com Stop	
TI133.1114.120	Broca Ø1,4 X 120mm ES Com Stop	
TI133.1114.130	Broca Ø1,4 X 130mm ES Com Stop	

Instrução de Uso







Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI133.1114.140	Broca Ø1,4 X 140mm ES Com Stop	
TI133.1114.150	Broca Ø1,4 X 150mm ES Com Stop	
TI133.1115.050	Broca Ø1,5 X 50mm ES Com Stop	
TI133.1115.060	Broca Ø1,5 X 60mm ES Com Stop	
TI133.1115.070	Broca Ø1,5 X 70mm ES Com Stop	
TI133.1115.080	Broca Ø1,5 X 80mm ES Com Stop	
TI133.1115.090	Broca Ø1,5 X 90mm ES Com Stop	
TI133.1115.100	Broca Ø1,5 X 100mm ES Com Stop	
TI133.1115.110	Broca Ø1,5 X 110mm ES Com Stop	
TI133.1115.120	Broca Ø1,5 X 120mm ES Com Stop	
TI133.1115.130	Broca Ø1,5 X 130mm ES Com Stop	
TI133.1115.140	Broca Ø1,5 X 140mm ES Com Stop	
TI133.1115.150	Broca Ø1,5 X 150mm ES Com Stop	
TI133.1118.050	Broca Ø1,8 X 50mm ES Com Stop	
TI133.1118.060	Broca Ø1,8 X 60mm ES Com Stop	
TI133.1118.070	Broca Ø1,8 X 70mm ES Com Stop	
TI133.1118.080	Broca Ø1,8 X 80mm ES Com Stop	
TI133.1118.090	Broca Ø1,8 X 90mm ES Com Stop	
TI133.1118.100	Broca Ø1,8 X 100mm ES Com Stop	
TI133.1118.110	Broca Ø1,8 X 110mm ES Com Stop	
TI133.1118.120	Broca Ø1,8 X 120mm ES Com Stop	
TI133.1118.130	Broca Ø1,8 X 130mm ES Com Stop	
TI133.1118.140	Broca Ø1,8 X 140mm ES Com Stop	
TI133.1118.150	Broca Ø1,8 X 150mm ES Com Stop	
TI133.1120.050	Broca Ø2,0 X 50mm ES Com Stop	
TI133.1120.060	Broca Ø2,0 X 60mm ES Com Stop	
TI133.1120.070	Broca Ø2,0 X 70mm ES Com Stop	
TI133.1120.080	Broca Ø2,0 X 80mm ES Com Stop	
TI133.1120.090	Broca Ø2,0 X 90mm ES Com Stop	
TI133.1120.100	Broca Ø2,0 X 100mm ES Com Stop	
TI133.1120.110	Broca Ø2,0 X 110mm ES Com Stop	
TI133.1120.120	Broca Ø2,0 X 120mm ES Com Stop	
TI133.1120.130	Broca Ø2,0 X 130mm ES Com Stop	
TI133.1120.140	Broca Ø2,0 X 140mm ES Com Stop	










TI133.1120.150	Broca Ø2,0 X 150mm ES Com Stop	
----------------	-----------------------------------	--

COMPOSIÇÃO









O materiais seleccionados para composição se encontram listados abaixo:

Código	Descrição	Matéria Prima	Imagem Ilustrativa
TI130.0010.070	Broca Ø1,0 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0010.090	Broca Ø1,0 x 090 mm		
TI130.0010.110	Broca Ø1,0 x 110 mm		
TI130.0010.130	Broca Ø1,0 x 130 mm		
TI130.0010.150	Broca Ø1,0 x 150 mm		
TI130.0011.070	Broca Ø1,1 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0011.090	Broca Ø1,1 x 090 mm		
TI130.0011.110	Broca Ø1,1 x 110 mm		
TI130.0011.130	Broca Ø1,1 x 130 mm		
TI130.0011.150	Broca Ø1,1 x 150 mm		
TI130.0012.070	Broca Ø1,2 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0012.090	Broca Ø1,2 x 090 mm		
TI130.0012.110	Broca Ø1,2 x 110 mm		
TI130.0012.130	Broca Ø1,2 x 130 mm		
TI130.0012.150	Broca Ø1,2 x 150 mm		
TI130.0013.070	Broca Ø1,3 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0013.090	Broca Ø1,3 x 090 mm		
TI130.0013.110	Broca Ø1,3 x 110 mm		
TI130.0013.130	Broca Ø1,3 x 130 mm		
TI130.0013.150	Broca Ø1,3 x 150 mm		
TI130.0014.070	Broca Ø1,4 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0014.090	Broca Ø1,4 x 090 mm		
TI130.0014.110	Broca Ø1,4 x 110 mm		
TI130.0014.130	Broca Ø1,4 x 130 mm		
TI130.0014.150	Broca Ø1,4 x 150 mm		
TI130.0015.070	Broca Ø1,5 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0015.090	Broca Ø1,5 x 090 mm		
TI130.0015.110	Broca Ø1,5 x 110 mm		
TI130.0015.130	Broca Ø1,5 x 130 mm		
TI130.0015.150	Broca Ø1,5 x 150 mm		
TI130.0016.070	Broca Ø1,6 x 070 mm	Aço inoxidável	









Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

Tl130.0016.090	Broca Ø1,6 x 090 mm	Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0016.110	Broca Ø1,6 x 110 mm		
Tl130.0016.130	Broca Ø1,6 x 130 mm		
Tl130.0016.150	Broca Ø1,6 x 150 mm		
Tl130.0017.070	Broca Ø1,7 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0017.090	Broca Ø1,7 x 090 mm		
Tl130.0017.110	Broca Ø1,7 x 110 mm		
Tl130.0017.130	Broca Ø1,7 x 130 mm		
Tl130.0017.150	Broca Ø1,7 x 150 mm		
Tl130.0018.070	Broca Ø1,8 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0018.090	Broca Ø1,8 x 090 mm		
Tl130.0018.110	Broca Ø1,8 x 110 mm		
Tl130.0018.130	Broca Ø1,8 x 130 mm		
Tl130.0018.150	Broca Ø1,8 x 150 mm		
Tl130.0019.070	Broca Ø1,9 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0019.090	Broca Ø1,9 x 090 mm		
Tl130.0019.110	Broca Ø1,9 x 110 mm		
Tl130.0019.130	Broca Ø1,9 x 130 mm		
Tl130.0019.150	Broca Ø1,9 x 150 mm		
Tl130.0020.070	Broca Ø2,0 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0020.090	Broca Ø2,0 x 090 mm		
Tl130.0020.110	Broca Ø2,0 x 110 mm		
Tl130.0020.130	Broca Ø2,0 x 130 mm		
Tl130.0020.150	Broca Ø2,0 x 150 mm		
Tl130.0021.070	Broca Ø2,1 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0021.090	Broca Ø2,1 x 090 mm		
Tl130.0021.110	Broca Ø2,1 x 110 mm		
Tl130.0021.130	Broca Ø2,1 x 130 mm		
Tl130.0021.150	Broca Ø2,1 x 150 mm		
Tl130.0022.070	Broca Ø2,2 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0022.090	Broca Ø2,2 x 090 mm		
Tl130.0022.110	Broca Ø2,2 x 110 mm		
Tl130.0022.130	Broca Ø2,2 x 130 mm		
Tl130.0022.150	Broca Ø2,2 x 150 mm		
Tl130.0023.070	Broca Ø2,3 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0023.090	Broca Ø2,3 x 090 mm		
Tl130.0023.110	Broca Ø2,3 x 110 mm		
Tl130.0023.130	Broca Ø2,3 x 130 mm		
Tl130.0023.150	Broca Ø2,3 x 150 mm		
Tl130.0024.070	Broca Ø2,4 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0024.090	Broca Ø2,4 x 090 mm		
Tl130.0024.110	Broca Ø2,4 x 110 mm		
Tl130.0024.130	Broca Ø2,4 x 130 mm		
Tl130.0024.150	Broca Ø2,4 x 150 mm		
Tl130.0025.070	Broca Ø2,5 x 070 mm	Aço inoxidável	




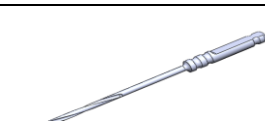
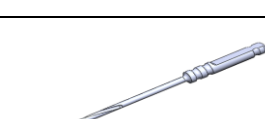






Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

Tl130.0025.090	Broca Ø2,5 x 090 mm	Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0025.110	Broca Ø2,5 x 110 mm		
Tl130.0025.130	Broca Ø2,5 x 130 mm		
Tl130.0025.150	Broca Ø2,5 x 150 mm		
Tl130.0026.070	Broca Ø2,6 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0026.090	Broca Ø2,6 x 090 mm		
Tl130.0026.110	Broca Ø2,6 x 110 mm		
Tl130.0026.130	Broca Ø2,6 x 130 mm		
Tl130.0026.150	Broca Ø2,6 x 150 mm		
Tl130.0027.070	Broca Ø2,7 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0027.090	Broca Ø2,7 x 090 mm		
Tl130.0027.110	Broca Ø2,7 x 110 mm		
Tl130.0027.130	Broca Ø2,7 x 130 mm		
Tl130.0027.150	Broca Ø2,7 x 150 mm		
Tl130.0028.070	Broca Ø2,8 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0028.090	Broca Ø2,8 x 090 mm		
Tl130.0028.110	Broca Ø2,8 x 110 mm		
Tl130.0028.130	Broca Ø2,8 x 130 mm		
Tl130.0028.150	Broca Ø2,8 x 150 mm		
Tl130.0029.070	Broca Ø2,9 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0029.090	Broca Ø2,9 x 090 mm		
Tl130.0029.110	Broca Ø2,9 x 110 mm		
Tl130.0029.130	Broca Ø2,9 x 130 mm		
Tl130.0029.150	Broca Ø2,9 x 150 mm		
Tl130.0030.080	Broca Ø3,0 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0030.100	Broca Ø3,0 x 100 mm		
Tl130.0030.130	Broca Ø3,0 x 130 mm		
Tl130.0030.160	Broca Ø3,0 x 160 mm		
Tl130.0030.180	Broca Ø3,0 x 180 mm		
Tl130.0030.200	Broca Ø3,0 x 200 mm		
Tl130.0031.080	Broca Ø3,1 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0031.100	Broca Ø3,1 x 100 mm		
Tl130.0031.130	Broca Ø3,1 x 130 mm		
Tl130.0031.160	Broca Ø3,1 x 160 mm		
Tl130.0031.180	Broca Ø3,1 x 180 mm		
Tl130.0031.200	Broca Ø3,1 x 200 mm		
Tl130.0032.080	Broca Ø3,2 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0032.100	Broca Ø3,2 x 100 mm		
Tl130.0032.130	Broca Ø3,2 x 130 mm		
Tl130.0032.160	Broca Ø3,2 x 160 mm		
Tl130.0032.180	Broca Ø3,2 x 180 mm		
Tl130.0032.200	Broca Ø3,2 x 200 mm		
Tl130.0033.080	Broca Ø3,3 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0033.100	Broca Ø3,3 x 100 mm		
Tl130.0033.130	Broca Ø3,3 x 130 mm		










Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0033.160	Broca Ø3,3 x 160 mm		
TI130.0033.180	Broca Ø3,3 x 180 mm		
TI130.0033.200	Broca Ø3,3 x 200 mm		
TI130.0034.080	Broca Ø3,4 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0034.100	Broca Ø3,4 x 100 mm		
TI130.0034.130	Broca Ø3,4 x 130 mm		
TI130.0034.160	Broca Ø3,4 x 160 mm		
TI130.0034.180	Broca Ø3,4 x 180 mm		
TI130.0034.200	Broca Ø3,4 x 200 mm		
TI130.0035.080	Broca Ø3,5 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0035.100	Broca Ø3,5 x 100 mm		
TI130.0035.130	Broca Ø3,5 x 130 mm		
TI130.0035.160	Broca Ø3,5 x 160 mm		
TI130.0035.180	Broca Ø3,5 x 180 mm		
TI130.0035.200	Broca Ø3,5 x 200 mm		
TI130.0036.080	Broca Ø3,6 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0036.100	Broca Ø3,6 x 100 mm		
TI130.0036.130	Broca Ø3,6 x 130 mm		
TI130.0036.160	Broca Ø3,6 x 160 mm		
TI130.0036.180	Broca Ø3,6 x 180 mm		
TI130.0036.200	Broca Ø3,6 x 200 mm		
TI130.0037.080	Broca Ø3,7 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0037.100	Broca Ø3,7 x 100 mm		
TI130.0037.130	Broca Ø3,7 x 130 mm		
TI130.0037.160	Broca Ø3,7 x 160 mm		
TI130.0037.180	Broca Ø3,7 x 180 mm		
TI130.0037.200	Broca Ø3,7 x 200 mm		
TI130.0038.080	Broca Ø3,8 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0038.100	Broca Ø3,8 x 100 mm		
TI130.0038.130	Broca Ø3,8 x 130 mm		
TI130.0038.160	Broca Ø3,8 x 160 mm		
TI130.0038.180	Broca Ø3,8 x 180 mm		
TI130.0038.200	Broca Ø3,8 x 200 mm		
TI130.0039.080	Broca Ø3,9 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0039.100	Broca Ø3,9 x 100 mm		
TI130.0039.130	Broca Ø3,9 x 130 mm		
TI130.0039.160	Broca Ø3,9 x 160 mm		
TI130.0039.180	Broca Ø3,9 x 180 mm		
TI130.0039.200	Broca Ø3,9 x 200 mm		
TI130.0040.100	Broca Ø4,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0040.130	Broca Ø4,0 x 130 mm		
TI130.0040.160	Broca Ø4,0 x 160 mm		
TI130.0040.200	Broca Ø4,0 x 200 mm		
TI130.0041.100	Broca Ø4,1 x 100 mm	Aço inoxidável	







Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0041.130	Broca Ø4,1 x 130 mm	Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0041.160	Broca Ø4,1 x 160 mm		
TI130.0041.200	Broca Ø4,1 x 200 mm		
TI130.0042.100	Broca Ø4,2 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0042.130	Broca Ø4,2 x 130 mm		
TI130.0042.160	Broca Ø4,2 x 160 mm		
TI130.0042.200	Broca Ø4,2 x 200 mm		
TI130.0043.100	Broca Ø4,3 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0043.130	Broca Ø4,3 x 130 mm		
TI130.0043.160	Broca Ø4,3 x 160 mm		
TI130.0043.200	Broca Ø4,3 x 200 mm		
TI130.0044.100	Broca Ø4,4 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0044.130	Broca Ø4,4 x 130 mm		
TI130.0044.160	Broca Ø4,4 x 160 mm		
TI130.0044.200	Broca Ø4,4 x 200 mm		
TI130.0045.100	Broca Ø4,5 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0045.130	Broca Ø4,5 x 130 mm		
TI130.0045.160	Broca Ø4,5 x 160 mm		
TI130.0045.200	Broca Ø4,5 x 200 mm		
TI130.0046.100	Broca Ø4,6 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0046.130	Broca Ø4,6 x 130 mm		
TI130.0046.160	Broca Ø4,6 x 160 mm		
TI130.0046.200	Broca Ø4,6 x 200 mm		
TI130.0047.100	Broca Ø4,7 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0047.130	Broca Ø4,7 x 130 mm		
TI130.0047.160	Broca Ø4,7 x 160 mm		
TI130.0047.200	Broca Ø4,7 x 200 mm		
TI130.0048.100	Broca Ø4,8 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0048.130	Broca Ø4,8 x 130 mm		
TI130.0048.160	Broca Ø4,8 x 160 mm		
TI130.0048.200	Broca Ø4,8 x 200 mm		
TI130.0049.100	Broca Ø4,9 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0049.130	Broca Ø4,9 x 130 mm		
TI130.0049.160	Broca Ø4,9 x 160 mm		
TI130.0049.200	Broca Ø4,9 x 200 mm		
TI130.0050.100	Broca Ø5,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0050.130	Broca Ø5,0 x 130 mm		
TI130.0050.160	Broca Ø5,0 x 160 mm		
TI130.0050.200	Broca Ø5,0 x 200 mm		
TI130.0055.100	Broca Ø5,5 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0055.130	Broca Ø5,5 x 130 mm		
TI130.0055.160	Broca Ø5,5 x 160 mm		
TI130.0055.200	Broca Ø5,5 x 200 mm		








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

Tl130.0060.100	Broca Ø6,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0060.130	Broca Ø6,0 x 130 mm		
Tl130.0060.160	Broca Ø6,0 x 160 mm		
Tl130.0060.200	Broca Ø6,0 x 200 mm		
Tl130.0065.100	Broca Ø6,5 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0065.130	Broca Ø6,5 x 130 mm		
Tl130.0065.160	Broca Ø6,5 x 160 mm		
Tl130.0065.200	Broca Ø6,5 x 200 mm		
Tl130.0070.100	Broca Ø7,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0070.130	Broca Ø7,0 x 130 mm		
Tl130.0070.160	Broca Ø7,0 x 160 mm		
Tl130.0070.200	Broca Ø7,0 x 200 mm		
Tl130.0075.100	Broca Ø7,5 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0075.130	Broca Ø7,5 x 130 mm		
Tl130.0075.160	Broca Ø7,5 x 160 mm		
Tl130.0075.200	Broca Ø7,5 x 200 mm		
Tl130.0080.100	Broca Ø8,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl130.0080.130	Broca Ø8,0 x 130 mm		
Tl130.0080.160	Broca Ø8,0 x 160 mm		
Tl130.0080.200	Broca Ø8,0 x 200 mm		
Tl131.0010.070	Broca Canulada Ø1,0 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl131.0010.090	Broca Canulada Ø1,0 x 090 mm		
Tl131.0010.110	Broca Canulada Ø1,0 x 110 mm		
Tl131.0010.130	Broca Canulada Ø1,0 x 130 mm		
Tl131.0010.150	Broca Canulada Ø1,0 x 150 mm		
Tl131.0011.070	Broca Canulada Ø1,1 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl131.0011.090	Broca Canulada Ø1,1 x 090 mm		
Tl131.0011.110	Broca Canulada Ø1,1 x 110 mm		
Tl131.0011.130	Broca Canulada Ø1,1 x 130 mm		
Tl131.0011.150	Broca Canulada Ø1,1 x 150 mm		
Tl131.0012.070	Broca Canulada Ø1,2 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl131.0012.090	Broca Canulada Ø1,2 x 090 mm		
Tl131.0012.110	Broca Canulada Ø1,2 x 110 mm		
Tl131.0012.130	Broca Canulada Ø1,2 x 130 mm		
Tl131.0012.150	Broca Canulada Ø1,2 x 150 mm		
Tl131.0013.070	Broca Canulada Ø1,3 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
Tl131.0013.090	Broca Canulada Ø1,3 x 090 mm		
Tl131.0013.110	Broca Canulada Ø1,3 x 110 mm		








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0013.130	Broca Canulada Ø1,3 x 130 mm		
TI131.0013.150	Broca Canulada Ø1,3 x 150 mm		
TI131.0014.070	Broca Canulada Ø1,4 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0014.090	Broca Canulada Ø1,4 x 090 mm		
TI131.0014.110	Broca Canulada Ø1,4 x 110 mm		
TI131.0014.130	Broca Canulada Ø1,4 x 130 mm		
TI131.0014.150	Broca Canulada Ø1,4 x 150 mm		
TI131.0015.070	Broca Canulada Ø1,5 x 070 mm		
TI131.0015.090	Broca Canulada Ø1,5 x 090 mm		
TI131.0015.110	Broca Canulada Ø1,5 x 110 mm		
TI131.0015.130	Broca Canulada Ø1,5 x 130 mm		
TI131.0015.150	Broca Canulada Ø1,5 x 150 mm		
TI131.0016.070	Broca Canulada Ø1,6 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0016.090	Broca Canulada Ø1,6 x 090 mm		
TI131.0016.110	Broca Canulada Ø1,6 x 110 mm		
TI131.0016.130	Broca Canulada Ø1,6 x 130 mm		
TI131.0016.150	Broca Canulada Ø1,6 x 150 mm		
TI131.0017.070	Broca Canulada Ø1,7 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0017.090	Broca Canulada Ø1,7 x 090 mm		
TI131.0017.110	Broca Canulada Ø1,7 x 110 mm		
TI131.0017.130	Broca Canulada Ø1,7 x 130 mm		
TI131.0017.150	Broca Canulada Ø1,7 x 150 mm		
TI131.0018.070	Broca Canulada Ø1,8 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0018.090	Broca Canulada Ø1,8 x 090 mm		
TI131.0018.110	Broca Canulada Ø1,8 x 110 mm		
TI131.0018.130	Broca Canulada Ø1,8 x 130 mm		
TI131.0018.150	Broca Canulada Ø1,8 x 150 mm		
TI131.0019.070	Broca Canulada Ø1,9 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0019.090	Broca Canulada Ø1,9 x 090 mm		
TI131.0019.110	Broca Canulada Ø1,9 x 110 mm		
TI131.0019.130	Broca Canulada Ø1,9 x 130 mm		
TI131.0019.150	Broca Canulada Ø1,9 x 150 mm		
TI131.0020.070	Broca Canulada Ø2,0 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0020.090	Broca Canulada Ø2,0 x 090 mm		
TI131.0020.110	Broca Canulada Ø2,0 x 110 mm		
TI131.0020.130	Broca Canulada Ø2,0 x 130 mm		
TI131.0020.150	Broca Canulada Ø2,0 x 150 mm		







Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0021.070	Broca Canulada Ø2,1 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0021.090	Broca Canulada Ø2,1 x 090 mm		
TI131.0021.110	Broca Canulada Ø2,1 x 110 mm		
TI131.0021.130	Broca Canulada Ø2,1 x 130 mm		
TI131.0021.150	Broca Canulada Ø2,1 x 150 mm		
TI131.0022.070	Broca Canulada Ø2,2 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0022.090	Broca Canulada Ø2,2 x 090 mm		
TI131.0022.110	Broca Canulada Ø2,2 x 110 mm		
TI131.0022.130	Broca Canulada Ø2,2 x 130 mm		
TI131.0022.150	Broca Canulada Ø2,2 x 150 mm		
TI131.0023.070	Broca Canulada Ø2,3 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0023.090	Broca Canulada Ø2,3 x 090 mm		
TI131.0023.110	Broca Canulada Ø2,3 x 110 mm		
TI131.0023.130	Broca Canulada Ø2,3 x 130 mm		
TI131.0023.150	Broca Canulada Ø2,3 x 150 mm		
TI131.0024.070	Broca Canulada Ø2,4 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0024.090	Broca Canulada Ø2,4 x 090 mm		
TI131.0024.110	Broca Canulada Ø2,4 x 110 mm		
TI131.0024.130	Broca Canulada Ø2,4 x 130 mm		
TI131.0024.150	Broca Canulada Ø2,4 x 150 mm		
TI131.0025.070	Broca Canulada Ø2,5 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0025.090	Broca Canulada Ø2,5 x 090 mm		
TI131.0025.110	Broca Canulada Ø2,5 x 110 mm		
TI131.0025.130	Broca Canulada Ø2,5 x 130 mm		
TI131.0025.150	Broca Canulada Ø2,5 x 150 mm		
TI131.0026.070	Broca Canulada Ø2,6 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0026.090	Broca Canulada Ø2,6 x 090 mm		
TI131.0026.110	Broca Canulada Ø2,6 x 110 mm		
TI131.0026.130	Broca Canulada Ø2,6 x 130 mm		
TI131.0026.150	Broca Canulada Ø2,6 x 150 mm		
TI131.0027.070	Broca Canulada Ø2,7 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0027.090	Broca Canulada Ø2,7 x 090 mm		
TI131.0027.110	Broca Canulada Ø2,7 x 110 mm		
TI131.0027.130	Broca Canulada Ø2,7 x 130 mm		
TI131.0027.150	Broca Canulada Ø2,7 x 150 mm		
TI131.0028.070	Broca Canulada Ø2,8 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0028.090	Broca Canulada Ø2,8 x 090 mm		









Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0028.110	Broca Canulada Ø2,8 x 110 mm		
TI131.0028.130	Broca Canulada Ø2,8 x 130 mm		
TI131.0028.150	Broca Canulada Ø2,8 x 150 mm		
TI131.0029.070	Broca Canulada Ø2,9 x 070 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0029.090	Broca Canulada Ø2,9 x 090 mm		
TI131.0029.110	Broca Canulada Ø2,9 x 110 mm		
TI131.0029.130	Broca Canulada Ø2,9 x 130 mm		
TI131.0029.150	Broca Canulada Ø2,9 x 150 mm		
TI131.0030.080	Broca Canulada Ø3,0 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0030.100	Broca Canulada Ø3,0 x 100 mm		
TI131.0030.130	Broca Canulada Ø3,0 x 130 mm		
TI131.0030.160	Broca Canulada Ø3,0 x 160 mm		
TI131.0030.180	Broca Canulada Ø3,0 x 180 mm		
TI131.0030.200	Broca Canulada Ø3,0 x 200 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0031.080	Broca Canulada Ø3,1 x 080 mm		
TI131.0031.100	Broca Canulada Ø3,1 x 100 mm		
TI131.0031.130	Broca Canulada Ø3,1 x 130 mm		
TI131.0031.160	Broca Canulada Ø3,1 x 160 mm		
TI131.0031.180	Broca Canulada Ø3,1 x 180 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0031.200	Broca Canulada Ø3,1 x 200 mm		
TI131.0032.080	Broca Canulada Ø3,2 x 080 mm		
TI131.0032.100	Broca Canulada Ø3,2 x 100 mm		
TI131.0032.130	Broca Canulada Ø3,2 x 130 mm		
TI131.0032.160	Broca Canulada Ø3,2 x 160 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0032.180	Broca Canulada Ø3,2 x 180 mm		
TI131.0032.200	Broca Canulada Ø3,2 x 200 mm		
TI131.0033.080	Broca Canulada Ø3,3 x 080 mm		
TI131.0033.100	Broca Canulada Ø3,3 x 100 mm		
TI131.0033.130	Broca Canulada Ø3,3 x 130 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0033.160	Broca Canulada Ø3,3 x 160 mm		
TI131.0033.180	Broca Canulada Ø3,3 x 180 mm		
TI131.0033.200	Broca Canulada Ø3,3 x 200 mm		
TI131.0034.080	Broca Canulada Ø3,4 x 080 mm		
TI131.0034.100	Broca Canulada Ø3,4 x 100 mm		
TI131.0034.130	Broca Canulada Ø3,4 x 130 mm		
TI131.0034.160	Broca Canulada Ø3,4 x 160 mm		
TI131.0034.180	Broca Canulada Ø3,4 x		









Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	180 mm		
TI131.0034.200	Broca Canulada Ø3,4 x 200 mm		
TI131.0035.080	Broca Canulada Ø3,5 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0035.100	Broca Canulada Ø3,5 x 100 mm		
TI131.0035.130	Broca Canulada Ø3,5 x 130 mm		
TI131.0035.160	Broca Canulada Ø3,5 x 160 mm		
TI131.0035.180	Broca Canulada Ø3,5 x 180 mm		
TI131.0035.200	Broca Canulada Ø3,5 x 200 mm		
TI131.0036.080	Broca Canulada Ø3,6 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0036.100	Broca Canulada Ø3,6 x 100 mm		
TI131.0036.130	Broca Canulada Ø3,6 x 130 mm		
TI131.0036.160	Broca Canulada Ø3,6 x 160 mm		
TI131.0036.180	Broca Canulada Ø3,6 x 180 mm		
TI131.0036.200	Broca Canulada Ø3,6 x 200 mm		
TI131.0037.080	Broca Canulada Ø3,7 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0037.100	Broca Canulada Ø3,7 x 100 mm		
TI131.0037.130	Broca Canulada Ø3,7 x 130 mm		
TI131.0037.160	Broca Canulada Ø3,7 x 160 mm		
TI131.0037.180	Broca Canulada Ø3,7 x 180 mm		
TI131.0037.200	Broca Canulada Ø3,7 x 200 mm		
TI131.0038.080	Broca Canulada Ø3,8 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0038.100	Broca Canulada Ø3,8 x 100 mm		
TI131.0038.130	Broca Canulada Ø3,8 x 130 mm		
TI131.0038.160	Broca Canulada Ø3,8 x 160 mm		
TI131.0038.180	Broca Canulada Ø3,8 x 180 mm		
TI131.0038.200	Broca Canulada Ø3,8 x 200 mm		
TI131.0039.080	Broca Canulada Ø3,9 x 080 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0039.100	Broca Canulada Ø3,9 x 100 mm		
TI131.0039.130	Broca Canulada Ø3,9 x 130 mm		
TI131.0039.160	Broca Canulada Ø3,9 x 160 mm		
TI131.0039.180	Broca Canulada Ø3,9 x 180 mm		
TI131.0039.200	Broca Canulada Ø3,9 x 200 mm		
TI131.0040.100	Broca Canulada Ø4,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0040.130	Broca Canulada Ø4,0 x 130 mm		
TI131.0040.160	Broca Canulada Ø4,0 x 160 mm		
TI131.0040.200	Broca Canulada Ø4,0 x 200 mm		







Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0041.100	Broca Canulada Ø4,1 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0041.130	Broca Canulada Ø4,1 x 130 mm		
TI131.0041.160	Broca Canulada Ø4,1 x 160 mm		
TI131.0041.200	Broca Canulada Ø4,1 x 200 mm		
TI131.0042.100	Broca Canulada Ø4,2 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.130	Broca Canulada Ø4,2 x 130 mm		
TI131.0042.160	Broca Canulada Ø4,2 x 160 mm		
TI131.0042.200	Broca Canulada Ø4,2 x 200 mm		
TI131.0043.100	Broca Canulada Ø4,3 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0043.130	Broca Canulada Ø4,3 x 130 mm		
TI131.0043.160	Broca Canulada Ø4,3 x 160 mm		
TI131.0043.200	Broca Canulada Ø4,3 x 200 mm		
TI131.0044.100	Broca Canulada Ø4,4 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0044.130	Broca Canulada Ø4,4 x 130 mm		
TI131.0044.160	Broca Canulada Ø4,4 x 160 mm		
TI131.0044.200	Broca Canulada Ø4,4 x 200 mm		
TI131.0045.100	Broca Canulada Ø4,5 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0045.130	Broca Canulada Ø4,5 x 130 mm		
TI131.0045.160	Broca Canulada Ø4,5 x 160 mm		
TI131.0045.200	Broca Canulada Ø4,5 x 200 mm		
TI131.0046.100	Broca Canulada Ø4,6 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0046.130	Broca Canulada Ø4,6 x 130 mm		
TI131.0046.160	Broca Canulada Ø4,6 x 160 mm		
TI131.0046.200	Broca Canulada Ø4,6 x 200 mm		
TI131.0047.100	Broca Canulada Ø4,7 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0047.130	Broca Canulada Ø4,7 x 130 mm		
TI131.0047.160	Broca Canulada Ø4,7 x 160 mm		
TI131.0047.200	Broca Canulada Ø4,7 x 200 mm		
TI131.0048.100	Broca Canulada Ø4,8 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0048.130	Broca Canulada Ø4,8 x 130 mm		
TI131.0048.160	Broca Canulada Ø4,8 x 160 mm		
TI131.0048.200	Broca Canulada Ø4,8 x 200 mm		
TI131.0049.100	Broca Canulada Ø4,9 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0049.130	Broca Canulada Ø4,9 x 130 mm		







Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0049.160	Broca Canulada Ø4,9 x 160 mm		
TI131.0049.200	Broca Canulada Ø4,9 x 200 mm		
TI131.0050.100	Broca Canulada Ø5,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0050.130	Broca Canulada Ø5,0 x 130 mm		
TI131.0050.160	Broca Canulada Ø5,0 x 160 mm		
TI131.0050.200	Broca Canulada Ø5,0 x 200 mm		
TI131.0055.100	Broca Canulada Ø5,5 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0055.130	Broca Canulada Ø5,5 x 130 mm		
TI131.0055.160	Broca Canulada Ø5,5 x 160 mm		
TI131.0055.200	Broca Canulada Ø5,5 x 200 mm		
TI131.0060.100	Broca Canulada Ø6,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0060.130	Broca Canulada Ø6,0 x 130 mm		
TI131.0060.160	Broca Canulada Ø6,0 x 160 mm		
TI131.0060.200	Broca Canulada Ø6,0 x 200 mm		
TI131.0065.100	Broca Canulada Ø6,5 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0065.130	Broca Canulada Ø6,5 x 130 mm		
TI131.0065.160	Broca Canulada Ø6,5 x 160 mm		
TI131.0065.200	Broca Canulada Ø6,5 x 200 mm		
TI131.0070.100	Broca Canulada Ø7,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0070.130	Broca Canulada Ø7,0 x 130 mm		
TI131.0070.160	Broca Canulada Ø7,0 x 160 mm		
TI131.0070.200	Broca Canulada Ø7,0 x 200 mm		
TI131.0075.100	Broca Canulada Ø7,5 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0075.130	Broca Canulada Ø7,5 x 130 mm		
TI131.0075.160	Broca Canulada Ø7,5 x 160 mm		
TI131.0075.200	Broca Canulada Ø7,5 x 200 mm		
TI131.0080.100	Broca Canulada Ø8,0 x 100 mm	Aço inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0080.130	Broca Canulada Ø8,0 x 130 mm		
TI131.0080.160	Broca Canulada Ø8,0 x 160 mm		
TI131.0080.200	Broca Canulada Ø8,0 x 200 mm		
TI133.1008.003	Broca Ø0,8 com Stop 3 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.1008.004	Broca Ø0,8 com Stop 4 mm ES		
TI133.1008.005	Broca Ø0,8 com Stop 5 mm ES		

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.1008.006	Broca Ø0,8 com Stop 6 mm ES		
TI133.1008.007	Broca Ø0,8 com Stop 7 mm ES		
TI133.1009.010	Broca Ø0,9 com Stop 10 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.1009.003	Broca Ø0,9 com Stop 3 mm ES		
TI133.1009.004	Broca Ø0,9 com Stop 4 mm ES		
TI133.1009.005	Broca Ø0,9 com Stop 5 mm ES		
TI133.1009.006	Broca Ø0,9 com Stop 6 mm ES		
TI133.1009.007	Broca Ø0,9 com Stop 7 mm ES		
TI133.0009.050	Broca Ø0,9 x 050 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.0009.060	Broca Ø0,9 x 060 mm ES		
TI133.0009.070	Broca Ø0,9 x 070 mm ES		
TI133.0009.080	Broca Ø0,9 x 080 mm ES		
TI133.0009.090	Broca Ø0,9 x 090 mm ES		
TI133.0009.120	Broca Ø0,9 x 120 mm ES		
TI133.1011.010	Broca Ø1,1 com Stop 10 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.1011.015	Broca Ø1,1 com Stop 15 mm ES		
TI133.1011.004	Broca Ø1,1 com Stop 4 mm ES		
TI133.1011.005	Broca Ø1,1 com Stop 5 mm ES		
TI133.1011.006	Broca Ø1,1 com Stop 6 mm ES		
TI133.1011.008	Broca Ø1,1 com Stop 8 mm ES		
TI133.0011.050	Broca Ø1,1 x 050 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.0011.070	Broca Ø1,1 x 070 mm ES		
TI133.0011.090	Broca Ø1,1 x 090 mm ES		
TI133.0011.120	Broca Ø1,1 x 120 mm ES		
TI133.1012.010	Broca Ø1,2 com Stop 10 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.1012.015	Broca Ø1,2 com Stop 15 mm ES		
TI133.1012.004	Broca Ø1,2 com Stop 4 mm ES		
TI133.1012.005	Broca Ø1,2 com Stop 5 mm ES		
TI133.1012.006	Broca Ø1,2 com Stop 6 mm ES		
TI133.1012.008	Broca Ø1,2 com Stop 8 mm ES		
TI133.0012.050	Broca Ø1,2 x 050 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.0012.070	Broca Ø1,2 x 070 mm ES		

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.0012.090	Broca Ø1,2 x 090 mm ES		
TI133.0012.120	Broca Ø1,2 x 120 mm ES		
TI133.1014.004	Broca Ø1,4 com Stop 04 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.1014.006	Broca Ø1,4 com Stop 06 mm ES		
TI133.1014.008	Broca Ø1,4 com Stop 08 mm ES		
TI133.1014.010	Broca Ø1,4 com Stop 10 mm ES		
TI133.1014.012	Broca Ø1,4 com Stop 12 mm ES		
TI133.1014.015	Broca Ø1,4 com Stop 15 mm ES		
TI133.1014.020	Broca Ø1,4 com Stop 20 mm ES		
TI133.0014.070	Broca Ø1,4 x 070 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.0014.090	Broca Ø1,4 x 090 mm ES		
TI133.0014.120	Broca Ø1,4 x 120 mm ES		
TI133.0014.150	Broca Ø1,4 x 150 mm ES		
TI133.1018.010	Broca Ø1,8 com Stop 10 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.1018.015	Broca Ø1,8 com Stop 15 mm ES		
TI133.1018.020	Broca Ø1,8 com Stop 20 mm ES		
TI133.1018.025	Broca Ø1,8 com Stop 25 mm ES		
TI133.0018.070	Broca Ø1,8 x 070 mm ES	Aço Inox ASTM F899 Martensítico	
TI133.0018.090	Broca Ø1,8 x 090 mm ES		
TI133.0018.120	Broca Ø1,8 x 120 mm ES		
TI133.0018.150	Broca Ø1,8 x 150 mm ES		
TI130.0025.160	Broca Ø2,5 x 160 mm	Aço Inox Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0025.170	Broca Ø2,5 x 170 mm		
TI130.0025.180	Broca Ø2,5 x 180 mm		
TI130.0025.190	Broca Ø2,5 x 190 mm		
TI130.0025.200	Broca Ø2,5 x 200 mm		
TI130.0025.210	Broca Ø2,5 x 210 mm		
TI130.0025.220	Broca Ø2,5 x 220 mm		
TI130.0025.230	Broca Ø2,5 x 230 mm		
TI130.0025.240	Broca Ø2,5 x 240 mm		
TI130.0025.250	Broca Ø2,5 x 250 mm		
TI130.0025.260	Broca Ø2,5 x 260 mm		



Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

Tl130.0025.270	Broca Ø2,5 x 270 mm		
Tl130.0025.280	Broca Ø2,5 x 280 mm		
Tl130.0025.290	Broca Ø2,5 x 290 mm		
Tl130.0025.300	Broca Ø2,5 x 300 mm		
Tl130.0025.310	Broca Ø2,5 x 310 mm		
Tl130.0025.320	Broca Ø2,5 x 320 mm		
Tl130.0025.330	Broca Ø2,5 x 330 mm		
Tl130.0025.340	Broca Ø2,5 x 340 mm		
Tl130.0025.350	Broca Ø2,5 x 350 mm		
Tl130.0025.360	Broca Ø2,5 x 360 mm		
Tl130.0025.370	Broca Ø2,5 x 370 mm		
Tl130.0025.380	Broca Ø2,5 x 380 mm		
Tl130.0025.390	Broca Ø2,5 x 390 mm		
Tl130.0025.400	Broca Ø2,5 x 400 mm		
Tl130.0040.150	Broca Ø4,0 x 150 mm		
Tl130.0040.170	Broca Ø4,0 x 170 mm		
Tl130.0040.180	Broca Ø4,0 x 180 mm		
Tl130.0040.190	Broca Ø4,0 x 190 mm		
Tl130.0040.210	Broca Ø4,0 x 210 mm		
Tl130.0040.220	Broca Ø4,0 x 220 mm		
Tl130.0040.230	Broca Ø4,0 x 230 mm		
Tl130.0040.240	Broca Ø4,0 x 240 mm		
Tl130.0040.250	Broca Ø4,0 x 250 mm		
Tl130.0040.260	Broca Ø4,0 x 260 mm		
Tl130.0040.270	Broca Ø4,0 x 270 mm		
Tl130.0040.280	Broca Ø4,0 x 280 mm		
Tl130.0040.290	Broca Ø4,0 x 290 mm		
Tl130.0040.300	Broca Ø4,0 x 300 mm		
Tl130.0040.310	Broca Ø4,0 x 310 mm		
Tl130.0040.320	Broca Ø4,0 x 320 mm		
Tl130.0040.330	Broca Ø4,0 x 330 mm		
Tl130.0040.340	Broca Ø4,0 x 340 mm		
Tl130.0040.350	Broca Ø4,0 x 350 mm		
Tl130.0040.360	Broca Ø4,0 x 360 mm		

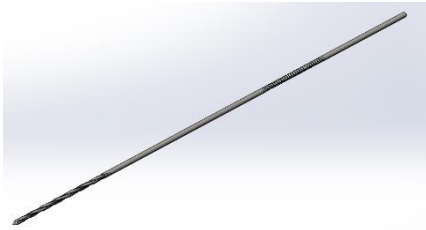
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0040.370	Broca Ø4,0 x 370 mm		
TI130.0040.380	Broca Ø4,0 x 380 mm		
TI130.0040.390	Broca Ø4,0 x 390 mm		
TI130.0040.400	Broca Ø4,0 x 400 mm		
TI130.0040.410	Broca Ø4,0 x 410 mm		
TI130.0040.420	Broca Ø4,0 x 420 mm		
TI130.0040.430	Broca Ø4,0 x 430 mm		
TI130.0040.440	Broca Ø4,0 x 440 mm		
TI130.0040.450	Broca Ø4,0 x 450 mm		
TI130.0042.150	Broca Ø4,2 x 150 mm		
TI130.0042.170	Broca Ø4,2 x 170 mm		
TI130.0042.180	Broca Ø4,2 x 180 mm		
TI130.0042.190	Broca Ø4,2 x 190 mm		
TI130.0042.210	Broca Ø4,2 x 210 mm		
TI130.0042.220	Broca Ø4,2 x 220 mm		
TI130.0042.230	Broca Ø4,2 x 230 mm		
TI130.0042.240	Broca Ø4,2 x 240 mm		
TI130.0042.250	Broca Ø4,2 x 250 mm		
TI130.0042.260	Broca Ø4,2 x 260 mm		
TI130.0042.270	Broca Ø4,2 x 270 mm		
TI130.0042.280	Broca Ø4,2 x 280 mm		
TI130.0042.290	Broca Ø4,2 x 290 mm		
TI130.0042.300	Broca Ø4,2 x 300 mm		
TI130.0042.310	Broca Ø4,2 x 310 mm		
TI130.0042.320	Broca Ø4,2 x 320 mm		
TI130.0042.330	Broca Ø4,2 x 330 mm		
TI130.0042.340	Broca Ø4,2 x 340 mm		
TI130.0042.350	Broca Ø4,2 x 350 mm		
TI130.0042.360	Broca Ø4,2 x 360 mm		
TI130.0042.370	Broca Ø4,2 x 370 mm		
TI130.0042.380	Broca Ø4,2 x 380 mm		
TI130.0042.390	Broca Ø4,2 x 390 mm		
TI130.0042.400	Broca Ø4,2 x 400 mm		
TI130.0042.410	Broca Ø4,2 x 410 mm		

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0042.420	Broca Ø4,2 x 420 mm		
TI130.0042.430	Broca Ø4,2 x 430 mm		
TI130.0042.440	Broca Ø4,2 x 440 mm		
TI130.0042.450	Broca Ø4,2 x 450 mm		
TI130.0042.460	Broca Ø4,2 x 460 mm		
TI130.0042.470	Broca Ø4,2 x 470 mm		
TI130.0042.480	Broca Ø4,2 x 480 mm		
TI130.0042.490	Broca Ø4,2 x 490 mm		
TI130.0042.500	Broca Ø4,2 x 500 mm		
TI130.9998.001	Broca Canulada Padrão Modelo 1	Aço Inox Martensítico (ASTM F899)	
TI130.9998.002	Broca Canulada Padrão Modelo 2		
TI130.9998.003	Broca Canulada Padrão Modelo 3		
TI130.9998.004	Broca Canulada Padrão Modelo 4		
TI130.9998.005	Broca Canulada Padrão Modelo 5		
TI130.9998.006	Broca Canulada Padrão Modelo 6		
TI130.9998.007	Broca Canulada Padrão Modelo 7		
TI130.9998.008	Broca Canulada Padrão Modelo 8		
TI130.9998.009	Broca Canulada Padrão Modelo 9		
TI130.9998.010	Broca Canulada Padrão Modelo 10		
TI130.9998.011	Broca Canulada Padrão Modelo 11		
TI130.9998.012	Broca Canulada Padrão Modelo 12		
TI130.9998.013	Broca Canulada Padrão Modelo 13		
TI130.9998.014	Broca Canulada Padrão Modelo 14		
TI130.9998.015	Broca Canulada Padrão Modelo 15		
TI130.9998.016	Broca Canulada Padrão Modelo 16		
TI130.9998.017	Broca Canulada Padrão Modelo 17		
TI130.9998.018	Broca Canulada Padrão Modelo 18		
TI130.9998.019	Broca Canulada Padrão Modelo 19		
TI130.9998.020	Broca Canulada Padrão Modelo 20		
TI130.9999.001	Broca Padrão Modelo 1	Aço Inox Martensítico (ASTM F899)	
TI130.9999.002	Broca Padrão Modelo 2		
TI130.9999.003	Broca Padrão Modelo 3		
TI130.9999.004	Broca Padrão Modelo 4		
TI130.9999.005	Broca Padrão Modelo 5		

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.9999.006	Broca Padrão Modelo 6				
TI130.9999.007	Broca Padrão Modelo 7				
TI130.9999.008	Broca Padrão Modelo 8				
TI130.9999.009	Broca Padrão Modelo 9				
TI130.9999.010	Broca Padrão Modelo 10				
TI130.9999.011	Broca Padrão Modelo 11				
TI130.9999.012	Broca Padrão Modelo 12				
TI130.9999.013	Broca Padrão Modelo 13				
TI130.9999.014	Broca Padrão Modelo 14				
TI130.9999.015	Broca Padrão Modelo 15				
TI130.9999.016	Broca Padrão Modelo 16				
TI130.9999.017	Broca Padrão Modelo 17				
TI130.9999.018	Broca Padrão Modelo 18				
TI130.9999.019	Broca Padrão Modelo 19				
TI130.9999.020	Broca Padrão Modelo 20				
TI132.0025.100	Broca Graduada Ø2,5 x 100 mm			Aço Inox Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0025.110	Broca Graduada Ø2,5 x 110 mm				
TI132.0025.120	Broca Graduada Ø2,5 x 120 mm				
TI132.0025.130	Broca Graduada Ø2,5 x 130 mm				
TI132.0025.140	Broca Graduada Ø2,5 x 140 mm				
TI132.0025.150	Broca Graduada Ø2,5 x 150 mm				
TI132.0025.160	Broca Graduada Ø2,5 x 160 mm				
TI132.0025.170	Broca Graduada Ø2,5 x 170 mm				
TI132.0025.180	Broca Graduada Ø2,5 x 180 mm				
TI132.0025.190	Broca Graduada Ø2,5 x 190 mm				
TI132.0025.200	Broca Graduada Ø2,5 x 200 mm				
TI132.0025.210	Broca Graduada Ø2,5 x 210 mm				
TI132.0025.220	Broca Graduada Ø2,5 x 220 mm				
TI132.0025.230	Broca Graduada Ø2,5 x 230 mm				
TI132.0025.240	Broca Graduada Ø2,5 x 240 mm				
TI132.0025.250	Broca Graduada Ø2,5 x 250 mm				
TI132.0025.260	Broca Graduada Ø2,5 x 260 mm				
TI132.0025.270	Broca Graduada Ø2,5 x 270 mm				
TI132.0025.280	Broca Graduada Ø2,5 x 280 mm				

Instrução de Uso

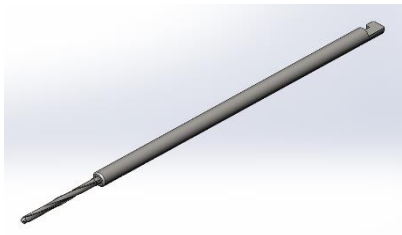

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI132.0025.290	Broca Graduada Ø2,5 x 290 mm		
TI132.0025.300	Broca Graduada Ø2,5 x 300 mm		
TI132.0025.310	Broca Graduada Ø2,5 x 310 mm		
TI132.0025.320	Broca Graduada Ø2,5 x 320 mm		
TI132.0025.330	Broca Graduada Ø2,5 x 330 mm		
TI132.0025.340	Broca Graduada Ø2,5 x 340 mm		
TI132.0025.350	Broca Graduada Ø2,5 x 350 mm		
TI132.0025.360	Broca Graduada Ø2,5 x 360 mm		
TI132.0025.370	Broca Graduada Ø2,5 x 370 mm		
TI132.0025.380	Broca Graduada Ø2,5 x 380 mm		
TI132.0025.390	Broca Graduada Ø2,5 x 390 mm		
TI132.0025.400	Broca Graduada Ø2,5 x 400 mm		
TI132.0040.150	Broca Graduada Ø4,0 x 150 mm		
TI132.0040.160	Broca Graduada Ø4,0 x 160 mm		
TI132.0040.170	Broca Graduada Ø4,0 x 170 mm		
TI132.0040.180	Broca Graduada Ø4,0 x 180 mm		
TI132.0040.190	Broca Graduada Ø4,0 x 190 mm		
TI132.0040.200	Broca Graduada Ø4,0 x 200 mm		
TI132.0040.210	Broca Graduada Ø4,0 x 210 mm		
TI132.0040.220	Broca Graduada Ø4,0 x 220 mm		
TI132.0040.230	Broca Graduada Ø4,0 x 230 mm		
TI132.0040.240	Broca Graduada Ø4,0 x 240 mm		
TI132.0040.250	Broca Graduada Ø4,0 x 250 mm		
TI132.0040.260	Broca Graduada Ø4,0 x 260 mm		
TI132.0040.270	Broca Graduada Ø4,0 x 270 mm		
TI132.0040.280	Broca Graduada Ø4,0 x 280 mm		
TI132.0040.290	Broca Graduada Ø4,0 x 290 mm		
TI132.0040.300	Broca Graduada Ø4,0 x 300 mm		
TI132.0040.310	Broca Graduada Ø4,0 x 310 mm		
TI132.0040.320	Broca Graduada Ø4,0 x 320 mm		
TI132.0040.330	Broca Graduada Ø4,0 x 330 mm		
TI132.0040.340	Broca Graduada Ø4,0 x 340 mm		
TI132.0040.350	Broca Graduada Ø4,0 x 350 mm		
TI132.0040.360	Broca Graduada Ø4,0 x 360 mm		




Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI132.0040.370	Broca Graduada Ø4,0 x 370 mm		
TI132.0040.380	Broca Graduada Ø4,0 x 380 mm		
TI132.0040.390	Broca Graduada Ø4,0 x 390 mm		
TI132.0040.400	Broca Graduada Ø4,0 x 400 mm		
TI132.0042.250	Broca Graduada Ø4,2 x 250 mm		
TI132.0042.260	Broca Graduada Ø4,2 x 260 mm		
TI132.0042.270	Broca Graduada Ø4,2 x 270 mm		
TI132.0042.280	Broca Graduada Ø4,2 x 280 mm		
TI132.0042.290	Broca Graduada Ø4,2 x 290 mm		
TI132.0042.300	Broca Graduada Ø4,2 x 300 mm		
TI132.0042.310	Broca Graduada Ø4,2 x 310 mm		
TI132.0042.320	Broca Graduada Ø4,2 x 320 mm		
TI132.0042.330	Broca Graduada Ø4,2 x 330 mm		
TI132.0042.340	Broca Graduada Ø4,2 x 340 mm		
TI132.0042.350	Broca Graduada Ø4,2 x 350 mm		
TI132.0042.360	Broca Graduada Ø4,2 x 360 mm		
TI132.0042.370	Broca Graduada Ø4,2 x 370 mm		
TI132.0042.380	Broca Graduada Ø4,2 x 380 mm		
TI132.0042.390	Broca Graduada Ø4,2 x 390 mm		
TI132.0042.400	Broca Graduada Ø4,2 x 400 mm		
TI132.0042.410	Broca Graduada Ø4,2 x 410 mm		
TI132.0042.420	Broca Graduada Ø4,2 x 420 mm		
TI132.0042.430	Broca Graduada Ø4,2 x 430 mm		
TI132.0042.440	Broca Graduada Ø4,2 x 440 mm		
TI132.0042.450	Broca Graduada Ø4,2 x 450 mm		
TI132.0042.460	Broca Graduada Ø4,2 x 460 mm		
TI132.0042.470	Broca Graduada Ø4,2 x 470 mm		
TI132.0042.480	Broca Graduada Ø4,2 x 480 mm		
TI132.0042.490	Broca Graduada Ø4,2 x 490 mm		
TI132.0042.500	Broca Graduada Ø4,2 x 500 mm		
TI132.0042.510	Broca Graduada Ø4,2 x 510 mm		
TI132.0042.520	Broca Graduada Ø4,2 x 520 mm		
TI132.0042.530	Broca Graduada Ø4,2 x 530 mm		
TI132.0042.540	Broca Graduada Ø4,2 x 540 mm		






Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI132.0042.550	Broca Graduada Ø4,2 x 550 mm		
TI133.0015.070	Broca Ø1,5 x 070 mm ES	Aço Inox Martensítico (ASTM F899)	
TI133.0015.090	Broca Ø1,5 x 090 mm ES		
TI133.0015.120	Broca Ø1,5 x 120 mm ES		
TI133.0015.150	Broca Ø1,5 x 150 mm ES		
TI133.0020.070	Broca Ø2,0 x 070 mm ES		
TI133.0020.090	Broca Ø2,0 x 090 mm ES		
TI133.0020.100	Broca Ø2,0 x 100 mm ES		
TI133.0020.120	Broca Ø2,0 x 120 mm ES		
TI133.0020.150	Broca Ø2,0 x 150 mm ES		
TI133.1015.005	Broca Ø1,5 com Stop 05 mm ES		
TI133.1015.010	Broca Ø1,5 com Stop 10 mm ES		
TI133.1015.015	Broca Ø1,5 com Stop 15 mm ES		
TI133.1015.020	Broca Ø1,5 com Stop 20 mm ES		
TI133.1020.010	Broca Ø2,0 com Stop 10 mm ES		
TI133.1020.015	Broca Ø2,0 com Stop 15 mm ES		
TI133.1020.020	Broca Ø2,0 com Stop 20 mm ES		
TI133.1020.025	Broca Ø2,0 com Stop 25 mm ES		
TI131.0067.100	Broca Canulada Ø6,7 x 100mm	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0067.110	Broca Canulada Ø6,7 x 110mm		
TI131.0067.120	Broca Canulada Ø6,7 x 120mm		
TI131.0067.130	Broca Canulada Ø6,7 x 130mm		
TI131.0067.140	Broca Canulada Ø6,7 x 140mm		
TI131.0067.150	Broca Canulada Ø6,7 x 150mm		
TI131.0067.160	Broca Canulada Ø6,7 x 160mm		
TI131.0067.170	Broca Canulada Ø6,7 x 170mm		
TI131.0067.180	Broca Canulada Ø6,7 x 180mm		
TI131.0067.190	Broca Canulada Ø6,7 x 190mm		
TI131.0067.200	Broca Canulada Ø6,7 x 200mm		
TI131.0067.210	Broca Canulada Ø6,7 x 210mm		
TI131.0067.220	Broca Canulada Ø6,7 x 220mm		
TI131.0067.230	Broca Canulada Ø6,7 x 230mm		
TI131.0067.240	Broca Canulada Ø6,7 x 240mm		
TI131.0067.250	Broca Canulada Ø6,7 x 250mm		














Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0067.260	Broca Canulada Ø6,7 x 260mm		
TI131.0067.270	Broca Canulada Ø6,7 x 270mm		
TI131.0067.280	Broca Canulada Ø6,7 x 280mm		
TI131.0067.290	Broca Canulada Ø6,7 x 290mm		
TI131.0067.300	Broca Canulada Ø6,7 x 300mm		
TI131.0067.310	Broca Canulada Ø6,7 x 310mm		
TI131.0067.320	Broca Canulada Ø6,7 x 320mm		
TI131.0067.330	Broca Canulada Ø6,7 x 330mm		
TI131.0067.340	Broca Canulada Ø6,7 x 340mm		
TI131.0067.350	Broca Canulada Ø6,7 x 350mm		
TI131.0067.360	Broca Canulada Ø6,7 x 360mm		
TI131.0067.370	Broca Canulada Ø6,7 x 370mm		
TI131.0067.380	Broca Canulada Ø6,7 x 380mm		
TI131.0067.390	Broca Canulada Ø6,7 x 390mm		
TI131.0067.400	Broca Canulada Ø6,7 x 400mm		
TI122.0020.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 10 x 50mm	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F138)	
TI122.0020.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 15 x 50mm		
TI122.0020.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 20 x 50mm		
TI122.0020.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 25 x 50mm		
TI122.0020.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 30 x 50mm		
TI122.0025.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 10 x 50mm	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F138)	
TI122.0025.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 15 x 50mm		
TI122.0025.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 20 x 50mm		
TI122.0025.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 25 x 50mm		
TI122.0025.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 30 x 50mm		
TI122.0030.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 10 x 50mm	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F138)	
TI122.0030.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 15 x 50mm		
TI122.0030.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 20 x 50mm		
TI122.0030.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 25 x 50mm		
















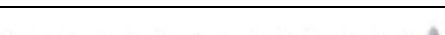
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI122.0030.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 30 x 50mm		
TI122.2020.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 10 x 50mm	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F138)	
TI122.2020.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 15 x 50mm		
TI122.2020.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 20 x 50mm		
TI122.2020.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 25 x 50mm		
TI122.2020.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 30 x 50mm		
TI122.2025.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 10 x 50mm		
TI122.2025.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 15 x 50mm		
TI122.2025.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 20 x 50mm		
TI122.2025.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 25 x 50mm		
TI122.2025.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 30 x 50mm		
TI122.2030.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 10 x 50mm	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F138)	
TI122.2030.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 15 x 50mm		
TI122.2030.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 20 x 50mm		
TI122.2030.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 25 x 50mm		
TI122.2030.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 30 x 50mm		
TI270.1035.001	MACHO CORTICAL Ø3,5 MM MODELO 1	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI135.0030.180	BROCA GRADUADA CANULADA Ø3,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI135.0040.220	BROCA GRADUADA CANULADA Ø4,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	













Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0000.009	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - MINI	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.013	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - MINI	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.015	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - MINI	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.021	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - MINI	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.024	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - MINI	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.029	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - MINI	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.109	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - CURTA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.113	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - CURTA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.115	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - CURTA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.121	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - CURTA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.124	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - CURTA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.129	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - CURTA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.209	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - STD	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	












Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0000.213	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - STD	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.215	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - STD	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.221	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - STD	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.224	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - STD	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.229	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - STD	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.309	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - LONGA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.313	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - LONGA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.315	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - LONGA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.321	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - LONGA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.324	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - LONGA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0000.329	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - LONGA	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.2000.009	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø0,9	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.2000.013	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø1,3	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.2000.015	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø1,5	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.2000.021	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,1	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.2000.024	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,4	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	



Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.2000.029	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,9	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0037.110	BROCA Ø3,7 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0037.120	BROCA Ø3,7 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0037.140	BROCA Ø3,7 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0037.150	BROCA Ø3,7 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0037.170	BROCA Ø3,7 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.0037.190	BROCA Ø3,7 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0037.110	BROCA CANULADA Ø3,7 X 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0037.120	BROCA CANULADA Ø3,7 X 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0037.140	BROCA CANULADA Ø3,7 X 140MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0037.150	BROCA CANULADA Ø3,7 X 150MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0037.170	BROCA CANULADA Ø3,7 X 170MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	


Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0037.190	BROCA CANULADA Ø3,7 X 190MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.100	BROCA CANULADA Ø5,3 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.120	BROCA CANULADA Ø5,3 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.140	BROCA CANULADA Ø5,3 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.160	BROCA CANULADA Ø5,3 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.200	BROCA CANULADA Ø5,3 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.220	BROCA CANULADA Ø5,3 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.240	BROCA CANULADA Ø5,3 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.260	BROCA CANULADA Ø5,3 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.280	BROCA CANULADA Ø5,3 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0053.300	BROCA CANULADA Ø5,3 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	


Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI172.0000.001	SONDA PONTA TIPO GANCHO 3,4MM MARCAÇÕES DE 5MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Alumínio (ASTM B221)	
TI131.0080.120	BROCA CANULADA Ø8,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0080.150	BROCA CANULADA Ø8,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0080.180	BROCA CANULADA Ø8,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0080.220	BROCA CANULADA Ø8,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0080.240	BROCA CANULADA Ø8,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0080.260	BROCA CANULADA Ø8,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0080.280	BROCA CANULADA Ø8,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0080.300	BROCA CANULADA Ø8,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.100	BROCA CANULADA Ø9,0 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.110	BROCA CANULADA Ø9,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.120	BROCA CANULADA Ø9,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.130	BROCA CANULADA Ø9,0 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.140	BROCA CANULADA Ø9,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.150	BROCA CANULADA Ø9,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.160	BROCA CANULADA Ø9,0 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.170	BROCA CANULADA Ø9,0 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.180	BROCA CANULADA Ø9,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.190	BROCA CANULADA Ø9,0 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.200	BROCA CANULADA Ø9,0 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.210	BROCA CANULADA Ø9,0 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.220	BROCA CANULADA Ø9,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport


TI131.0090.230	BROCA CANULADA Ø9,0 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.240	BROCA CANULADA Ø9,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.250	BROCA CANULADA Ø9,0 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.260	BROCA CANULADA Ø9,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.270	BROCA CANULADA Ø9,0 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.280	BROCA CANULADA Ø9,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.290	BROCA CANULADA Ø9,0 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0090.300	BROCA CANULADA Ø9,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.100	BROCA CANULADA Ø10,0 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.110	BROCA CANULADA Ø10,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.120	BROCA CANULADA Ø10,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.130	BROCA CANULADA Ø10,0 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.140	BROCA CANULADA Ø10,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.150	BROCA CANULADA Ø10,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.160	BROCA CANULADA Ø10,0 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.170	BROCA CANULADA Ø10,0 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.180	BROCA CANULADA Ø10,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.190	BROCA CANULADA Ø10,0 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.200	BROCA CANULADA Ø10,0 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.210	BROCA CANULADA Ø10,0 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.220	BROCA CANULADA Ø10,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.230	BROCA CANULADA Ø10,0 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.240	BROCA CANULADA Ø10,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.250	BROCA CANULADA Ø10,0 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.260	BROCA CANULADA Ø10,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport


		(ASTM F899)	
TI131.0100.270	BROCA CANULADA Ø10,0 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.280	BROCA CANULADA Ø10,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.290	BROCA CANULADA Ø10,0 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0100.300	BROCA CANULADA Ø10,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.100	BROCA CANULADA Ø11,0 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.110	BROCA CANULADA Ø11,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.120	BROCA CANULADA Ø11,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.130	BROCA CANULADA Ø11,0 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.140	BROCA CANULADA Ø11,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.150	BROCA CANULADA Ø11,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.160	BROCA CANULADA Ø11,0 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.170	BROCA CANULADA Ø11,0 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.180	BROCA CANULADA Ø11,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.190	BROCA CANULADA Ø11,0 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.200	BROCA CANULADA Ø11,0 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.210	BROCA CANULADA Ø11,0 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.220	BROCA CANULADA Ø11,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.230	BROCA CANULADA Ø11,0 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.240	BROCA CANULADA Ø11,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.250	BROCA CANULADA Ø11,0 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.260	BROCA CANULADA Ø11,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.270	BROCA CANULADA Ø11,0 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.280	BROCA CANULADA Ø11,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0110.290	BROCA CANULADA Ø11,0 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport


TI131.0110.300	BROCA CANULADA Ø11,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.100	FRESA CANULADA Ø8,0 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.110	FRESA CANULADA Ø8,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.120	FRESA CANULADA Ø8,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.130	FRESA CANULADA Ø8,0 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.140	FRESA CANULADA Ø8,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.150	FRESA CANULADA Ø8,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.160	FRESA CANULADA Ø8,0 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.170	FRESA CANULADA Ø8,0 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.180	FRESA CANULADA Ø8,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.190	FRESA CANULADA Ø8,0 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.200	FRESA CANULADA Ø8,0 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.210	FRESA CANULADA Ø8,0 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.220	FRESA CANULADA Ø8,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.230	FRESA CANULADA Ø8,0 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.240	FRESA CANULADA Ø8,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.250	FRESA CANULADA Ø8,0 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.260	FRESA CANULADA Ø8,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.270	FRESA CANULADA Ø8,0 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.280	FRESA CANULADA Ø8,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.290	FRESA CANULADA Ø8,0 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0080.300	FRESA CANULADA Ø8,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.100	FRESA CANULADA Ø9,0 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.110	FRESA CANULADA Ø9,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.120	FRESA CANULADA Ø9,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport





		(ASTM F899)	
TI380.0090.130	FRESA CANULADA Ø9,0 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.140	FRESA CANULADA Ø9,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.150	FRESA CANULADA Ø9,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.160	FRESA CANULADA Ø9,0 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.170	FRESA CANULADA Ø9,0 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.180	FRESA CANULADA Ø9,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.190	FRESA CANULADA Ø9,0 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.200	FRESA CANULADA Ø9,0 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.210	FRESA CANULADA Ø9,0 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.220	FRESA CANULADA Ø9,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.230	FRESA CANULADA Ø9,0 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.240	FRESA CANULADA Ø9,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.250	FRESA CANULADA Ø9,0 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.260	FRESA CANULADA Ø9,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.270	FRESA CANULADA Ø9,0 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.280	FRESA CANULADA Ø9,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.290	FRESA CANULADA Ø9,0 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0090.300	FRESA CANULADA Ø9,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0100.100	FRESA CANULADA Ø10,0 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0100.110	FRESA CANULADA Ø10,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0100.120	FRESA CANULADA Ø10,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0100.130	FRESA CANULADA Ø10,0 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0100.140	FRESA CANULADA Ø10,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0100.150	FRESA CANULADA Ø10,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	

Instrução de Uso









Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI380.0100.160	FRESA CANULADA Ø10,0 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.170	FRESA CANULADA Ø10,0 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.180	FRESA CANULADA Ø10,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.190	FRESA CANULADA Ø10,0 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.200	FRESA CANULADA Ø10,0 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.210	FRESA CANULADA Ø10,0 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.220	FRESA CANULADA Ø10,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.230	FRESA CANULADA Ø10,0 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.240	FRESA CANULADA Ø10,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.250	FRESA CANULADA Ø10,0 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.260	FRESA CANULADA Ø10,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.270	FRESA CANULADA Ø10,0 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.280	FRESA CANULADA Ø10,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.290	FRESA CANULADA Ø10,0 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0100.300	FRESA CANULADA Ø10,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.100	FRESA CANULADA Ø11,0 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.110	FRESA CANULADA Ø11,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.120	FRESA CANULADA Ø11,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.130	FRESA CANULADA Ø11,0 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.140	FRESA CANULADA Ø11,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.150	FRESA CANULADA Ø11,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.160	FRESA CANULADA Ø11,0 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.170	FRESA CANULADA Ø11,0 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.180	FRESA CANULADA Ø11,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI380.0110.190	FRESA CANULADA Ø11,0 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico		





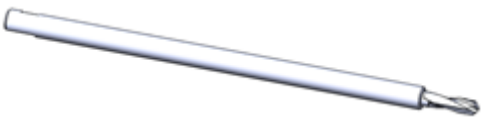
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

		(ASTM F899)	
TI380.0110.200	FRESA CANULADA Ø11,0 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.210	FRESA CANULADA Ø11,0 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.220	FRESA CANULADA Ø11,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.230	FRESA CANULADA Ø11,0 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.240	FRESA CANULADA Ø11,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.250	FRESA CANULADA Ø11,0 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.260	FRESA CANULADA Ø11,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.270	FRESA CANULADA Ø11,0 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.280	FRESA CANULADA Ø11,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.290	FRESA CANULADA Ø11,0 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI380.0110.300	FRESA CANULADA Ø11,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI136.0000.060	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø6,0 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.065	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø6,5 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.070	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø7,0 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.075	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø7,5 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	




Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI136.0000.080	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø8,0 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.085	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø8,5 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.090	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø9,0 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.095	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø9,5 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.100	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø10,0 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.105	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø10,5 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.110	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø11,0 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI136.0000.115	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø11,5 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	



Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI136.0000.120	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø12,0 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899) + Poliacetal	
TI310.0000.005	PINO DE GUIA DE BROCA OFFSET 3,5 MM	Aço Inoxidável Austenítico (ASTM F899)	
TI154.0018.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 60MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0018.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 70MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0018.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0018.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 90MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0018.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0018.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0018.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0027.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 60MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0027.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 70MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0027.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0027.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 90MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0027.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0027.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0027.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0019.060	BROCA CANULADA Ø1,9 X 60 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0019.080	BROCA CANULADA Ø1,9 X 80 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	



Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0019.100	BROCA CANULADA Ø1,9 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0019.120	BROCA CANULADA Ø1,9 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0019.140	BROCA CANULADA Ø1,9 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0019.160	BROCA CANULADA Ø1,9 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0031.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 60MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0031.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 70MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0031.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0031.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 90MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0031.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0031.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0031.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0030.070	BROCA CANULADA Ø3,0 X 70 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0030.090	BROCA CANULADA Ø3,0 X 90 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0030.110	BROCA CANULADA Ø3,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0030.120	BROCA CANULADA Ø3,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0030.140	BROCA CANULADA Ø3,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0030.150	BROCA CANULADA Ø3,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0031.070	BROCA CANULADA Ø3,1 X 70 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0031.090	BROCA CANULADA Ø3,1 X 90 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0031.110	BROCA CANULADA Ø3,1 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0031.120	BROCA CANULADA Ø3,1 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0031.140	BROCA CANULADA Ø3,1 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0031.150	BROCA CANULADA Ø3,1 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0042.060	ESCAREADOR CANULADO PARA	Aço Inoxidável Martensítico	

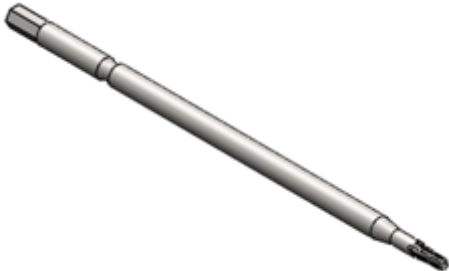
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	PARAFUSO Ø4,2 x 60MM	(ASTM F899)		
TI154.0042.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 70MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 90MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 130MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 140MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 150MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 160MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 170MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0042.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 180MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0062.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 60MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0062.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 70MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0062.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0062.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 90MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0062.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0062.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0062.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0062.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		

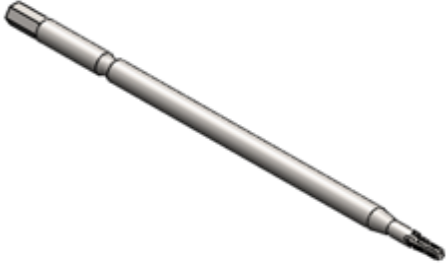
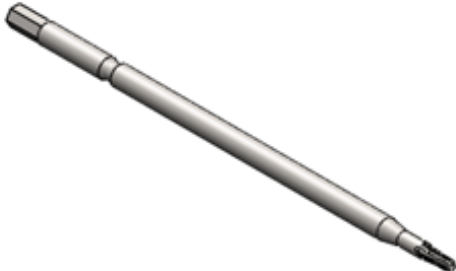
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	130MM		
TI154.0062.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 140MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0062.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 150MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0062.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 160MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0062.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 170MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.0062.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 180MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.070	BROCA CANULADA Ø4,2 X 70 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.080	BROCA CANULADA Ø4,2 X 80 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.090	BROCA CANULADA Ø4,2 X 90 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.110	BROCA CANULADA Ø4,2 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.120	BROCA CANULADA Ø4,2 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.140	BROCA CANULADA Ø4,2 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.150	BROCA CANULADA Ø4,2 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.170	BROCA CANULADA Ø4,2 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.180	BROCA CANULADA Ø4,2 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.190	BROCA CANULADA Ø4,2 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.210	BROCA CANULADA Ø4,2 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.220	BROCA CANULADA Ø4,2 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.230	BROCA CANULADA Ø4,2 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.240	BROCA CANULADA Ø4,2 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.250	BROCA CANULADA Ø4,2 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.260	BROCA CANULADA Ø4,2 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.270	BROCA CANULADA Ø4,2 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0042.280	BROCA CANULADA Ø4,2 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.290	BROCA CANULADA Ø4,2 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI131.0042.300	BROCA CANULADA Ø4,2 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2017.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 50MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2017.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 60MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2017.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 70MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2017.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 80MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2017.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 90MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2017.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 100MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2017.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 110MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2017.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 120MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2018.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 50MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2018.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 60MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2018.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 70MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2018.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 80MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2018.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 90MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2018.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 100MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2018.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 110MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI154.2018.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 120MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

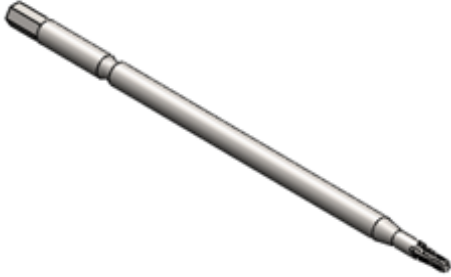

T1154.0029.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 50MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 60MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 70MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 90MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 130MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 150MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 160MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 170MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 180MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.190	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 190MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.0029.200	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 200MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.2021.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 50MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.2021.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 60MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.2021.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 70MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
T1154.2021.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport


	(ES)		
T1154.2021.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 90MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.2021.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 100MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.2021.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 110MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.2021.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 120MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 50MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 60MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 70MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 90MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0025.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 150MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0035.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 50MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0035.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 60MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0035.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 70MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0035.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 80MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0035.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 90MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0035.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0035.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
T1154.0035.120	ESCAREADOR CANULADO PARA	Aço Inoxidável Martensítico	





Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	PARAFUSO Ø3,5 x 120MM	(ASTM F899)		
TI154.0035.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 130MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0035.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0035.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 150MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.0035.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 180MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.3017.050	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 50MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.3017.060	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 60MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.3017.070	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 70MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.3017.080	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 80MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.3017.090	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 90MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.3017.100	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 100MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.3017.110	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 110MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI154.3017.120	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 120MM (ES)	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI150.2020.050	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 050MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI150.2020.060	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 060MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI150.2020.070	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 070MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI150.2020.080	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 080MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI150.2020.090	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 090MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI150.2020.100	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 100MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI150.2020.110	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 110MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		
TI150.2020.120	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 120MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)		

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI150.2020.130	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 130MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI150.2020.140	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 140MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI150.2020.150	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 150MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.050	BROCA Ø1,2 X 050 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.060	BROCA Ø1,2 X 060 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.070	BROCA Ø1,2 X 070 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.080	BROCA Ø1,2 X 080 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.090	BROCA Ø1,2 X 090 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.100	BROCA Ø1,2 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.110	BROCA Ø1,2 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.120	BROCA Ø1,2 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.130	BROCA Ø1,2 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.140	BROCA Ø1,2 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1012.150	BROCA Ø1,2 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.050	BROCA Ø1,5 X 050 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.060	BROCA Ø1,5 X 060 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.070	BROCA Ø1,5 X 070 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.080	BROCA Ø1,5 X 080 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.090	BROCA Ø1,5 X 090 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.100	BROCA Ø1,5 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.110	BROCA Ø1,5 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.120	BROCA Ø1,5 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.130	BROCA Ø1,5 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.140	BROCA Ø1,5 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI130.1015.150	BROCA Ø1,5 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico	

















Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

		(ASTM F899)	
TI132.0020.100	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 100 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.110	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 110 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.120	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 120 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.130	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.140	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.150	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.160	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.170	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.180	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.190	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.200	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.210	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.220	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.230	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.240	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.250	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.260	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 260 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.270	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 270 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.280	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 280 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.290	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 290 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI132.0020.300	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 300 MM	Aço Inoxidável Martensítico (ASTM F899)	
TI133.2009.005	BROCA Ø0,9 COM STOP 5MM CA	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

T1133.2012.005	BROCA Ø1,2 COM STOP 5MM CA	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1133.2015.005	BROCA Ø1,5 COM STOP 5MM CA	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1133.2009.007	BROCA Ø0,9 COM STOP 7MM CA	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1133.2012.007	BROCA Ø1,2 COM STOP 7MM CA	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1133.2015.007	BROCA Ø1,5 COM STOP 7MM CA	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1144.1200.001	CHAVE CROSS-DRIVE S1,2 - CA	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1144.1520.001	CHAVE CROSS-DRIVE S1,5/2,0 - CA	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0042.200	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0042.210	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 210 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0042.220	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 220 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0042.230	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 230 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0042.240	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 240 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0042.250	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 250 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0032.130	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 130 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0032.140	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 140 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
T1132.0032.150	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 150 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	


























Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI132.0032.160	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 160 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI132.0032.170	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 170 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI132.0032.180	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 180 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI132.0032.190	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 190 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI132.0032.200	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 200 MM	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI380.0060.000	Fresa Canulada Ø6,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.0070.000	Fresa Canulada Ø7,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.0080.000	Fresa Canulada Ø8,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.0090.000	Fresa Canulada Ø9,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.0100.000	Fresa Canulada Ø10,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.0110.000	Fresa Canulada Ø11,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.1060.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø6,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.1070.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø7,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.1080.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø8,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.1090.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø9,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.1100.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø10,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.1110.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø11,0 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI380.2045.000	Fresa Endoscópica Canulada Ø4,5 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI137.0024.000	Broca de Passagem de Enxerto Ø2,4 mm	Aço Inoxidável precipitação (ASTM F899)	
TI133.0009.100	Broca Ø0,9 X 100MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0009.110	Broca Ø0,9 X 110MM ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0009.130	Broca Ø0,9 X 130mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0009.140	Broca Ø0,9 X 140mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0009.150	Broca Ø0,9 X 150mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0011.060	Broca Ø1,1 X 60mm ES	Aço Inoxidável Martensítico	






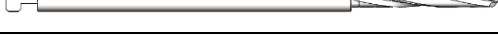

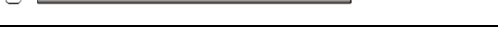
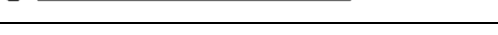















Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

		ASTM F899	
TI133.0011.080	Broca Ø1,1 X 80mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0011.100	Broca Ø1,1 X 100mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0011.110	Broca Ø1,1 X 110mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0011.130	Broca Ø1,1 X 130mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0011.140	Broca Ø1,1 X 140mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0011.150	Broca Ø1,1 X 150mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0012.060	Broca Ø1,2 X 60mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0012.080	Broca Ø1,2 X 80mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0012.100	Broca Ø1,2 X 100mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0012.110	Broca Ø1,2 X 110mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0012.130	Broca Ø1,2 X 130mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0012.140	Broca Ø1,2 X 140mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0012.150	Broca Ø1,2 X 150mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0014.050	Broca Ø1,4 X 50mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0014.060	Broca Ø1,4 X 60mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0014.080	Broca Ø1,4 X 80mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0014.100	Broca Ø1,4 X 100mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0014.110	Broca Ø1,4 X 110mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0014.130	Broca Ø1,4 X 130mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0014.140	Broca Ø1,4 X 140mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0015.050	Broca Ø1,5 X 50mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0015.060	Broca Ø1,5 X 60mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0015.080	Broca Ø1,5 X 80mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0015.100	Broca Ø1,5 X 100mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	


























Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.0015.110	Broca Ø1,5 X 110mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0015.130	Broca Ø1,5 X 130mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0015.140	Broca Ø1,5 X 140mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0018.050	Broca Ø1,8 X 50mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0018.060	Broca Ø1,8 X 60mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0018.080	Broca Ø1,8 X 80mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0018.100	Broca Ø1,8 X 100mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0018.110	Broca Ø1,8 X 110mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0018.130	Broca Ø1,8 X 130mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0018.140	Broca Ø1,8 X 140mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0020.050	Broca Ø2,0 X 50mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0020.060	Broca Ø2,0 X 60mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0020.080	Broca Ø2,0 X 80mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0020.110	Broca Ø2,0 X 110mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0020.130	Broca Ø2,0 X 130mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.0020.140	Broca Ø2,0 X 140mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1008.008	Broca Ø0,8 Com Stop 8mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1008.009	Broca Ø0,8 Com Stop 9mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1008.010	Broca Ø0,8 Com Stop 10mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1008.011	Broca Ø0,8 Com Stop 11mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1008.012	Broca Ø0,8 Com Stop 12mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1008.013	Broca Ø0,8 Com Stop 13mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1008.014	Broca Ø0,8 Com Stop 14mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1008.015	Broca Ø0,8 Com Stop 15mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1009.008	Broca Ø0,9 Com Stop 8mm ES	Aço Inoxidável Martensítico	






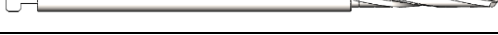

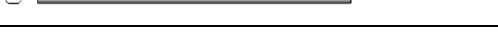
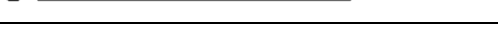















Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

		ASTM F899	
TI133.1009.009	Broca Ø0,9 Com Stop 9mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1009.011	Broca Ø0,9 Com Stop 11mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1009.012	Broca Ø0,9 Com Stop 12mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1009.013	Broca Ø0,9 Com Stop 13mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1009.014	Broca Ø0,9 Com Stop 14mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1009.015	Broca Ø0,9 Com Stop 15mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1011.007	Broca Ø1,1 Com Stop 7mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1011.009	Broca Ø1,1 Com Stop 9mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1011.011	Broca Ø1,1 Com Stop 11mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1011.012	Broca Ø1,1 Com Stop 12mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1011.013	Broca Ø1,1 Com Stop 13mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1011.014	Broca Ø1,1 Com Stop 14mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1012.007	Broca Ø1,2 Com Stop 7mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1012.009	Broca Ø1,2 Com Stop 9mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1012.011	Broca Ø1,2 Com Stop 11mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1012.012	Broca Ø1,2 Com Stop 12mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1012.013	Broca Ø1,2 Com Stop 13mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1012.014	Broca Ø1,2 Com Stop 14mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.005	Broca Ø1,4 Com Stop 05mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.007	Broca Ø1,4 Com Stop 07mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.009	Broca Ø1,4 Com Stop 09mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.011	Broca Ø1,4 Com Stop 11mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.013	Broca Ø1,4 Com Stop 13mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.014	Broca Ø1,4 Com Stop 14mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	


























Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.1014.016	Broca Ø1,4 Com Stop 16mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.017	Broca Ø1,4 Com Stop 17mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.018	Broca Ø1,4 Com Stop 18mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1014.019	Broca Ø1,4 Com Stop 19mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.004	Broca Ø1,5 Com Stop 04mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.006	Broca Ø1,5 Com Stop 06mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.007	Broca Ø1,5 Com Stop 07mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.008	Broca Ø1,5 Com Stop 08mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.009	Broca Ø1,5 Com Stop 09mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.011	Broca Ø1,5 Com Stop 11mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.012	Broca Ø1,5 Com Stop 12mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.013	Broca Ø1,5 Com Stop 13mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.014	Broca Ø1,5 Com Stop 14mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.016	Broca Ø1,5 Com Stop 16mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.017	Broca Ø1,5 Com Stop 17mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.018	Broca Ø1,5 Com Stop 18mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1015.019	Broca Ø1,5 Com Stop 19mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.004	Broca Ø1,8 Com Stop 04mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.005	Broca Ø1,8 Com Stop 05mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.006	Broca Ø1,8 Com Stop 06mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.007	Broca Ø1,8 Com Stop 07mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.008	Broca Ø1,8 Com Stop 08mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.009	Broca Ø1,8 Com Stop 09mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.011	Broca Ø1,8 Com Stop 11mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.012	Broca Ø1,8 Com Stop 12mm ES	Aço Inoxidável Martensítico	

























Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

		ASTM F899	
TI133.1018.013	Broca Ø1,8 Com Stop 13mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.014	Broca Ø1,8 Com Stop 14mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.016	Broca Ø1,8 Com Stop 16mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.017	Broca Ø1,8 Com Stop 17mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.018	Broca Ø1,8 Com Stop 18mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.019	Broca Ø1,8 Com Stop 19mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.021	Broca Ø1,8 Com Stop 21mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.022	Broca Ø1,8 Com Stop 22mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.023	Broca Ø1,8 Com Stop 23mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1018.024	Broca Ø1,8 Com Stop 24mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.004	Broca Ø2,0 Com Stop 04mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.005	Broca Ø2,0 Com Stop 05mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.006	Broca Ø2,0 Com Stop 06mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.007	Broca Ø2,0 Com Stop 07mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.008	Broca Ø2,0 Com Stop 08mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.009	Broca Ø2,0 Com Stop 09mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.011	Broca Ø2,0 Com Stop 11mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.012	Broca Ø2,0 Com Stop 12mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.013	Broca Ø2,0 Com Stop 13mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.014	Broca Ø2,0 Com Stop 14mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.016	Broca Ø2,0 Com Stop 16mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.017	Broca Ø2,0 Com Stop 17mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.018	Broca Ø2,0 Com Stop 18mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.019	Broca Ø2,0 Com Stop 19mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	


























Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.1020.021	Broca Ø2,0 Com Stop 21mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.022	Broca Ø2,0 Com Stop 22mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.023	Broca Ø2,0 Com Stop 23mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1020.024	Broca Ø2,0 Com Stop 24mm ES	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.050	Broca Ø0,9 X 50mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.060	Broca Ø0,9 X 60mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.070	Broca Ø0,9 X 70mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.080	Broca Ø0,9 X 80mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.090	Broca Ø0,9 X 90mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.100	Broca Ø0,9 X 100mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.110	Broca Ø0,9 X 110mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.120	Broca Ø0,9 X 120mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.130	Broca Ø0,9 X 130mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.140	Broca Ø0,9 X 140mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1109.150	Broca Ø0,9 X 150mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.050	Broca Ø1,1 X 50mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.060	Broca Ø1,1 X 60mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.070	Broca Ø1,1 X 70mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.080	Broca Ø1,1 X 80mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.090	Broca Ø1,1 X 90mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.100	Broca Ø1,1 X 100mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.110	Broca Ø1,1 X 110mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.120	Broca Ø1,1 X 120mm ES C Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.130	Broca Ø1,1 X 130mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1111.140	Broca Ø1,1 X 140mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico	






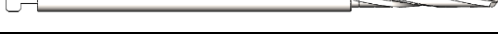

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

		ASTM F899	
TI133.1111.150	Broca Ø1,1 X 150mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.050	Broca Ø1,2 X 50mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.060	Broca Ø1,2 X 60mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.070	Broca Ø1,2 X 70mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.080	Broca Ø1,2 X 80mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.090	Broca Ø1,2 X 90mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.100	Broca Ø1,2 X 100mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.110	Broca Ø1,2 X 110mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.120	Broca Ø1,2 X 120mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.130	Broca Ø1,2 X 130mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.140	Broca Ø1,2 X 140mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1112.150	Broca Ø1,2 X 150mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.050	Broca Ø1,4 X 50mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.060	Broca Ø1,4 X 60mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.070	Broca Ø1,4 X 70mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.080	Broca Ø1,4 X 80mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.090	Broca Ø1,4 X 90mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.100	Broca Ø1,4 X 100mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.110	Broca Ø1,4 X 110mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.120	Broca Ø1,4 X 120mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.130	Broca Ø1,4 X 130mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.140	Broca Ø1,4 X 140mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1114.150	Broca Ø1,4 X 150mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.050	Broca Ø1,5 X 50mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport





TI133.1115.060	Broca Ø1,5 X 60mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.070	Broca Ø1,5 X 70mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.080	Broca Ø1,5 X 80mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.090	Broca Ø1,5 X 90mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.100	Broca Ø1,5 X 100mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.110	Broca Ø1,5 X 110mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.120	Broca Ø1,5 X 120mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.130	Broca Ø1,5 X 130mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.140	Broca Ø1,5 X 140mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1115.150	Broca Ø1,5 X 150mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.050	Broca Ø1,8 X 50mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.060	Broca Ø1,8 X 60mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.070	Broca Ø1,8 X 70mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.080	Broca Ø1,8 X 80mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.090	Broca Ø1,8 X 90mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.100	Broca Ø1,8 X 100mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.110	Broca Ø1,8 X 110mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.120	Broca Ø1,8 X 120mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.130	Broca Ø1,8 X 130mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.140	Broca Ø1,8 X 140mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1118.150	Broca Ø1,8 X 150mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.050	Broca Ø2,0 X 50mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.060	Broca Ø2,0 X 60mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.070	Broca Ø2,0 X 70mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.080	Broca Ø2,0 X 80mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport








		ASTM F899	
TI133.1120.090	Broca Ø2,0 X 90mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.100	Broca Ø2,0 X 100mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.110	Broca Ø2,0 X 110mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.120	Broca Ø2,0 X 120mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.130	Broca Ø2,0 X 130mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.140	Broca Ø2,0 X 140mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	
TI133.1120.150	Broca Ø2,0 X 150mm ES Com Stop	Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899	

INDICAÇÃO E FINALIDADE








Os modelos comerciais que integram o **Instrumental Cirúrgico para Trauma IV - Techimport** possuem a função de auxiliar os procedimentos cirúrgicos.

Código	Descrição	Imagem Ilustrativa	Indicação de uso
TI130.0010.070	Broca Ø1,0 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0010.090	Broca Ø1,0 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0010.110	Broca Ø1,0 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0010.130	Broca Ø1,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0010.150	Broca Ø1,0 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0011.070	Broca Ø1,1 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0011.090	Broca Ø1,1 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0011.110	Broca Ø1,1 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0011.130	Broca Ø1,1 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0011.150	Broca Ø1,1 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0012.070	Broca Ø1,2 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0012.090	Broca Ø1,2 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0012.110	Broca Ø1,2 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0012.130	Broca Ø1,2 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0012.150	Broca Ø1,2 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0013.070	Broca Ø1,3 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0013.090	Broca Ø1,3 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0013.110	Broca Ø1,3 x 110 mm		Promover a perfuração óssea








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0013.130	Broca Ø1,3 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0013.150	Broca Ø1,3 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0014.070	Broca Ø1,4 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0014.090	Broca Ø1,4 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0014.110	Broca Ø1,4 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0014.130	Broca Ø1,4 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0014.150	Broca Ø1,4 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0015.070	Broca Ø1,5 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0015.090	Broca Ø1,5 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0015.110	Broca Ø1,5 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0015.130	Broca Ø1,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0015.150	Broca Ø1,5 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0016.070	Broca Ø1,6 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0016.090	Broca Ø1,6 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0016.110	Broca Ø1,6 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0016.130	Broca Ø1,6 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0016.150	Broca Ø1,6 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0017.070	Broca Ø1,7 x 070 mm		
TI130.0017.090	Broca Ø1,7 x 090 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0017.110	Broca Ø1,7 x 110 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0017.130	Broca Ø1,7 x 130 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0017.150	Broca Ø1,7 x 150 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0018.070	Broca Ø1,8 x 070 mm		
TI130.0018.090	Broca Ø1,8 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0018.110	Broca Ø1,8 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0018.130	Broca Ø1,8 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0018.150	Broca Ø1,8 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0019.070	Broca Ø1,9 x 070 mm		
TI130.0019.090	Broca Ø1,9 x 090 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0019.110	Broca Ø1,9 x 110 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0019.130	Broca Ø1,9 x 130 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0019.150	Broca Ø1,9 x 150 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0020.070	Broca Ø2,0 x 070 mm		
TI130.0020.090	Broca Ø2,0 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0020.110	Broca Ø2,0 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0020.130	Broca Ø2,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0020.150	Broca Ø2,0 x 150 mm		Promover a perfuração óssea







Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0021.070	Broca Ø2,1 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0021.090	Broca Ø2,1 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0021.110	Broca Ø2,1 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0021.130	Broca Ø2,1 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0021.150	Broca Ø2,1 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0022.070	Broca Ø2,2 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0022.090	Broca Ø2,2 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0022.110	Broca Ø2,2 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0022.130	Broca Ø2,2 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0022.150	Broca Ø2,2 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0023.070	Broca Ø2,3 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0023.090	Broca Ø2,3 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0023.110	Broca Ø2,3 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0023.130	Broca Ø2,3 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0023.150	Broca Ø2,3 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0024.070	Broca Ø2,4 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0024.090	Broca Ø2,4 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0024.110	Broca Ø2,4 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0024.130	Broca Ø2,4 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0024.150	Broca Ø2,4 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.070	Broca Ø2,5 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.090	Broca Ø2,5 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.110	Broca Ø2,5 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.130	Broca Ø2,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.150	Broca Ø2,5 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0026.070	Broca Ø2,6 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0026.090	Broca Ø2,6 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0026.110	Broca Ø2,6 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0026.130	Broca Ø2,6 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0026.150	Broca Ø2,6 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0027.070	Broca Ø2,7 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0027.090	Broca Ø2,7 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0027.110	Broca Ø2,7 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0027.130	Broca Ø2,7 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0027.150	Broca Ø2,7 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0028.070	Broca Ø2,8 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0028.090	Broca Ø2,8 x 090 mm		Promover a perfuração óssea










Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0028.110	Broca Ø2,8 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0028.130	Broca Ø2,8 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0028.150	Broca Ø2,8 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0029.070	Broca Ø2,9 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0029.090	Broca Ø2,9 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0029.110	Broca Ø2,9 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0029.130	Broca Ø2,9 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0029.150	Broca Ø2,9 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0030.080	Broca Ø3,0 x 080 mm		
TI130.0030.100	Broca Ø3,0 x 100 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0030.130	Broca Ø3,0 x 130 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0030.160	Broca Ø3,0 x 160 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0030.180	Broca Ø3,0 x 180 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0030.200	Broca Ø3,0 x 200 mm	Promover a perfuração óssea	
TI130.0031.080	Broca Ø3,1 x 080 mm		
TI130.0031.100	Broca Ø3,1 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0031.130	Broca Ø3,1 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0031.160	Broca Ø3,1 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0031.180	Broca Ø3,1 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0031.200	Broca Ø3,1 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0032.080	Broca Ø3,2 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0032.100	Broca Ø3,2 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0032.130	Broca Ø3,2 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0032.160	Broca Ø3,2 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0032.180	Broca Ø3,2 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0032.200	Broca Ø3,2 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0033.080	Broca Ø3,3 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0033.100	Broca Ø3,3 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0033.130	Broca Ø3,3 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0033.160	Broca Ø3,3 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0033.180	Broca Ø3,3 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0033.200	Broca Ø3,3 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0034.080	Broca Ø3,4 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0034.100	Broca Ø3,4 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0034.130	Broca Ø3,4 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0034.160	Broca Ø3,4 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0034.180	Broca Ø3,4 x 180 mm		Promover a perfuração óssea










Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0034.200	Broca Ø3,4 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0035.080	Broca Ø3,5 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0035.100	Broca Ø3,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0035.130	Broca Ø3,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0035.160	Broca Ø3,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0035.180	Broca Ø3,5 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0035.200	Broca Ø3,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0036.080	Broca Ø3,6 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0036.100	Broca Ø3,6 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0036.130	Broca Ø3,6 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0036.160	Broca Ø3,6 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0036.180	Broca Ø3,6 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0036.200	Broca Ø3,6 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0037.080	Broca Ø3,7 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0037.100	Broca Ø3,7 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0037.130	Broca Ø3,7 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0037.160	Broca Ø3,7 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0037.180	Broca Ø3,7 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0037.200	Broca Ø3,7 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0038.080	Broca Ø3,8 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0038.100	Broca Ø3,8 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0038.130	Broca Ø3,8 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0038.160	Broca Ø3,8 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0038.180	Broca Ø3,8 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0038.200	Broca Ø3,8 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0039.080	Broca Ø3,9 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0039.100	Broca Ø3,9 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0039.130	Broca Ø3,9 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0039.160	Broca Ø3,9 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0039.180	Broca Ø3,9 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0039.200	Broca Ø3,9 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.100	Broca Ø4,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.130	Broca Ø4,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.160	Broca Ø4,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.200	Broca Ø4,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0041.100	Broca Ø4,1 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0041.130	Broca Ø4,1 x 130 mm		Promover a perfuração óssea









Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI130.0041.160	Broca Ø4,1 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0041.200	Broca Ø4,1 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.100	Broca Ø4,2 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.130	Broca Ø4,2 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.160	Broca Ø4,2 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.200	Broca Ø4,2 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0043.100	Broca Ø4,3 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0043.130	Broca Ø4,3 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0043.160	Broca Ø4,3 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0043.200	Broca Ø4,3 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0044.100	Broca Ø4,4 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0044.130	Broca Ø4,4 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0044.160	Broca Ø4,4 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0044.200	Broca Ø4,4 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0045.100	Broca Ø4,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0045.130	Broca Ø4,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0045.160	Broca Ø4,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0045.200	Broca Ø4,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0046.100	Broca Ø4,6 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0046.130	Broca Ø4,6 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0046.160	Broca Ø4,6 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0046.200	Broca Ø4,6 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0047.100	Broca Ø4,7 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0047.130	Broca Ø4,7 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0047.160	Broca Ø4,7 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0047.200	Broca Ø4,7 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0048.100	Broca Ø4,8 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0048.130	Broca Ø4,8 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0048.160	Broca Ø4,8 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0048.200	Broca Ø4,8 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0049.100	Broca Ø4,9 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0049.130	Broca Ø4,9 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0049.160	Broca Ø4,9 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0049.200	Broca Ø4,9 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0050.100	Broca Ø5,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0050.130	Broca Ø5,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea









Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0050.160	Broca Ø5,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0050.200	Broca Ø5,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0055.100	Broca Ø5,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0055.130	Broca Ø5,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0055.160	Broca Ø5,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0055.200	Broca Ø5,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0060.100	Broca Ø6,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0060.130	Broca Ø6,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0060.160	Broca Ø6,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0060.200	Broca Ø6,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0065.100	Broca Ø6,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0065.130	Broca Ø6,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0065.160	Broca Ø6,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0065.200	Broca Ø6,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0070.100	Broca Ø7,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0070.130	Broca Ø7,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0070.160	Broca Ø7,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0070.200	Broca Ø7,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0075.100	Broca Ø7,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0075.130	Broca Ø7,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0075.160	Broca Ø7,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0075.200	Broca Ø7,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0080.100	Broca Ø8,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0080.130	Broca Ø8,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0080.160	Broca Ø8,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0080.200	Broca Ø8,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0010.070	Broca Canulada Ø1,0 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0010.090	Broca Canulada Ø1,0 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0010.110	Broca Canulada Ø1,0 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0010.130	Broca Canulada Ø1,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0010.150	Broca Canulada Ø1,0 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0011.070	Broca Canulada Ø1,1 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0011.090	Broca Canulada Ø1,1 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0011.110	Broca Canulada Ø1,1 x 110 mm		Promover a perfuração óssea








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0011.130	Broca Canulada Ø1,1 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0011.150	Broca Canulada Ø1,1 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0012.070	Broca Canulada Ø1,2 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0012.090	Broca Canulada Ø1,2 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0012.110	Broca Canulada Ø1,2 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0012.130	Broca Canulada Ø1,2 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0012.150	Broca Canulada Ø1,2 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0013.070	Broca Canulada Ø1,3 x 070 mm		
TI131.0013.090	Broca Canulada Ø1,3 x 090 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0013.110	Broca Canulada Ø1,3 x 110 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0013.130	Broca Canulada Ø1,3 x 130 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0013.150	Broca Canulada Ø1,3 x 150 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0014.070	Broca Canulada Ø1,4 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0014.090	Broca Canulada Ø1,4 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0014.110	Broca Canulada Ø1,4 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0014.130	Broca Canulada Ø1,4 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0014.150	Broca Canulada Ø1,4 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0015.070	Broca Canulada Ø1,5 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0015.090	Broca Canulada Ø1,5 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0015.110	Broca Canulada Ø1,5 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0015.130	Broca Canulada Ø1,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0015.150	Broca Canulada Ø1,5 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0016.070	Broca Canulada Ø1,6 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0016.090	Broca Canulada Ø1,6 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0016.110	Broca Canulada Ø1,6 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0016.130	Broca Canulada Ø1,6 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0016.150	Broca Canulada Ø1,6 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0017.070	Broca Canulada Ø1,7 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0017.090	Broca Canulada Ø1,7 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0017.110	Broca Canulada Ø1,7 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0017.130	Broca Canulada Ø1,7 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0017.150	Broca Canulada Ø1,7 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0018.070	Broca Canulada Ø1,8 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0018.090	Broca Canulada Ø1,8 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0018.110	Broca Canulada Ø1,8 x 110 mm		Promover a perfuração óssea








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0018.130	Broca Canulada Ø1,8 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0018.150	Broca Canulada Ø1,8 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0019.070	Broca Canulada Ø1,9 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0019.090	Broca Canulada Ø1,9 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0019.110	Broca Canulada Ø1,9 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0019.130	Broca Canulada Ø1,9 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0019.150	Broca Canulada Ø1,9 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0020.070	Broca Canulada Ø2,0 x 070 mm		
TI131.0020.090	Broca Canulada Ø2,0 x 090 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0020.110	Broca Canulada Ø2,0 x 110 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0020.130	Broca Canulada Ø2,0 x 130 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0020.150	Broca Canulada Ø2,0 x 150 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0021.070	Broca Canulada Ø2,1 x 070 mm		
TI131.0021.090	Broca Canulada Ø2,1 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0021.110	Broca Canulada Ø2,1 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0021.130	Broca Canulada Ø2,1 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0021.150	Broca Canulada Ø2,1 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0022.070	Broca Canulada Ø2,2 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0022.090	Broca Canulada Ø2,2 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0022.110	Broca Canulada Ø2,2 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0022.130	Broca Canulada Ø2,2 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0022.150	Broca Canulada Ø2,2 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0023.070	Broca Canulada Ø2,3 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0023.090	Broca Canulada Ø2,3 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0023.110	Broca Canulada Ø2,3 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0023.130	Broca Canulada Ø2,3 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0023.150	Broca Canulada Ø2,3 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0024.070	Broca Canulada Ø2,4 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0024.090	Broca Canulada Ø2,4 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0024.110	Broca Canulada Ø2,4 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0024.130	Broca Canulada Ø2,4 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0024.150	Broca Canulada Ø2,4 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0025.070	Broca Canulada Ø2,5 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0025.090	Broca Canulada Ø2,5 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0025.110	Broca Canulada Ø2,5 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0025.130	Broca Canulada Ø2,5 x 130 mm		Promover a









Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	130 mm		perfuração óssea
TI131.0025.150	Broca Canulada Ø2,5 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0026.070	Broca Canulada Ø2,6 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0026.090	Broca Canulada Ø2,6 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0026.110	Broca Canulada Ø2,6 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0026.130	Broca Canulada Ø2,6 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0026.150	Broca Canulada Ø2,6 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0027.070	Broca Canulada Ø2,7 x 070 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0027.090	Broca Canulada Ø2,7 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0027.110	Broca Canulada Ø2,7 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0027.130	Broca Canulada Ø2,7 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0027.150	Broca Canulada Ø2,7 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0028.070	Broca Canulada Ø2,8 x 070 mm		
TI131.0028.090	Broca Canulada Ø2,8 x 090 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0028.110	Broca Canulada Ø2,8 x 110 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0028.130	Broca Canulada Ø2,8 x 130 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0028.150	Broca Canulada Ø2,8 x 150 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0029.070	Broca Canulada Ø2,9 x 070 mm		
TI131.0029.090	Broca Canulada Ø2,9 x 090 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0029.110	Broca Canulada Ø2,9 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0029.130	Broca Canulada Ø2,9 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0029.150	Broca Canulada Ø2,9 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0030.080	Broca Canulada Ø3,0 x 080 mm		
TI131.0030.100	Broca Canulada Ø3,0 x 100 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0030.130	Broca Canulada Ø3,0 x 130 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0030.160	Broca Canulada Ø3,0 x 160 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0030.180	Broca Canulada Ø3,0 x 180 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0030.200	Broca Canulada Ø3,0 x 200 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0031.080	Broca Canulada Ø3,1 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0031.100	Broca Canulada Ø3,1 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0031.130	Broca Canulada Ø3,1 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0031.160	Broca Canulada Ø3,1 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0031.180	Broca Canulada Ø3,1 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0031.200	Broca Canulada Ø3,1 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0032.080	Broca Canulada Ø3,2 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0032.100	Broca Canulada Ø3,2 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0032.130	Broca Canulada Ø3,2 x 130 mm		Promover a perfuração óssea










Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0032.160	Broca Canulada Ø3,2 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0032.180	Broca Canulada Ø3,2 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0032.200	Broca Canulada Ø3,2 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0033.080	Broca Canulada Ø3,3 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0033.100	Broca Canulada Ø3,3 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0033.130	Broca Canulada Ø3,3 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0033.160	Broca Canulada Ø3,3 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0033.180	Broca Canulada Ø3,3 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0033.200	Broca Canulada Ø3,3 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0034.080	Broca Canulada Ø3,4 x 080 mm		
TI131.0034.100	Broca Canulada Ø3,4 x 100 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0034.130	Broca Canulada Ø3,4 x 130 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0034.160	Broca Canulada Ø3,4 x 160 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0034.180	Broca Canulada Ø3,4 x 180 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0034.200	Broca Canulada Ø3,4 x 200 mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0035.080	Broca Canulada Ø3,5 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0035.100	Broca Canulada Ø3,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0035.130	Broca Canulada Ø3,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0035.160	Broca Canulada Ø3,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0035.180	Broca Canulada Ø3,5 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0035.200	Broca Canulada Ø3,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0036.080	Broca Canulada Ø3,6 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0036.100	Broca Canulada Ø3,6 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0036.130	Broca Canulada Ø3,6 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0036.160	Broca Canulada Ø3,6 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0036.180	Broca Canulada Ø3,6 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0036.200	Broca Canulada Ø3,6 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0037.080	Broca Canulada Ø3,7 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0037.100	Broca Canulada Ø3,7 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0037.130	Broca Canulada Ø3,7 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0037.160	Broca Canulada Ø3,7 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0037.180	Broca Canulada Ø3,7 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0037.200	Broca Canulada Ø3,7 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0038.080	Broca Canulada Ø3,8 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0038.100	Broca Canulada Ø3,8 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0038.130	Broca Canulada Ø3,8 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0038.160	Broca Canulada Ø3,8 x		Promover a








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	160 mm		perfuração óssea
TI131.0038.180	Broca Canulada Ø3,8 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0038.200	Broca Canulada Ø3,8 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0039.080	Broca Canulada Ø3,9 x 080 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0039.100	Broca Canulada Ø3,9 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0039.130	Broca Canulada Ø3,9 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0039.160	Broca Canulada Ø3,9 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0039.180	Broca Canulada Ø3,9 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0039.200	Broca Canulada Ø3,9 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0040.100	Broca Canulada Ø4,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0040.130	Broca Canulada Ø4,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0040.160	Broca Canulada Ø4,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0040.200	Broca Canulada Ø4,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0041.100	Broca Canulada Ø4,1 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0041.130	Broca Canulada Ø4,1 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0041.160	Broca Canulada Ø4,1 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0041.200	Broca Canulada Ø4,1 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0042.100	Broca Canulada Ø4,2 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0042.130	Broca Canulada Ø4,2 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0042.160	Broca Canulada Ø4,2 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0042.200	Broca Canulada Ø4,2 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0043.100	Broca Canulada Ø4,3 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0043.130	Broca Canulada Ø4,3 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0043.160	Broca Canulada Ø4,3 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0043.200	Broca Canulada Ø4,3 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0044.100	Broca Canulada Ø4,4 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0044.130	Broca Canulada Ø4,4 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0044.160	Broca Canulada Ø4,4 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0044.200	Broca Canulada Ø4,4 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0045.100	Broca Canulada Ø4,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0045.130	Broca Canulada Ø4,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0045.160	Broca Canulada Ø4,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0045.200	Broca Canulada Ø4,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0046.100	Broca Canulada Ø4,6 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0046.130	Broca Canulada Ø4,6 x 130 mm		Promover a perfuração óssea








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0046.160	Broca Canulada Ø4,6 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0046.200	Broca Canulada Ø4,6 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0047.100	Broca Canulada Ø4,7 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0047.130	Broca Canulada Ø4,7 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0047.160	Broca Canulada Ø4,7 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0047.200	Broca Canulada Ø4,7 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0048.100	Broca Canulada Ø4,8 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0048.130	Broca Canulada Ø4,8 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0048.160	Broca Canulada Ø4,8 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0048.200	Broca Canulada Ø4,8 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0049.100	Broca Canulada Ø4,9 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0049.130	Broca Canulada Ø4,9 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0049.160	Broca Canulada Ø4,9 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0049.200	Broca Canulada Ø4,9 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0050.100	Broca Canulada Ø5,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0050.130	Broca Canulada Ø5,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0050.160	Broca Canulada Ø5,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0050.200	Broca Canulada Ø5,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0055.100	Broca Canulada Ø5,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0055.130	Broca Canulada Ø5,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0055.160	Broca Canulada Ø5,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0055.200	Broca Canulada Ø5,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0060.100	Broca Canulada Ø6,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0060.130	Broca Canulada Ø6,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0060.160	Broca Canulada Ø6,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0060.200	Broca Canulada Ø6,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0065.100	Broca Canulada Ø6,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0065.130	Broca Canulada Ø6,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0065.160	Broca Canulada Ø6,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0065.200	Broca Canulada Ø6,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0070.100	Broca Canulada Ø7,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0070.130	Broca Canulada Ø7,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0070.160	Broca Canulada Ø7,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0070.200	Broca Canulada Ø7,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0075.100	Broca Canulada Ø7,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0075.130	Broca Canulada Ø7,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0075.160	Broca Canulada Ø7,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0075.200	Broca Canulada Ø7,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0080.100	Broca Canulada Ø8,0 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0080.130	Broca Canulada Ø8,0 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0080.160	Broca Canulada Ø8,0 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0080.200	Broca Canulada Ø8,0 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI133.1008.003	Broca Ø0,8 com Stop 3 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1008.004	Broca Ø0,8 com Stop 4 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1008.005	Broca Ø0,8 com Stop 5 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1008.006	Broca Ø0,8 com Stop 6 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1008.007	Broca Ø0,8 com Stop 7 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1009.010	Broca Ø0,9 com Stop 10 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1009.003	Broca Ø0,9 com Stop 3 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1009.004	Broca Ø0,9 com Stop 4 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1009.005	Broca Ø0,9 com Stop 5 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1009.006	Broca Ø0,9 com Stop 6 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1009.007	Broca Ø0,9 com Stop 7 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0009.050	Broca Ø0,9 x 050 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0009.060	Broca Ø0,9 x 060 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0009.070	Broca Ø0,9 x 070 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0009.080	Broca Ø0,9 x 080 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0009.090	Broca Ø0,9 x 090 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0009.120	Broca Ø0,9 x 120 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1011.010	Broca Ø1,1 com Stop 10 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1011.015	Broca Ø1,1 com Stop 15 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1011.004	Broca Ø1,1 com Stop 4 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1011.005	Broca Ø1,1 com Stop 5 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1011.006	Broca Ø1,1 com Stop 6 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1011.008	Broca Ø1,1 com Stop 8 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0011.050	Broca Ø1,1 x 050 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0011.070	Broca Ø1,1 x 070 mm ES		Promover a perfuração óssea

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.0011.090	Broca Ø1,1 x 090 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0011.120	Broca Ø1,1 x 120 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1012.010	Broca Ø1,2 com Stop 10 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1012.015	Broca Ø1,2 com Stop 15 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1012.004	Broca Ø1,2 com Stop 4 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1012.005	Broca Ø1,2 com Stop 5 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1012.006	Broca Ø1,2 com Stop 6 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1012.008	Broca Ø1,2 com Stop 8 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0012.050	Broca Ø1,2 x 050 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0012.070	Broca Ø1,2 x 070 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0012.090	Broca Ø1,2 x 090 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0012.120	Broca Ø1,2 x 120 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1014.004	Broca Ø1,4 com Stop 04 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1014.006	Broca Ø1,4 com Stop 06 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1014.008	Broca Ø1,4 com Stop 08 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1014.010	Broca Ø1,4 com Stop 10 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1014.012	Broca Ø1,4 com Stop 12 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1014.015	Broca Ø1,4 com Stop 15 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1014.020	Broca Ø1,4 com Stop 20 mm ES	Promover a perfuração óssea	
TI133.0014.070	Broca Ø1,4 x 070 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0014.090	Broca Ø1,4 x 090 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0014.120	Broca Ø1,4 x 120 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0014.150	Broca Ø1,4 x 150 mm ES	Promover a perfuração óssea	
TI133.1018.010	Broca Ø1,8 com Stop 10 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1018.015	Broca Ø1,8 com Stop 15 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1018.020	Broca Ø1,8 com Stop 20 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.1018.025	Broca Ø1,8 com Stop 25 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0018.070	Broca Ø1,8 x 070 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0018.090	Broca Ø1,8 x 090 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0018.120	Broca Ø1,8 x 120 mm ES		Promover a perfuração óssea
TI133.0018.150	Broca Ø1,8 x 150 mm ES		Promover a perfuração óssea


Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0025.160	Broca Ø2,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.170	Broca Ø2,5 x 170 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.180	Broca Ø2,5 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.190	Broca Ø2,5 x 190 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.200	Broca Ø2,5 x 200 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.210	Broca Ø2,5 x 210 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.220	Broca Ø2,5 x 220 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.230	Broca Ø2,5 x 230 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.240	Broca Ø2,5 x 240 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.250	Broca Ø2,5 x 250 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.260	Broca Ø2,5 x 260 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.270	Broca Ø2,5 x 270 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.280	Broca Ø2,5 x 280 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.290	Broca Ø2,5 x 290 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.300	Broca Ø2,5 x 300 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.310	Broca Ø2,5 x 310 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.320	Broca Ø2,5 x 320 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.330	Broca Ø2,5 x 330 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.340	Broca Ø2,5 x 340 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.350	Broca Ø2,5 x 350 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.360	Broca Ø2,5 x 360 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.370	Broca Ø2,5 x 370 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.380	Broca Ø2,5 x 380 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.390	Broca Ø2,5 x 390 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0025.400	Broca Ø2,5 x 400 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.150	Broca Ø4,0 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.170	Broca Ø4,0 x 170 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.180	Broca Ø4,0 x 180 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.190	Broca Ø4,0 x 190 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.210	Broca Ø4,0 x 210 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.220	Broca Ø4,0 x 220 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.230	Broca Ø4,0 x 230 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.240	Broca Ø4,0 x 240 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0040.250	Broca Ø4,0 x 250 mm		Promover a perfuração óssea


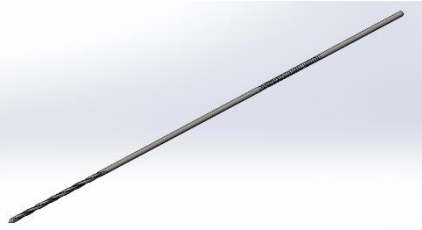
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI130.0040.260	Broca Ø4,0 x 260 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.270	Broca Ø4,0 x 270 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.280	Broca Ø4,0 x 280 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.290	Broca Ø4,0 x 290 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.300	Broca Ø4,0 x 300 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.310	Broca Ø4,0 x 310 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.320	Broca Ø4,0 x 320 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.330	Broca Ø4,0 x 330 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.340	Broca Ø4,0 x 340 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.350	Broca Ø4,0 x 350 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.360	Broca Ø4,0 x 360 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.370	Broca Ø4,0 x 370 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.380	Broca Ø4,0 x 380 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.390	Broca Ø4,0 x 390 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.400	Broca Ø4,0 x 400 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.410	Broca Ø4,0 x 410 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.420	Broca Ø4,0 x 420 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.430	Broca Ø4,0 x 430 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.440	Broca Ø4,0 x 440 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0040.450	Broca Ø4,0 x 450 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.150	Broca Ø4,2 x 150 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.170	Broca Ø4,2 x 170 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.180	Broca Ø4,2 x 180 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.190	Broca Ø4,2 x 190 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.210	Broca Ø4,2 x 210 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.220	Broca Ø4,2 x 220 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.230	Broca Ø4,2 x 230 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.240	Broca Ø4,2 x 240 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.250	Broca Ø4,2 x 250 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.260	Broca Ø4,2 x 260 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.270	Broca Ø4,2 x 270 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.280	Broca Ø4,2 x 280 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.290	Broca Ø4,2 x 290 mm	Promover a perfuração óssea
TI130.0042.300	Broca Ø4,2 x 300 mm	Promover a perfuração óssea

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0042.310	Broca Ø4,2 x 310 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.320	Broca Ø4,2 x 320 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.330	Broca Ø4,2 x 330 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.340	Broca Ø4,2 x 340 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.350	Broca Ø4,2 x 350 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.360	Broca Ø4,2 x 360 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.370	Broca Ø4,2 x 370 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.380	Broca Ø4,2 x 380 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.390	Broca Ø4,2 x 390 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.400	Broca Ø4,2 x 400 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.410	Broca Ø4,2 x 410 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.420	Broca Ø4,2 x 420 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.430	Broca Ø4,2 x 430 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.440	Broca Ø4,2 x 440 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.450	Broca Ø4,2 x 450 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.460	Broca Ø4,2 x 460 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.470	Broca Ø4,2 x 470 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.480	Broca Ø4,2 x 480 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.490	Broca Ø4,2 x 490 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.0042.500	Broca Ø4,2 x 500 mm		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.001	Broca Canulada Padrão Modelo 1		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.002	Broca Canulada Padrão Modelo 2		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.003	Broca Canulada Padrão Modelo 3		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.004	Broca Canulada Padrão Modelo 4		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.005	Broca Canulada Padrão Modelo 5		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.006	Broca Canulada Padrão Modelo 6		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.007	Broca Canulada Padrão Modelo 7		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.008	Broca Canulada Padrão Modelo 8		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.009	Broca Canulada Padrão Modelo 9		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.010	Broca Canulada Padrão Modelo 10		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.011	Broca Canulada Padrão Modelo 11		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.012	Broca Canulada Padrão Modelo 12		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.013	Broca Canulada Padrão Modelo 13		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.014	Broca Canulada Padrão Modelo 14		Promover a perfuração óssea

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.9998.015	Broca Canulada Padrão Modelo 15		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.016	Broca Canulada Padrão Modelo 16		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.017	Broca Canulada Padrão Modelo 17		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.018	Broca Canulada Padrão Modelo 18		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.019	Broca Canulada Padrão Modelo 19		Promover a perfuração óssea
TI130.9998.020	Broca Canulada Padrão Modelo 20		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.001	Broca Padrão Modelo 1		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.002	Broca Padrão Modelo 2		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.003	Broca Padrão Modelo 3		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.004	Broca Padrão Modelo 4		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.005	Broca Padrão Modelo 5		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.006	Broca Padrão Modelo 6		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.007	Broca Padrão Modelo 7		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.008	Broca Padrão Modelo 8		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.009	Broca Padrão Modelo 9		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.010	Broca Padrão Modelo 10		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.011	Broca Padrão Modelo 11		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.012	Broca Padrão Modelo 12		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.013	Broca Padrão Modelo 13		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.014	Broca Padrão Modelo 14		Promover a perfuração óssea
TI130.9999.015	Broca Padrão Modelo 15	Promover a perfuração óssea	
TI130.9999.016	Broca Padrão Modelo 16	Promover a perfuração óssea	
TI130.9999.017	Broca Padrão Modelo 17	Promover a perfuração óssea	
TI130.9999.018	Broca Padrão Modelo 18	Promover a perfuração óssea	
TI130.9999.019	Broca Padrão Modelo 19	Promover a perfuração óssea	
TI130.9999.020	Broca Padrão Modelo 20	Promover a perfuração óssea	
TI132.0025.100	Broca Graduada Ø2,5 x 100 mm		Promover a perfuração óssea
TI132.0025.110	Broca Graduada Ø2,5 x 110 mm		Promover a perfuração óssea
TI132.0025.120	Broca Graduada Ø2,5 x 120 mm		Promover a perfuração óssea
TI132.0025.130	Broca Graduada Ø2,5 x 130 mm		Promover a perfuração óssea
TI132.0025.140	Broca Graduada Ø2,5 x 140 mm		Promover a perfuração óssea
TI132.0025.150	Broca Graduada Ø2,5 x 150 mm		Promover a perfuração óssea
TI132.0025.160	Broca Graduada Ø2,5 x 160 mm		Promover a perfuração óssea
TI132.0025.170	Broca Graduada Ø2,5 x 170 mm		Promover a perfuração óssea

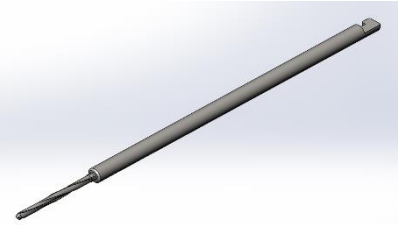
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI132.0025.180	Broca Graduada Ø2,5 x 180 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.190	Broca Graduada Ø2,5 x 190 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.200	Broca Graduada Ø2,5 x 200 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.210	Broca Graduada Ø2,5 x 210 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.220	Broca Graduada Ø2,5 x 220 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.230	Broca Graduada Ø2,5 x 230 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.240	Broca Graduada Ø2,5 x 240 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.250	Broca Graduada Ø2,5 x 250 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.260	Broca Graduada Ø2,5 x 260 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.270	Broca Graduada Ø2,5 x 270 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.280	Broca Graduada Ø2,5 x 280 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.290	Broca Graduada Ø2,5 x 290 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.300	Broca Graduada Ø2,5 x 300 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.310	Broca Graduada Ø2,5 x 310 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.320	Broca Graduada Ø2,5 x 320 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.330	Broca Graduada Ø2,5 x 330 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.340	Broca Graduada Ø2,5 x 340 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.350	Broca Graduada Ø2,5 x 350 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.360	Broca Graduada Ø2,5 x 360 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.370	Broca Graduada Ø2,5 x 370 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.380	Broca Graduada Ø2,5 x 380 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.390	Broca Graduada Ø2,5 x 390 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0025.400	Broca Graduada Ø2,5 x 400 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.150	Broca Graduada Ø4,0 x 150 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.160	Broca Graduada Ø4,0 x 160 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.170	Broca Graduada Ø4,0 x 170 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.180	Broca Graduada Ø4,0 x 180 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.190	Broca Graduada Ø4,0 x 190 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.200	Broca Graduada Ø4,0 x 200 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.210	Broca Graduada Ø4,0 x 210 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.220	Broca Graduada Ø4,0 x 220 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.230	Broca Graduada Ø4,0 x 230 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.240	Broca Graduada Ø4,0 x 240 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.250	Broca Graduada Ø4,0 x 250 mm	Promover a perfuração óssea



Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI132.0040.260	Broca Graduada Ø4,0 x 260 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.270	Broca Graduada Ø4,0 x 270 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.280	Broca Graduada Ø4,0 x 280 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.290	Broca Graduada Ø4,0 x 290 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.300	Broca Graduada Ø4,0 x 300 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.310	Broca Graduada Ø4,0 x 310 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.320	Broca Graduada Ø4,0 x 320 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.330	Broca Graduada Ø4,0 x 330 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.340	Broca Graduada Ø4,0 x 340 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.350	Broca Graduada Ø4,0 x 350 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.360	Broca Graduada Ø4,0 x 360 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.370	Broca Graduada Ø4,0 x 370 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.380	Broca Graduada Ø4,0 x 380 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.390	Broca Graduada Ø4,0 x 390 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0040.400	Broca Graduada Ø4,0 x 400 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.250	Broca Graduada Ø4,2 x 250 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.260	Broca Graduada Ø4,2 x 260 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.270	Broca Graduada Ø4,2 x 270 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.280	Broca Graduada Ø4,2 x 280 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.290	Broca Graduada Ø4,2 x 290 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.300	Broca Graduada Ø4,2 x 300 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.310	Broca Graduada Ø4,2 x 310 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.320	Broca Graduada Ø4,2 x 320 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.330	Broca Graduada Ø4,2 x 330 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.340	Broca Graduada Ø4,2 x 340 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.350	Broca Graduada Ø4,2 x 350 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.360	Broca Graduada Ø4,2 x 360 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.370	Broca Graduada Ø4,2 x 370 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.380	Broca Graduada Ø4,2 x 380 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.390	Broca Graduada Ø4,2 x 390 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.400	Broca Graduada Ø4,2 x 400 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.410	Broca Graduada Ø4,2 x 410 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.420	Broca Graduada Ø4,2 x 420 mm	Promover a perfuração óssea
TI132.0042.430	Broca Graduada Ø4,2 x 430 mm	Promover a perfuração óssea






Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI132.0042.440	Broca Graduada Ø4,2 x 440 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.450	Broca Graduada Ø4,2 x 450 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.460	Broca Graduada Ø4,2 x 460 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.470	Broca Graduada Ø4,2 x 470 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.480	Broca Graduada Ø4,2 x 480 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.490	Broca Graduada Ø4,2 x 490 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.500	Broca Graduada Ø4,2 x 500 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.510	Broca Graduada Ø4,2 x 510 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.520	Broca Graduada Ø4,2 x 520 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.530	Broca Graduada Ø4,2 x 530 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.540	Broca Graduada Ø4,2 x 540 mm		Promover a perfuração óssea	
TI132.0042.550	Broca Graduada Ø4,2 x 550 mm		Promover a perfuração óssea	
TI133.0015.070	Broca Ø1,5 x 070 mm ES			Promover a perfuração óssea
TI133.0015.090	Broca Ø1,5 x 090 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.0015.120	Broca Ø1,5 x 120 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.0015.150	Broca Ø1,5 x 150 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.0020.070	Broca Ø2,0 x 070 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.0020.090	Broca Ø2,0 x 090 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.0020.100	Broca Ø2,0 x 100 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.0020.120	Broca Ø2,0 x 120 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.0020.150	Broca Ø2,0 x 150 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.1015.005	Broca Ø1,5 com Stop 05 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.1015.010	Broca Ø1,5 com Stop 10 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.1015.015	Broca Ø1,5 com Stop 15 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.1015.020	Broca Ø1,5 com Stop 20 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.1020.010	Broca Ø2,0 com Stop 10 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.1020.015	Broca Ø2,0 com Stop 15 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.1020.020	Broca Ø2,0 com Stop 20 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI133.1020.025	Broca Ø2,0 com Stop 25 mm ES	Promover a perfuração óssea		
TI131.0067.100	Broca Canulada Ø6,7 x 100mm			Promover a perfuração óssea
TI131.0067.110	Broca Canulada Ø6,7 x 110mm			Promover a perfuração óssea
TI131.0067.120	Broca Canulada Ø6,7 x 120mm			Promover a perfuração óssea
TI131.0067.130	Broca Canulada Ø6,7 x 130mm		Promover a perfuração óssea	
TI131.0067.140	Broca Canulada Ø6,7 x 140mm		Promover a perfuração óssea	













Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0067.150	Broca Canulada Ø6,7 x 150mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.160	Broca Canulada Ø6,7 x 160mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.170	Broca Canulada Ø6,7 x 170mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.180	Broca Canulada Ø6,7 x 180mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.190	Broca Canulada Ø6,7 x 190mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.200	Broca Canulada Ø6,7 x 200mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.210	Broca Canulada Ø6,7 x 210mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.220	Broca Canulada Ø6,7 x 220mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.230	Broca Canulada Ø6,7 x 230mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.240	Broca Canulada Ø6,7 x 240mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.250	Broca Canulada Ø6,7 x 250mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.260	Broca Canulada Ø6,7 x 260mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.270	Broca Canulada Ø6,7 x 270mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.280	Broca Canulada Ø6,7 x 280mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.290	Broca Canulada Ø6,7 x 290mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.300	Broca Canulada Ø6,7 x 300mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.310	Broca Canulada Ø6,7 x 310mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.320	Broca Canulada Ø6,7 x 320mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.330	Broca Canulada Ø6,7 x 330mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.340	Broca Canulada Ø6,7 x 340mm		Promover a perfuração óssea
TI131.0067.350	Broca Canulada Ø6,7 x 350mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0067.360	Broca Canulada Ø6,7 x 360mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0067.370	Broca Canulada Ø6,7 x 370mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0067.380	Broca Canulada Ø6,7 x 380mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0067.390	Broca Canulada Ø6,7 x 390mm	Promover a perfuração óssea	
TI131.0067.400	Broca Canulada Ø6,7 x 400mm	Promover a perfuração óssea	
TI122.0020.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 10 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0020.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 15 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0020.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 20 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0020.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 25 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0020.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,0 x 30 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0025.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 10 x 50mm		Fixação temporária da placa














Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI122.0025.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 15 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0025.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 20 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0025.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 25 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0025.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø2,5 x 30 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0030.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 10 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0030.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 15 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0030.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 20 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0030.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 25 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.0030.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Ø3,0 x 30 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2020.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 10 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2020.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 15 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2020.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 20 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2020.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 25 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2020.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,0 x 30 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2025.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 10 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2025.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 15 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2025.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 20 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2025.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 25 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2025.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø2,5 x 30 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2030.010	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 10 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2030.015	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 15 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2030.020	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 20 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2030.025	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 25 x 50mm		Fixação temporária da placa
TI122.2030.030	Fio Guia Não Implantável Olivado Roscado Ø3,0 x 30 x 50mm		Fixação temporária da placa







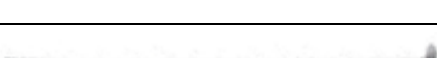








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI270.1035.001	MACHO CORTICAL Ø3,5 MM MODELO 1		Pré-furação roscada
TI135.0030.180	BROCA GRADUADA CANULADA Ø3,0 X 180 MM		Perfurar osso
TI135.0040.220	BROCA GRADUADA CANULADA Ø4,0 X 220 MM		Perfurar osso
TI130.0000.009	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - MINI		Perfurar osso
TI130.0000.013	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - MINI		Perfurar osso
TI130.0000.015	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - MINI		Perfurar osso
TI130.0000.021	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - MINI		Perfurar osso
TI130.0000.024	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - MINI		Perfurar osso
TI130.0000.029	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - MINI		Perfurar osso
TI130.0000.109	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - CURTA		Perfurar osso
TI130.0000.113	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - CURTA		Perfurar osso
TI130.0000.115	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - CURTA		Perfurar osso













Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0000.121	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - CURTA		Perfurar osso
TI130.0000.124	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - CURTA		Perfurar osso
TI130.0000.129	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - CURTA		Perfurar osso
TI130.0000.209	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - STD		Perfurar osso
TI130.0000.213	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - STD		Perfurar osso
TI130.0000.215	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - STD		Perfurar osso
TI130.0000.221	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - STD		Perfurar osso
TI130.0000.224	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - STD		Perfurar osso
TI130.0000.229	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - STD		Perfurar osso
TI130.0000.309	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø0,9MM - LONGA		Perfurar osso
TI130.0000.313	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,3MM - LONGA		Perfurar osso
TI130.0000.315	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,5MM - LONGA		Perfurar osso
TI130.0000.321	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,1MM - LONGA		Perfurar osso







Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI130.0000.324	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,4MM - LONGA		Perfurar osso
TI130.0000.329	BROCA PARA ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,9MM - LONGA		Perfurar osso
TI131.2000.009	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø0,9		Perfurar osso
TI131.2000.013	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø1,3		Perfurar osso
TI131.2000.015	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø1,5		Perfurar osso
TI131.2000.021	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,1		Perfurar osso
TI131.2000.024	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,4		Perfurar osso
TI131.2000.029	BROCA CENTRALIZADORA DE PROTEÇÃO Ø2,9		Perfurar osso
TI130.0037.110	BROCA Ø3,7 X 110 MM		Perfurar osso
TI130.0037.120	BROCA Ø3,7 X 120 MM		Perfurar osso
TI130.0037.140	BROCA Ø3,7 X 140 MM		Perfurar osso
TI130.0037.150	BROCA Ø3,7 X 150 MM		Perfurar osso
TI130.0037.170	BROCA Ø3,7 X 170 MM		Perfurar osso
TI130.0037.190	BROCA Ø3,7 X 190 MM		Perfurar osso
TI131.0037.110	BROCA CANULADA Ø3,7 X 110MM		Perfurar osso



Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0037.120	BROCA CANULADA Ø3,7 X 120MM		Perfurar osso
TI131.0037.140	BROCA CANULADA Ø3,7 X 140MM		Perfurar osso
TI131.0037.150	BROCA CANULADA Ø3,7 X 150MM		Perfurar osso
TI131.0037.170	BROCA CANULADA Ø3,7 X 170MM		Perfurar osso
TI131.0037.190	BROCA CANULADA Ø3,7 X 190MM		Perfurar osso
TI131.0053.100	BROCA CANULADA Ø5,3 X 100 MM		Perfurar osso
TI131.0053.120	BROCA CANULADA Ø5,3 X 120 MM		Perfurar osso
TI131.0053.140	BROCA CANULADA Ø5,3 X 140 MM		Perfurar osso
TI131.0053.160	BROCA CANULADA Ø5,3 X 160 MM		Perfurar osso
TI131.0053.200	BROCA CANULADA Ø5,3 X 200 MM		Perfurar osso
TI131.0053.220	BROCA CANULADA Ø5,3 X 220 MM		Perfurar osso
TI131.0053.240	BROCA CANULADA Ø5,3 X 240 MM		Perfurar osso


Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0053.260	BROCA CANULADA Ø5,3 X 260 MM		Perfurar osso
TI131.0053.280	BROCA CANULADA Ø5,3 X 280 MM		Perfurar osso
TI131.0053.300	BROCA CANULADA Ø5,3 X 300 MM		Perfurar osso
TI172.0000.001	SONDA PONTA TIPO GANCHO 3,4MM MARCAÇÕES DE 5MM		DESLOCAMENTO ÓSSEO
TI131.0080.120	BROCA CANULADA Ø8,0 X 120 MM		Perfurar osso
TI131.0080.150	BROCA CANULADA Ø8,0 X 150 MM		Perfurar osso
TI131.0080.180	BROCA CANULADA Ø8,0 X 180 MM		Perfurar osso
TI131.0080.220	BROCA CANULADA Ø8,0 X 220 MM		Perfurar osso
TI131.0080.240	BROCA CANULADA Ø8,0 X 240 MM		Perfurar osso
TI131.0080.260	BROCA CANULADA Ø8,0 X 260 MM		Perfurar osso
TI131.0080.280	BROCA CANULADA Ø8,0 X 280 MM		Perfurar osso
TI131.0080.300	BROCA CANULADA Ø8,0 X 300 MM		Perfurar osso
TI131.0090.100	BROCA CANULADA Ø9,0 X 100 MM		
TI131.0090.110	BROCA CANULADA Ø9,0 X 110 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.120	BROCA CANULADA Ø9,0 X 120 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.130	BROCA CANULADA Ø9,0 X 130 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.140	BROCA CANULADA Ø9,0 X 140 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.150	BROCA CANULADA Ø9,0 X 150 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.160	BROCA CANULADA Ø9,0 X 160 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.170	BROCA CANULADA Ø9,0 X 170 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.180	BROCA CANULADA Ø9,0 X 180 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.190	BROCA CANULADA Ø9,0 X 190 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.200	BROCA CANULADA Ø9,0 X 200 MM	Perfurar osso	
TI131.0090.210	BROCA CANULADA Ø9,0 X 210 MM	Perfurar osso	




Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0090.220	BROCA CANULADA Ø9,0 X 220 MM		Perfurar osso
TI131.0090.230	BROCA CANULADA Ø9,0 X 230 MM		Perfurar osso
TI131.0090.240	BROCA CANULADA Ø9,0 X 240 MM		Perfurar osso
TI131.0090.250	BROCA CANULADA Ø9,0 X 250 MM		Perfurar osso
TI131.0090.260	BROCA CANULADA Ø9,0 X 260 MM		Perfurar osso
TI131.0090.270	BROCA CANULADA Ø9,0 X 270 MM		Perfurar osso
TI131.0090.280	BROCA CANULADA Ø9,0 X 280 MM		Perfurar osso
TI131.0090.290	BROCA CANULADA Ø9,0 X 290 MM		Perfurar osso
TI131.0090.300	BROCA CANULADA Ø9,0 X 300 MM		Perfurar osso
TI131.0100.100	BROCA CANULADA Ø10,0 X 100 MM		Perfurar osso
TI131.0100.110	BROCA CANULADA Ø10,0 X 110 MM		Perfurar osso
TI131.0100.120	BROCA CANULADA Ø10,0 X 120 MM		Perfurar osso
TI131.0100.130	BROCA CANULADA Ø10,0 X 130 MM		Perfurar osso
TI131.0100.140	BROCA CANULADA Ø10,0 X 140 MM		Perfurar osso
TI131.0100.150	BROCA CANULADA Ø10,0 X 150 MM		Perfurar osso
TI131.0100.160	BROCA CANULADA Ø10,0 X 160 MM		Perfurar osso
TI131.0100.170	BROCA CANULADA Ø10,0 X 170 MM		Perfurar osso
TI131.0100.180	BROCA CANULADA Ø10,0 X 180 MM		Perfurar osso
TI131.0100.190	BROCA CANULADA Ø10,0 X 190 MM		Perfurar osso
TI131.0100.200	BROCA CANULADA Ø10,0 X 200 MM		Perfurar osso
TI131.0100.210	BROCA CANULADA Ø10,0 X 210 MM		Perfurar osso
TI131.0100.220	BROCA CANULADA Ø10,0 X 220 MM		Perfurar osso
TI131.0100.230	BROCA CANULADA Ø10,0 X 230 MM		Perfurar osso
TI131.0100.240	BROCA CANULADA Ø10,0 X 240 MM		Perfurar osso
TI131.0100.250	BROCA CANULADA Ø10,0 X 250 MM		Perfurar osso
TI131.0100.260	BROCA CANULADA Ø10,0 X 260 MM		Perfurar osso
TI131.0100.270	BROCA CANULADA Ø10,0 X 270 MM		Perfurar osso
TI131.0100.280	BROCA CANULADA Ø10,0 X 280 MM		Perfurar osso
TI131.0100.290	BROCA CANULADA Ø10,0 X 290 MM		Perfurar osso
TI131.0100.300	BROCA CANULADA Ø10,0 X 300 MM	Perfurar osso	
TI131.0110.100	BROCA CANULADA Ø11,0 X 100 MM		Perfurar osso
TI131.0110.110	BROCA CANULADA Ø11,0 X 110 MM		Perfurar osso
TI131.0110.120	BROCA CANULADA Ø11,0 X 120 MM		Perfurar osso
TI131.0110.130	BROCA CANULADA Ø11,0 X 130 MM		Perfurar osso


Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0110.140	BROCA CANULADA Ø11,0 X 140 MM		Perfurar osso
TI131.0110.150	BROCA CANULADA Ø11,0 X 150 MM		Perfurar osso
TI131.0110.160	BROCA CANULADA Ø11,0 X 160 MM		Perfurar osso
TI131.0110.170	BROCA CANULADA Ø11,0 X 170 MM		Perfurar osso
TI131.0110.180	BROCA CANULADA Ø11,0 X 180 MM		Perfurar osso
TI131.0110.190	BROCA CANULADA Ø11,0 X 190 MM		Perfurar osso
TI131.0110.200	BROCA CANULADA Ø11,0 X 200 MM		Perfurar osso
TI131.0110.210	BROCA CANULADA Ø11,0 X 210 MM		Perfurar osso
TI131.0110.220	BROCA CANULADA Ø11,0 X 220 MM		Perfurar osso
TI131.0110.230	BROCA CANULADA Ø11,0 X 230 MM		Perfurar osso
TI131.0110.240	BROCA CANULADA Ø11,0 X 240 MM		Perfurar osso
TI131.0110.250	BROCA CANULADA Ø11,0 X 250 MM		Perfurar osso
TI131.0110.260	BROCA CANULADA Ø11,0 X 260 MM		Perfurar osso
TI131.0110.270	BROCA CANULADA Ø11,0 X 270 MM		Perfurar osso
TI131.0110.280	BROCA CANULADA Ø11,0 X 280 MM		Perfurar osso
TI131.0110.290	BROCA CANULADA Ø11,0 X 290 MM		Perfurar osso
TI131.0110.300	BROCA CANULADA Ø11,0 X 300 MM		Perfurar osso
TI380.0080.100	FRESA CANULADA Ø8,0 X 100 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.110	FRESA CANULADA Ø8,0 X 110 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.120	FRESA CANULADA Ø8,0 X 120 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.130	FRESA CANULADA Ø8,0 X 130 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.140	FRESA CANULADA Ø8,0 X 140 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.150	FRESA CANULADA Ø8,0 X 150 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.160	FRESA CANULADA Ø8,0 X 160 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.170	FRESA CANULADA Ø8,0 X 170 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.180	FRESA CANULADA Ø8,0 X 180 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.190	FRESA CANULADA Ø8,0 X 190 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.200	FRESA CANULADA Ø8,0 X 200 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.210	FRESA CANULADA Ø8,0 X 210 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.220	FRESA CANULADA Ø8,0 X 220 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0080.230	FRESA CANULADA Ø8,0 X 230 MM	Perfurar e Fresar osso	
TI380.0080.240	FRESA CANULADA Ø8,0 X 240 MM	Perfurar e Fresar osso	
TI380.0080.250	FRESA CANULADA Ø8,0 X 250 MM	Perfurar e Fresar osso	
TI380.0080.260	FRESA CANULADA Ø8,0 X 260 MM	Perfurar e Fresar osso	









Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI380.0080.270	FRESA CANULADA Ø8,0 X 270 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0080.280	FRESA CANULADA Ø8,0 X 280 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0080.290	FRESA CANULADA Ø8,0 X 290 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0080.300	FRESA CANULADA Ø8,0 X 300 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0090.100	FRESA CANULADA Ø9,0 X 100 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.110	FRESA CANULADA Ø9,0 X 110 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.120	FRESA CANULADA Ø9,0 X 120 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.130	FRESA CANULADA Ø9,0 X 130 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.140	FRESA CANULADA Ø9,0 X 140 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.150	FRESA CANULADA Ø9,0 X 150 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.160	FRESA CANULADA Ø9,0 X 160 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.170	FRESA CANULADA Ø9,0 X 170 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.180	FRESA CANULADA Ø9,0 X 180 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.190	FRESA CANULADA Ø9,0 X 190 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.200	FRESA CANULADA Ø9,0 X 200 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.210	FRESA CANULADA Ø9,0 X 210 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.220	FRESA CANULADA Ø9,0 X 220 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.230	FRESA CANULADA Ø9,0 X 230 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.240	FRESA CANULADA Ø9,0 X 240 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.250	FRESA CANULADA Ø9,0 X 250 MM			Perfurar e Fresar osso
TI380.0090.260	FRESA CANULADA Ø9,0 X 260 MM	Perfurar e Fresar osso		
TI380.0090.270	FRESA CANULADA Ø9,0 X 270 MM	Perfurar e Fresar osso		
TI380.0090.280	FRESA CANULADA Ø9,0 X 280 MM	Perfurar e Fresar osso		
TI380.0090.290	FRESA CANULADA Ø9,0 X 290 MM	Perfurar e Fresar osso		
TI380.0090.300	FRESA CANULADA Ø9,0 X 300 MM	Perfurar e Fresar osso		
TI380.0100.100	FRESA CANULADA Ø10,0 X 100 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0100.110	FRESA CANULADA Ø10,0 X 110 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0100.120	FRESA CANULADA Ø10,0 X 120 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0100.130	FRESA CANULADA Ø10,0 X 130 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0100.140	FRESA CANULADA Ø10,0 X 140 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0100.150	FRESA CANULADA Ø10,0 X 150 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0100.160	FRESA CANULADA Ø10,0 X 160 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0100.170	FRESA CANULADA Ø10,0 X 170 MM		Perfurar e Fresar osso	
TI380.0100.180	FRESA CANULADA Ø10,0 X 180 MM		Perfurar e Fresar osso	








Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI380.0100.190	FRESA CANULADA Ø10,0 X 190 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.200	FRESA CANULADA Ø10,0 X 200 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.210	FRESA CANULADA Ø10,0 X 210 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.220	FRESA CANULADA Ø10,0 X 220 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.230	FRESA CANULADA Ø10,0 X 230 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.240	FRESA CANULADA Ø10,0 X 240 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.250	FRESA CANULADA Ø10,0 X 250 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.260	FRESA CANULADA Ø10,0 X 260 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.270	FRESA CANULADA Ø10,0 X 270 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.280	FRESA CANULADA Ø10,0 X 280 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.290	FRESA CANULADA Ø10,0 X 290 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0100.300	FRESA CANULADA Ø10,0 X 300 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.100	FRESA CANULADA Ø11,0 X 100 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.110	FRESA CANULADA Ø11,0 X 110 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.120	FRESA CANULADA Ø11,0 X 120 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.130	FRESA CANULADA Ø11,0 X 130 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.140	FRESA CANULADA Ø11,0 X 140 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.150	FRESA CANULADA Ø11,0 X 150 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.160	FRESA CANULADA Ø11,0 X 160 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.170	FRESA CANULADA Ø11,0 X 170 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.180	FRESA CANULADA Ø11,0 X 180 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.190	FRESA CANULADA Ø11,0 X 190 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.200	FRESA CANULADA Ø11,0 X 200 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.210	FRESA CANULADA Ø11,0 X 210 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.220	FRESA CANULADA Ø11,0 X 220 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.230	FRESA CANULADA Ø11,0 X 230 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.240	FRESA CANULADA Ø11,0 X 240 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.250	FRESA CANULADA Ø11,0 X 250 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.260	FRESA CANULADA Ø11,0 X 260 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.270	FRESA CANULADA Ø11,0 X 270 MM		Perfurar e Fresar osso
TI380.0110.280	FRESA CANULADA Ø11,0 X 280 MM	Perfurar e Fresar osso	
TI380.0110.290	FRESA CANULADA Ø11,0 X 290 MM	Perfurar e Fresar osso	
TI380.0110.300	FRESA CANULADA Ø11,0 X 300 MM	Perfurar e Fresar osso	


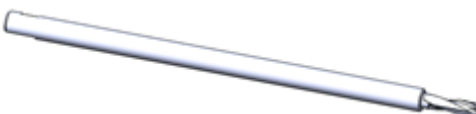


Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI136.0000.060	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø6,0 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.065	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø6,5 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.070	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø7,0 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.075	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø7,5 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.080	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø8,0 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.085	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø8,5 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.090	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø9,0 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.095	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø9,5 MM		Perfurar Osso




Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI136.0000.100	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø10,0 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.105	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø10,5 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.110	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø11,0 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.115	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø11,5 MM		Perfurar Osso
TI136.0000.120	BROCA AJUSTAVEL TECHFLIP - Ø12,0 MM		Perfurar Osso
TI310.0000.005	PINO DE GUIA DE BROCA OFFSET 3,5 MM		Guiar pinos para Furação
TI154.0018.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 60MM		Perfurar Osso
TI154.0018.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 70MM		Perfurar Osso
TI154.0018.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 80MM		Perfurar Osso
TI154.0018.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 90MM		Perfurar Osso
TI154.0018.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 100MM		Perfurar Osso
TI154.0018.110	ESCAREADOR CANULADO PARA		Perfurar Osso



Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	PARAFUSO Ø1,8 x 110MM		
TI154.0018.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 120MM		Perfurar Osso
TI154.0027.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 60MM		Perfurar Osso
TI154.0027.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 70MM		Perfurar Osso
TI154.0027.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 80MM		Perfurar Osso
TI154.0027.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 90MM		Perfurar Osso
TI154.0027.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 100MM		Perfurar Osso
TI154.0027.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 110MM		Perfurar Osso
TI154.0027.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,7 x 120MM		Perfurar Osso
TI131.0019.060	BROCA CANULADA Ø1,9 X 60 MM		
TI131.0019.080	BROCA CANULADA Ø1,9 X 80 MM	Perfurar Osso	
TI131.0019.100	BROCA CANULADA Ø1,9 X 100 MM	Perfurar Osso	
TI131.0019.120	BROCA CANULADA Ø1,9 X 120 MM	Perfurar Osso	
TI131.0019.140	BROCA CANULADA Ø1,9 X 140 MM	Perfurar Osso	
TI131.0019.160	BROCA CANULADA Ø1,9 X 160 MM	Perfurar Osso	
TI154.0031.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 60MM		Perfurar Osso
TI154.0031.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 70MM		Perfurar Osso
TI154.0031.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 80MM		Perfurar Osso
TI154.0031.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 90MM		Perfurar Osso
TI154.0031.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 100MM		Perfurar Osso
TI154.0031.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 110MM		Perfurar Osso
TI154.0031.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,1 x 120MM		Perfurar Osso
TI131.0030.070	BROCA CANULADA Ø3,0 X 70 MM		Perfurar Osso
TI131.0030.090	BROCA CANULADA Ø3,0 X 90 MM		Perfurar Osso
TI131.0030.110	BROCA CANULADA Ø3,0 X 110 MM		Perfurar Osso

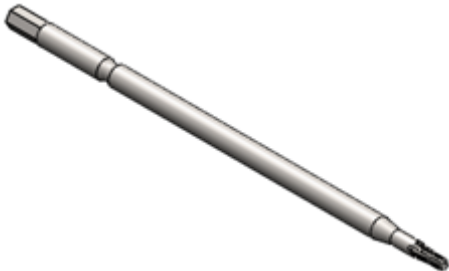
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0030.120	BROCA CANULADA Ø3,0 X 120 MM		Perfurar Osso
TI131.0030.140	BROCA CANULADA Ø3,0 X 140 MM		Perfurar Osso
TI131.0030.150	BROCA CANULADA Ø3,0 X 150 MM		Perfurar Osso
TI131.0031.070	BROCA CANULADA Ø3,1 X 70 MM		Perfurar Osso
TI131.0031.090	BROCA CANULADA Ø3,1 X 90 MM		Perfurar Osso
TI131.0031.110	BROCA CANULADA Ø3,1 X 110 MM		Perfurar Osso
TI131.0031.120	BROCA CANULADA Ø3,1 X 120 MM		Perfurar Osso
TI131.0031.140	BROCA CANULADA Ø3,1 X 140 MM		Perfurar Osso
TI131.0031.150	BROCA CANULADA Ø3,1 X 150 MM		Perfurar Osso
TI154.0042.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 60MM		Perfurar Osso
TI154.0042.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 70MM		Perfurar Osso
TI154.0042.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 80MM		Perfurar Osso
TI154.0042.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 90MM		Perfurar Osso
TI154.0042.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 100MM		Perfurar Osso
TI154.0042.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 110MM		Perfurar Osso
TI154.0042.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 120MM		Perfurar Osso
TI154.0042.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 130MM		Perfurar Osso
TI154.0042.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 140MM		Perfurar Osso
TI154.0042.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 150MM		Perfurar Osso
TI154.0042.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 160MM		Perfurar Osso
TI154.0042.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 170MM		Perfurar Osso
TI154.0042.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø4,2 x 180MM		Perfurar Osso
TI154.0062.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 60MM		
TI154.0062.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 70MM	Perfurar Osso	

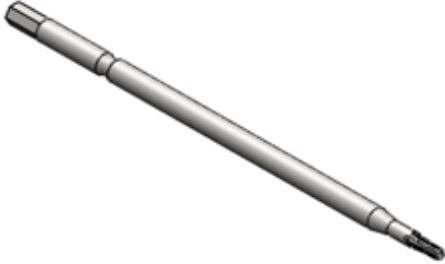
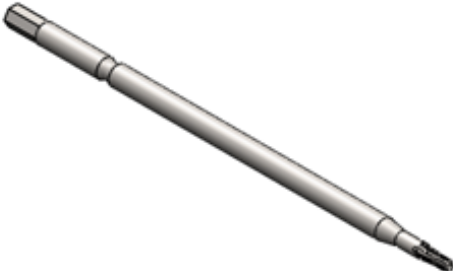
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

TI154.0062.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 80MM		Perfurar Osso
TI154.0062.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 90MM		Perfurar Osso
TI154.0062.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 100MM		Perfurar Osso
TI154.0062.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 110MM		Perfurar Osso
TI154.0062.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 120MM		Perfurar Osso
TI154.0062.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 130MM		Perfurar Osso
TI154.0062.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 140MM		Perfurar Osso
TI154.0062.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 150MM		Perfurar Osso
TI154.0062.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 160MM		Perfurar Osso
TI154.0062.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 170MM		Perfurar Osso
TI154.0062.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø6,2 x 180MM		Perfurar Osso
TI131.0042.070	BROCA CANULADA Ø4,2 X 70 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.080	BROCA CANULADA Ø4,2 X 80 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.090	BROCA CANULADA Ø4,2 X 90 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.110	BROCA CANULADA Ø4,2 X 110 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.120	BROCA CANULADA Ø4,2 X 120 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.140	BROCA CANULADA Ø4,2 X 140 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.150	BROCA CANULADA Ø4,2 X 150 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.170	BROCA CANULADA Ø4,2 X 170 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.180	BROCA CANULADA Ø4,2 X 180 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.190	BROCA CANULADA Ø4,2 X 190 MM		Perfurar Osso
TI131.0042.210	BROCA CANULADA Ø4,2 X 210 MM		
TI131.0042.220	BROCA CANULADA Ø4,2 X 220 MM	Perfurar osso	
TI131.0042.230	BROCA CANULADA Ø4,2 X 230 MM	Perfurar osso	
TI131.0042.240	BROCA CANULADA Ø4,2 X 240 MM	Perfurar osso	
TI131.0042.250	BROCA CANULADA Ø4,2 X 250 MM	Perfurar osso	

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI131.0042.260	BROCA CANULADA Ø4,2 X 260 MM		Perfurar osso
TI131.0042.270	BROCA CANULADA Ø4,2 X 270 MM		Perfurar osso
TI131.0042.280	BROCA CANULADA Ø4,2 X 280 MM		Perfurar osso
TI131.0042.290	BROCA CANULADA Ø4,2 X 290 MM		Perfurar osso
TI131.0042.300	BROCA CANULADA Ø4,2 X 300 MM		Perfurar osso
TI154.2017.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 50MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2017.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 60MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2017.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 70MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2017.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 80MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2017.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 90MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2017.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 100MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2017.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 110MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2017.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 120MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2018.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 50MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2018.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 60MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2018.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 70MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2018.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 80MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2018.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 90MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2018.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 100MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2018.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 110MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2018.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø1,8 x 120MM (ES)		Perfurar osso

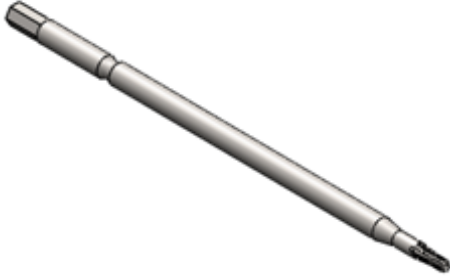
Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI154.0029.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 50MM		Perfurar osso
TI154.0029.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 60MM		Perfurar osso
TI154.0029.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 70MM		Perfurar osso
TI154.0029.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 80MM		Perfurar osso
TI154.0029.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 90MM		Perfurar osso
TI154.0029.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 100MM		Perfurar osso
TI154.0029.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 110MM		Perfurar osso
TI154.0029.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 120MM		Perfurar osso
TI154.0029.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 130MM		Perfurar osso
TI154.0029.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 140 MM		Perfurar osso
TI154.0029.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 150MM		Perfurar osso
TI154.0029.160	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 160MM		Perfurar osso
TI154.0029.170	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 170MM		Perfurar osso
TI154.0029.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 180MM		Perfurar osso
TI154.0029.190	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 190MM		Perfurar osso
TI154.0029.200	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,9 x 200MM	Perfurar osso	
TI154.2021.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 50MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2021.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 60MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2021.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 70MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2021.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 80MM		Perfurar osso




Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	(ES)		
TI154.2021.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 90MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2021.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 100MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2021.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 110MM (ES)		Perfurar osso
TI154.2021.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,1 x 120MM (ES)		Perfurar osso
TI154.0025.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 50MM		Perfurar osso
TI154.0025.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 60MM		Perfurar osso
TI154.0025.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 70MM		Perfurar osso
TI154.0025.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 80MM		Perfurar osso
TI154.0025.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 90MM		Perfurar osso
TI154.0025.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 100MM		Perfurar osso
TI154.0025.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 110MM		Perfurar osso
TI154.0025.120	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 120MM		Perfurar osso
TI154.0025.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø2,5 x 150MM		Perfurar osso
TI154.0035.050	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 50MM		Perfurar osso
TI154.0035.060	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 60MM		Perfurar osso
TI154.0035.070	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 70MM		Perfurar osso
TI154.0035.080	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 80MM		Perfurar osso
TI154.0035.090	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 90MM		Perfurar osso
TI154.0035.100	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 100MM		Perfurar osso
TI154.0035.110	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 110MM		Perfurar osso
TI154.0035.120	ESCAREADOR CANULADO PARA	Perfurar osso	







Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

	PARAFUSO Ø3,5 x 120MM			
TI154.0035.130	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 130MM		Perfurar osso	
TI154.0035.140	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 140MM		Perfurar osso	
TI154.0035.150	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 150MM		Perfurar osso	
TI154.0035.180	ESCAREADOR CANULADO PARA PARAFUSO Ø3,5 x 180MM		Perfurar osso	
TI154.3017.050	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 50MM (ES)		Perfurar osso	
TI154.3017.060	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 60MM (ES)		Perfurar osso	
TI154.3017.070	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 70MM (ES)		Perfurar osso	
TI154.3017.080	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 80MM (ES)		Perfurar osso	
TI154.3017.090	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 90MM (ES)		Perfurar osso	
TI154.3017.100	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 100MM (ES)		Perfurar osso	
TI154.3017.110	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 110MM (ES)		Perfurar osso	
TI154.3017.120	ESCAREADOR CANULADO GRADUADO PARA PARAFUSO Ø1,7 x 120MM (ES)		Perfurar osso	
TI150.2020.050	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 050MM			Perfurar osso
TI150.2020.060	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 060MM			Perfurar osso
TI150.2020.070	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 070MM	Perfurar osso		
TI150.2020.080	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 080MM	Perfurar osso		
TI150.2020.090	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 090MM	Perfurar osso		
TI150.2020.100	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 100MM	Perfurar osso		
TI150.2020.110	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 110MM	Perfurar osso		
TI150.2020.120	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 120MM	Perfurar osso		




















Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI150.2020.130	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 130MM		Perfurar osso
TI150.2020.140	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 140MM		Perfurar osso
TI150.2020.150	ESCAREADOR PARA PARAFUSO Ø2,0 x 150MM		Perfurar osso
TI130.1012.050	BROCA Ø1,2 X 050 MM		Perfurar osso
TI130.1012.060	BROCA Ø1,2 X 060 MM		Perfurar osso
TI130.1012.070	BROCA Ø1,2 X 070 MM		Perfurar osso
TI130.1012.080	BROCA Ø1,2 X 080 MM		Perfurar osso
TI130.1012.090	BROCA Ø1,2 X 090 MM		Perfurar osso
TI130.1012.100	BROCA Ø1,2 X 100 MM		Perfurar osso
TI130.1012.110	BROCA Ø1,2 X 110 MM		Perfurar osso
TI130.1012.120	BROCA Ø1,2 X 120 MM		Perfurar osso
TI130.1012.130	BROCA Ø1,2 X 130 MM		Perfurar osso
TI130.1012.140	BROCA Ø1,2 X 140 MM		Perfurar osso
TI130.1012.150	BROCA Ø1,2 X 150 MM		Perfurar osso
TI130.1015.050	BROCA Ø1,5 X 050 MM		
TI130.1015.060	BROCA Ø1,5 X 060 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.070	BROCA Ø1,5 X 070 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.080	BROCA Ø1,5 X 080 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.090	BROCA Ø1,5 X 090 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.100	BROCA Ø1,5 X 100 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.110	BROCA Ø1,5 X 110 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.120	BROCA Ø1,5 X 120 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.130	BROCA Ø1,5 X 130 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.140	BROCA Ø1,5 X 140 MM	Perfurar osso	
TI130.1015.150	BROCA Ø1,5 X 150 MM	Perfurar osso	
TI132.0020.100	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 100 MM		
TI132.0020.110	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 110 MM		Perfurar osso
TI132.0020.120	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 120 MM		Perfurar osso
TI132.0020.130	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 130 MM		Perfurar osso
TI132.0020.140	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 140 MM		Perfurar osso
TI132.0020.150	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 150 MM		Perfurar osso
TI132.0020.160	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 160 MM		Perfurar osso
TI132.0020.170	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 170 MM		Perfurar osso
























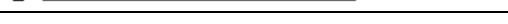

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI132.0020.180	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 180 MM		Perfurar osso
TI132.0020.190	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 190 MM		Perfurar osso
TI132.0020.200	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 200 MM		Perfurar osso
TI132.0020.210	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 210 MM		Perfurar osso
TI132.0020.220	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 220 MM		Perfurar osso
TI132.0020.230	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 230 MM		Perfurar osso
TI132.0020.240	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 240 MM		Perfurar osso
TI132.0020.250	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 250 MM		Perfurar osso
TI132.0020.260	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 260 MM		Perfurar osso
TI132.0020.270	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 270 MM		Perfurar osso
TI132.0020.280	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 280 MM		Perfurar osso
TI132.0020.290	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 290 MM		Perfurar osso
TI132.0020.300	BROCA GRADUADA Ø2,0 X 300 MM		Perfurar osso
TI133.2009.005	BROCA Ø0,9 COM STOP 5MM CA		Perfuração óssea
TI133.2012.005	BROCA Ø1,2 COM STOP 5MM CA		Perfuração óssea
TI133.2015.005	BROCA Ø1,5 COM STOP 5MM CA		Perfuração óssea
TI133.2009.007	BROCA Ø0,9 COM STOP 7MM CA		Perfuração óssea
TI133.2012.007	BROCA Ø1,2 COM STOP 7MM CA		Perfuração óssea
TI133.2015.007	BROCA Ø1,5 COM STOP 7MM CA		Perfuração óssea






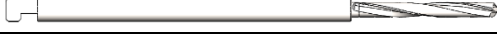






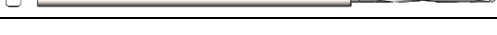

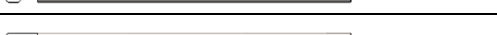
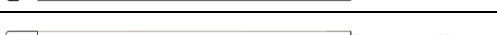
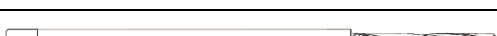


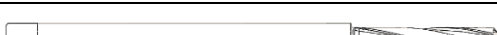














Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI144.1200.001	CHAVE CROSS-DRIVE S1,2 - CA		Apertar/Inserir Parafuso
TI144.1520.001	CHAVE CROSS-DRIVE S1,5/2,0 - CA		Apertar/Inserir Parafuso
TI132.0042.200	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 200 MM		Perfuração óssea
TI132.0042.210	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 210 MM		Perfuração óssea
TI132.0042.220	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 220 MM		Perfuração óssea
TI132.0042.230	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 230 MM		Perfuração óssea
TI132.0042.240	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 240 MM		Perfuração óssea
TI132.0042.250	BROCA GRADUADA Ø4,2 X 250 MM		Perfuração óssea
TI132.0032.130	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 130 MM		Perfuração óssea
TI132.0032.140	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 140 MM		Perfuração óssea
TI132.0032.150	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 150 MM		Perfuração óssea
TI132.0032.160	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 160 MM		Perfuração óssea
TI132.0032.170	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 170 MM		Perfuração óssea
TI132.0032.180	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 180 MM		Perfuração óssea
TI132.0032.190	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 190 MM		Perfuração óssea
TI132.0032.200	BROCA GRADUADA Ø3,2 X 200 MM		Perfuração óssea
TI380.0060.000	Fresa Canulada Ø6,0 mm		Fresagem óssea
TI380.0070.000	Fresa Canulada Ø7,0 mm		Fresagem óssea
TI380.0080.000	Fresa Canulada Ø8,0 mm		Fresagem óssea
TI380.0090.000	Fresa Canulada Ø9,0 mm		Fresagem óssea
TI380.0100.000	Fresa Canulada Ø10,0 mm		Fresagem óssea
TI380.0110.000	Fresa Canulada Ø11,0 mm		Fresagem óssea
TI380.1060.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø6,0 mm		Fresagem óssea
TI380.1070.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø7,0 mm		Fresagem óssea
TI380.1080.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø8,0 mm		Fresagem óssea









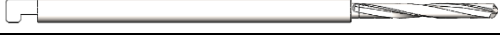


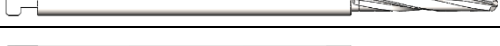







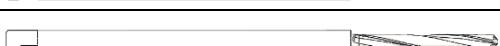
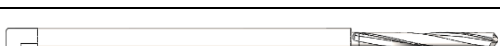










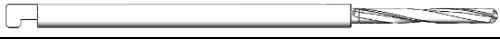


Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI380.1090.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø9,0 mm		Fresagem óssea
TI380.1100.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø10,0 mm		Fresagem óssea
TI380.1110.000	Fresa Canulada Ponta de Fluxo Ø11,0 mm		Fresagem óssea
TI380.2045.000	Fresa Endoscópica Canulada Ø4,5 mm		Fresagem óssea
TI137.0024.000	Broca de Passagem de Enxerto Ø2,4 mm		Fresagem óssea
TI133.0009.100	Broca Ø0,9 X 100MM ES		Perfuração óssea
TI133.0009.110	Broca Ø0,9 X 110MM ES		Perfuração óssea
TI133.0009.130	Broca Ø0,9 X 130mm ES		Perfuração óssea
TI133.0009.140	Broca Ø0,9 X 140mm ES		Perfuração óssea
TI133.0009.150	Broca Ø0,9 X 150mm ES		Perfuração óssea
TI133.0011.060	Broca Ø1,1 X 60mm ES		Perfuração óssea
TI133.0011.080	Broca Ø1,1 X 80mm ES		Perfuração óssea
TI133.0011.100	Broca Ø1,1 X 100mm ES		Perfuração óssea
TI133.0011.110	Broca Ø1,1 X 110mm ES		Perfuração óssea
TI133.0011.130	Broca Ø1,1 X 130mm ES		Perfuração óssea
TI133.0011.140	Broca Ø1,1 X 140mm ES		Perfuração óssea
TI133.0011.150	Broca Ø1,1 X 150mm ES		Perfuração óssea
TI133.0012.060	Broca Ø1,2 X 60mm ES		Perfuração óssea
TI133.0012.080	Broca Ø1,2 X 80mm ES		Perfuração óssea
TI133.0012.100	Broca Ø1,2 X 100mm ES		Perfuração óssea
TI133.0012.110	Broca Ø1,2 X 110mm ES		Perfuração óssea
TI133.0012.130	Broca Ø1,2 X 130mm ES		Perfuração óssea
TI133.0012.140	Broca Ø1,2 X 140mm ES		Perfuração óssea
TI133.0012.150	Broca Ø1,2 X 150mm ES		Perfuração óssea
TI133.0014.050	Broca Ø1,4 X 50mm ES		Perfuração óssea
TI133.0014.060	Broca Ø1,4 X 60mm ES		Perfuração óssea
TI133.0014.080	Broca Ø1,4 X 80mm ES		Perfuração óssea
TI133.0014.100	Broca Ø1,4 X 100mm ES		Perfuração óssea
TI133.0014.110	Broca Ø1,4 X 110mm ES		Perfuração óssea
TI133.0014.130	Broca Ø1,4 X 130mm ES		Perfuração óssea
TI133.0014.140	Broca Ø1,4 X 140mm ES		Perfuração óssea
TI133.0015.050	Broca Ø1,5 X 50mm ES		Perfuração óssea
TI133.0015.060	Broca Ø1,5 X 60mm ES		Perfuração óssea
TI133.0015.080	Broca Ø1,5 X 80mm ES		Perfuração óssea








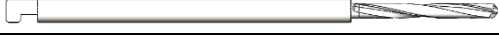

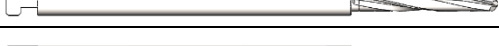






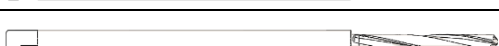
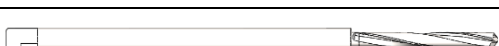






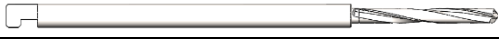

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.0015.100	Broca Ø1,5 X 100mm ES		Perfuração óssea
TI133.0015.110	Broca Ø1,5 X 110mm ES		Perfuração óssea
TI133.0015.130	Broca Ø1,5 X 130mm ES		Perfuração óssea
TI133.0015.140	Broca Ø1,5 X 140mm ES		Perfuração óssea
TI133.0018.050	Broca Ø1,8 X 50mm ES		Perfuração óssea
TI133.0018.060	Broca Ø1,8 X 60mm ES		Perfuração óssea
TI133.0018.080	Broca Ø1,8 X 80mm ES		Perfuração óssea
TI133.0018.100	Broca Ø1,8 X 100mm ES		Perfuração óssea
TI133.0018.110	Broca Ø1,8 X 110mm ES		Perfuração óssea
TI133.0018.130	Broca Ø1,8 X 130mm ES		Perfuração óssea
TI133.0018.140	Broca Ø1,8 X 140mm ES		Perfuração óssea
TI133.0020.050	Broca Ø2,0 X 50mm ES		Perfuração óssea
TI133.0020.060	Broca Ø2,0 X 60mm ES		Perfuração óssea
TI133.0020.080	Broca Ø2,0 X 80mm ES		Perfuração óssea
TI133.0020.110	Broca Ø2,0 X 110mm ES		Perfuração óssea
TI133.0020.130	Broca Ø2,0 X 130mm ES		Perfuração óssea
TI133.0020.140	Broca Ø2,0 X 140mm ES		Perfuração óssea
TI133.1008.008	Broca Ø0,8 Com Stop 8mm ES		Perfuração óssea
TI133.1008.009	Broca Ø0,8 Com Stop 9mm ES		Perfuração óssea
TI133.1008.010	Broca Ø0,8 Com Stop 10mm ES		Perfuração óssea
TI133.1008.011	Broca Ø0,8 Com Stop 11mm ES		Perfuração óssea
TI133.1008.012	Broca Ø0,8 Com Stop 12mm ES		Perfuração óssea
TI133.1008.013	Broca Ø0,8 Com Stop 13mm ES		Perfuração óssea
TI133.1008.014	Broca Ø0,8 Com Stop 14mm ES		Perfuração óssea
TI133.1008.015	Broca Ø0,8 Com Stop 15mm ES		Perfuração óssea
TI133.1009.008	Broca Ø0,9 Com Stop 8mm ES		Perfuração óssea
TI133.1009.009	Broca Ø0,9 Com Stop 9mm ES		Perfuração óssea
TI133.1009.011	Broca Ø0,9 Com Stop 11mm ES		Perfuração óssea
TI133.1009.012	Broca Ø0,9 Com Stop 12mm ES		Perfuração óssea
TI133.1009.013	Broca Ø0,9 Com Stop 13mm ES		Perfuração óssea
TI133.1009.014	Broca Ø0,9 Com Stop 14mm ES		Perfuração óssea
TI133.1009.015	Broca Ø0,9 Com Stop 15mm ES		Perfuração óssea
TI133.1011.007	Broca Ø1,1 Com Stop 7mm ES		Perfuração óssea
TI133.1011.009	Broca Ø1,1 Com Stop 9mm ES		Perfuração óssea









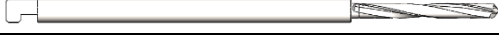


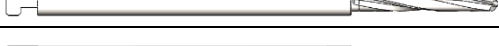







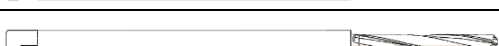
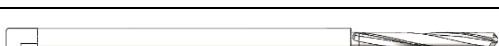










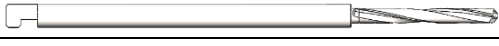


Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.1011.011	Broca Ø1,1 Com Stop 11mm ES		Perfuração óssea
TI133.1011.012	Broca Ø1,1 Com Stop 12mm ES		Perfuração óssea
TI133.1011.013	Broca Ø1,1 Com Stop 13mm ES		Perfuração óssea
TI133.1011.014	Broca Ø1,1 Com Stop 14mm ES		Perfuração óssea
TI133.1012.007	Broca Ø1,2 Com Stop 7mm ES		Perfuração óssea
TI133.1012.009	Broca Ø1,2 Com Stop 9mm ES		Perfuração óssea
TI133.1012.011	Broca Ø1,2 Com Stop 11mm ES		Perfuração óssea
TI133.1012.012	Broca Ø1,2 Com Stop 12mm ES		Perfuração óssea
TI133.1012.013	Broca Ø1,2 Com Stop 13mm ES		Perfuração óssea
TI133.1012.014	Broca Ø1,2 Com Stop 14mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.005	Broca Ø1,4 Com Stop 05mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.007	Broca Ø1,4 Com Stop 07mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.009	Broca Ø1,4 Com Stop 09mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.011	Broca Ø1,4 Com Stop 11mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.013	Broca Ø1,4 Com Stop 13mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.014	Broca Ø1,4 Com Stop 14mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.016	Broca Ø1,4 Com Stop 16mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.017	Broca Ø1,4 Com Stop 17mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.018	Broca Ø1,4 Com Stop 18mm ES		Perfuração óssea
TI133.1014.019	Broca Ø1,4 Com Stop 19mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.004	Broca Ø1,5 Com Stop 04mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.006	Broca Ø1,5 Com Stop 06mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.007	Broca Ø1,5 Com Stop 07mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.008	Broca Ø1,5 Com Stop 08mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.009	Broca Ø1,5 Com Stop 09mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.011	Broca Ø1,5 Com Stop 11mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.012	Broca Ø1,5 Com Stop 12mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.013	Broca Ø1,5 Com Stop 13mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.014	Broca Ø1,5 Com Stop 14mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.016	Broca Ø1,5 Com Stop 16mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.017	Broca Ø1,5 Com Stop 17mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.018	Broca Ø1,5 Com Stop 18mm ES		Perfuração óssea
TI133.1015.019	Broca Ø1,5 Com Stop 19mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.004	Broca Ø1,8 Com Stop 04mm ES		Perfuração óssea





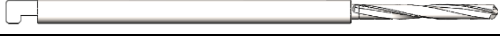

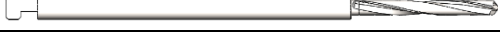


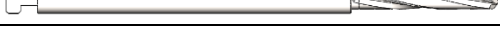

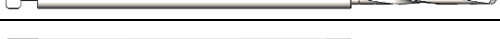

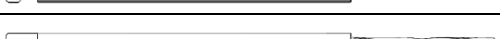

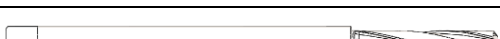


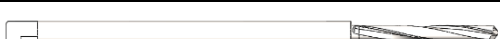







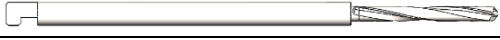




Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport





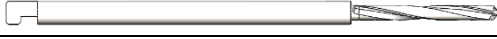

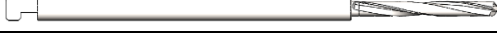


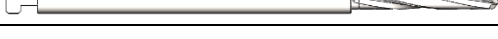
TI133.1018.005	Broca Ø1,8 Com Stop 05mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.006	Broca Ø1,8 Com Stop 06mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.007	Broca Ø1,8 Com Stop 07mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.008	Broca Ø1,8 Com Stop 08mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.009	Broca Ø1,8 Com Stop 09mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.011	Broca Ø1,8 Com Stop 11mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.012	Broca Ø1,8 Com Stop 12mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.013	Broca Ø1,8 Com Stop 13mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.014	Broca Ø1,8 Com Stop 14mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.016	Broca Ø1,8 Com Stop 16mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.017	Broca Ø1,8 Com Stop 17mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.018	Broca Ø1,8 Com Stop 18mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.019	Broca Ø1,8 Com Stop 19mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.021	Broca Ø1,8 Com Stop 21mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.022	Broca Ø1,8 Com Stop 22mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.023	Broca Ø1,8 Com Stop 23mm ES		Perfuração óssea
TI133.1018.024	Broca Ø1,8 Com Stop 24mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.004	Broca Ø2,0 Com Stop 04mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.005	Broca Ø2,0 Com Stop 05mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.006	Broca Ø2,0 Com Stop 06mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.007	Broca Ø2,0 Com Stop 07mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.008	Broca Ø2,0 Com Stop 08mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.009	Broca Ø2,0 Com Stop 09mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.011	Broca Ø2,0 Com Stop 11mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.012	Broca Ø2,0 Com Stop 12mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.013	Broca Ø2,0 Com Stop 13mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.014	Broca Ø2,0 Com Stop 14mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.016	Broca Ø2,0 Com Stop 16mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.017	Broca Ø2,0 Com Stop 17mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.018	Broca Ø2,0 Com Stop 18mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.019	Broca Ø2,0 Com Stop 19mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.021	Broca Ø2,0 Com Stop 21mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.022	Broca Ø2,0 Com Stop 22mm ES		Perfuração óssea
TI133.1020.023	Broca Ø2,0 Com Stop 23mm ES		Perfuração óssea

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.1020.024	Broca Ø2,0 Com Stop 24mm ES		Perfuração óssea
TI133.1109.050	Broca Ø0,9 X 50mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.060	Broca Ø0,9 X 60mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.070	Broca Ø0,9 X 70mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.080	Broca Ø0,9 X 80mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.090	Broca Ø0,9 X 90mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.100	Broca Ø0,9 X 100mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.110	Broca Ø0,9 X 110mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.120	Broca Ø0,9 X 120mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.130	Broca Ø0,9 X 130mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.140	Broca Ø0,9 X 140mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1109.150	Broca Ø0,9 X 150mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.050	Broca Ø1,1 X 50mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.060	Broca Ø1,1 X 60mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.070	Broca Ø1,1 X 70mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.080	Broca Ø1,1 X 80mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.090	Broca Ø1,1 X 90mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.100	Broca Ø1,1 X 100mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.110	Broca Ø1,1 X 110mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.120	Broca Ø1,1 X 120mm ES C Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.130	Broca Ø1,1 X 130mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.140	Broca Ø1,1 X 140mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1111.150	Broca Ø1,1 X 150mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.050	Broca Ø1,2 X 50mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.060	Broca Ø1,2 X 60mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.070	Broca Ø1,2 X 70mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.080	Broca Ø1,2 X 80mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.090	Broca Ø1,2 X 90mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.100	Broca Ø1,2 X 100mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.110	Broca Ø1,2 X 110mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.120	Broca Ø1,2 X 120mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.130	Broca Ø1,2 X 130mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.140	Broca Ø1,2 X 140mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1112.150	Broca Ø1,2 X 150mm ES Com Stop		Perfuração óssea

Instrução de Uso
Brocas e Fresas Cirúrgicas - Techimport

TI133.1114.050	Broca Ø1,4 X 50mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.060	Broca Ø1,4 X 60mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.070	Broca Ø1,4 X 70mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.080	Broca Ø1,4 X 80mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.090	Broca Ø1,4 X 90mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.100	Broca Ø1,4 X 100mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.110	Broca Ø1,4 X 110mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.120	Broca Ø1,4 X 120mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.130	Broca Ø1,4 X 130mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.140	Broca Ø1,4 X 140mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1114.150	Broca Ø1,4 X 150mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.050	Broca Ø1,5 X 50mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.060	Broca Ø1,5 X 60mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.070	Broca Ø1,5 X 70mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.080	Broca Ø1,5 X 80mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.090	Broca Ø1,5 X 90mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.100	Broca Ø1,5 X 100mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.110	Broca Ø1,5 X 110mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.120	Broca Ø1,5 X 120mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.130	Broca Ø1,5 X 130mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.140	Broca Ø1,5 X 140mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1115.150	Broca Ø1,5 X 150mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.050	Broca Ø1,8 X 50mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.060	Broca Ø1,8 X 60mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.070	Broca Ø1,8 X 70mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.080	Broca Ø1,8 X 80mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.090	Broca Ø1,8 X 90mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.100	Broca Ø1,8 X 100mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.110	Broca Ø1,8 X 110mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.120	Broca Ø1,8 X 120mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.130	Broca Ø1,8 X 130mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.140	Broca Ø1,8 X 140mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1118.150	Broca Ø1,8 X 150mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.050	Broca Ø2,0 X 50mm ES Com Stop		Perfuração óssea

TI133.1120.060	Broca Ø2,0 X 60mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.070	Broca Ø2,0 X 70mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.080	Broca Ø2,0 X 80mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.090	Broca Ø2,0 X 90mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.100	Broca Ø2,0 X 100mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.110	Broca Ø2,0 X 110mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.120	Broca Ø2,0 X 120mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.130	Broca Ø2,0 X 130mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.140	Broca Ø2,0 X 140mm ES Com Stop		Perfuração óssea
TI133.1120.150	Broca Ø2,0 X 150mm ES Com Stop		Perfuração óssea

CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins exclusivos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Não Estéril, como método de esterilização indicado é o Vapor por Autoclave.

MÉTODOS RECOMENDADOS PARA ESTERILIZAÇÃO DESSE PRODUTO

Vapor em Autoclave: Este produto é fornecido não estéril. Antes da utilização deve ser esterilizado. Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital (*ISO 17665-1: 2006 Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*). A autoclave é equipamento para esterilização através de vapor saturado sob pressão. É

recomendável que sejam aplicados os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado):

Parâmetros de esterilização física em autoclaves

Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Convencional (1 atm de pressão)	134°C (270°F)	4 minutos

Obs.: O tempo deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

PARA MELHOR ESCLARECIMENTO, CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES QUE ACOMPANHA CADA AUTOCLAVE.

RECOMENDAÇÕES

1. Utilizar para a autoclave, água destilada, desmineralizada ou deionizada, para que o vapor resultante esteja isento de impurezas. Ainda assim se necessário, a autoclave deverá possuir filtros adequados para reter impurezas.
2. Os instrumentais cirúrgicos devem ser dispostos abertos, principalmente as pinças hemostáticas e porta-agulhas, ou no máximo fechado apenas no primeiro dente da cremalheira, em bandejas e as mesmas envolvidas em campo duplo de algodão cru, ou colocados em caixas “tipo container” perfumadas, apropriadas para este tipo de esterilização.
3. Não abrir prematuramente a autoclave, para evitar a rápida condensação.
4. Não abrir a autoclave rapidamente, deixando todo o vapor sair primeiro e que o ciclo de secagem se complete.
5. Limpar rigorosamente e periodicamente a autoclave, removendo sujeiras e eventual excesso de ferrugem (óxido de ferro).

LIMPEZA MANUAL NO CENTRO DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO

MATERIAIS

- Detergente Enzimático: Marca: 3M™ Detergente Multienzimático – 5 Enzimas
- Escova de cerdas macias: Escova Batrik extra rígida
- Fio para orifícios passantes: Fio metálico

INSTRUÇÃO

a) Diluir solução de detergente em água deionizada morna (entre 30º e 40º Celsius). Diluição recomendada: de 2 ml por litro de água (2ml/l). Usar sempre água destilada, deionizada ou desmineralizada.

b) Imergir todo o instrumental cirúrgico na solução de detergente, lembrando de injetar

essa solução também dentro do lúmen dos mesmos com uma seringa de 20ml, mantendo a solução em contato com o instrumental por no mínimo 3 minutos ou conforme a orientação do fabricante;

c) Friccionar a superfície externa de cada instrumental com uma esponja macia, no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível, certificando-se de que todas as reentrâncias foram lavadas;

d) Friccionar a superfície interna de cada lúmen com uma escova macia, ajustada ao tamanho do lúmen, no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível;

e) Enxaguar a superfície externa do instrumental com água potável sob pressão;

f) Enxaguar a superfície interna dos lumens injetando água potável sob pressão pelo menos 5 vezes.

Obs.: Todos os instrumentais canulados após limpeza manual devem ser colocados em lavadoras ultrassônicas nos bicos injetores.

LIMPEZA AUTOMATIZADA ULTRASSÔNICA

MATERIAIS

Detergente Enzimático: Marca: 3M™ Detergente Multienzimático – 5 Enzimas

INSTRUÇÃO

a) Colocar o instrumental cirúrgico na lavadora ultrassônica;

b) Iniciar o ciclo, conforme a orientação do fabricante.

- Temperaturas da água acima de 40°C, mas sempre inferiores a 60°C (neste método não se verificou a coagulação de proteínas), facilitam a volatilização dos agentes de limpeza, favorecendo a ação do ultrassom no interior das peças, garantindo assim uma limpeza mais eficaz.
- Normalmente, 3 a 5 minutos de imersão numa frequência de 25 a 40 kHz é o suficiente para limpeza dos instrumentais. Resultados satisfatórios são obtidos de 5 a 10 minutos, quando a frequência do banho ultrassônico é de 35 kHz.

ENXÁGUE FINAL

Enxaguar todo o instrumental cirúrgico em água corrente, instilando água sob pressão, certificando-se posteriormente da ausência de sujidade.

SECAGEM

- a) Colocar o instrumental cirúrgico sobre um pano branco e limpo;
- b) Secar cada instrumental externa e internamente com ar sob pressão.

MARCAÇÃO

A identificação do produto é feita através de gravação a laser que deve ser gravado conforme orientação de gravação contida no desenho técnico do produto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em temperatura ambiente em local seco e fresco, sem exposição a incidência de luz, umidade ou a substâncias contaminantes.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Todo material deve ser tratado individualmente, em ambiente limpo e com uso de containers destinados especificamente para limpeza destes instrumentais.

PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO

Prazo de validade dos instrumentais é indeterminado, podendo ser reprocessado.

DESCARTE DO DISPOSITIVO

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA:

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

FORMA DE APRESENTAÇÃO

O Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport é fornecido na condição não esteril, comercializado individualmente em embalagem plastica. As embalagens sao identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:



Legenda da Simbologia

	Data de Fabricação		Consultar Instruções de Uso
	Data de Validade		Frágil, manusear com cuidado
	Manter Seco		Manter ao abrigo do sol
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Não Estéril

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE Nº 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN nº04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para: **qualidade@techimportimplantes.com.br** ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022

EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas - Techimport

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500