

Instrução de Uso
Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis



Nome Técnico: Brocas de Perfuração Óssea

Nome Comercial: Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

Registro Anvisa: 81118469015

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47











comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 - 9500

**PRODUTO ESTÉRIL
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

Legendas dos Símbolos Utilizados nas Embalagens

	Data de Validade: 3 anos a partir da data de esterilização		Cuidado
	Data de fabricação		Ler instruções de uso antes de usar o produto
	Estéril - ETO		Proibido Reesterilizar
	Não use se a embalagem estiver danificada		Produto de uso único- Não Reutilizar
	Manter ao abrigo do sol		Manter seco

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Brocas de Perfuração Óssea

Nome Comercial: Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

Componentes:

- Fresas Esféricas D-Coating

Matéria-prima:

Aço Inoxidável Martensítico ASTM F899 Com Revestimento De Diamante E DLC Black

Esterilização: Óxido de Etileno (ETO)

Validade: 3 anos a partir da data de esterilização

Quantidade: 01 unidade

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

Os produtos desse registro foram desenvolvidos para auxiliar em procedimentos cirúrgicos para perfuração óssea, auxiliando as cirurgias para colocação dos implantes para traumatologia, artroplastia e buco máximo.

As Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis estão disponíveis para comercialização conforme tabela abaixo:

Imagem Ilustrativa:



Código	Descrição	Quantidade por embalagem
TI134.8006.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm	01
TI134.8006.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm	01
TI134.8006.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm	01
TI134.8006.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm	01
TI134.8006.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm	01
TI134.8006.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm	01
TI134.8006.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm	01
TI134.8006.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm	01
TI134.8007.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm	01
TI134.8007.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm	01
TI134.8007.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm	01
TI134.8007.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm	01
TI134.8007.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm	01
TI134.8007.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm	01
TI134.8007.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm	01
TI134.8007.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm	01
TI134.8008.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm	01
TI134.8008.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8008.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm	01
TI134.8008.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm	01
TI134.8008.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm	01
TI134.8008.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm	01
TI134.8008.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm	01
TI134.8008.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm	01
TI134.8010.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm	01
TI134.8010.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm	01
TI134.8010.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm	01
TI134.8010.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm	01
TI134.8010.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm	01
TI134.8010.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm	01
TI134.8010.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm	01
TI134.8010.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm	01
TI134.8014.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm	01
TI134.8014.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm	01
TI134.8014.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm	01
TI134.8014.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm	01
TI134.8014.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm	01
TI134.8014.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm	01
TI134.8014.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm	01
TI134.8014.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm	01
TI134.8018.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm	01
TI134.8018.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm	01
TI134.8018.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm	01
TI134.8018.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm	01
TI134.8018.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm	01
TI134.8018.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm	01
TI134.8018.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm	01
TI134.8018.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8020.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm	01
TI134.8020.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm	01
TI134.8020.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm	01
TI134.8020.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm	01
TI134.8020.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm	01
TI134.8020.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm	01
TI134.8020.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm	01
TI134.8020.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm	01
TI134.8023.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm	01
TI134.8023.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm	01
TI134.8023.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm	01
TI134.8023.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm	01
TI134.8023.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm	01
TI134.8023.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm	01
TI134.8023.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm	01
TI134.8023.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm	01
TI134.8027.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm	01
TI134.8027.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm	01
TI134.8027.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm	01
TI134.8027.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm	01
TI134.8027.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm	01
TI134.8027.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm	01
TI134.8027.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm	01
TI134.8027.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm	01
TI134.8030.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm	01
TI134.8030.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm	01
TI134.8030.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm	01
TI134.8030.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm	01
TI134.8030.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm	01
TI134.8030.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8030.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm	01
TI134.8030.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm	01
TI134.8031.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm	01
TI134.8031.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm	01
TI134.8031.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm	01
TI134.8031.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm	01
TI134.8031.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm	01
TI134.8031.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm	01
TI134.8031.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm	01
TI134.8031.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm	01
TI134.8035.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm	01
TI134.8035.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm	01
TI134.8035.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm	01
TI134.8035.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm	01
TI134.8035.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm	01
TI134.8035.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm	01
TI134.8035.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm	01
TI134.8035.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm	01
TI134.8040.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm	01
TI134.8040.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm	01
TI134.8040.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm	01
TI134.8040.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm	01
TI134.8040.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm	01
TI134.8040.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm	01
TI134.8040.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm	01
TI134.8040.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm	01
TI134.8045.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm	01
TI134.8045.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm	01
TI134.8045.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm	01
TI134.8045.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8045.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm	01
TI134.8045.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm	01
TI134.8045.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm	01
TI134.8045.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm	01
TI134.8050.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm	01
TI134.8050.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm	01
TI134.8050.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm	01
TI134.8050.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm	01
TI134.8050.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm	01
TI134.8050.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm	01
TI134.8050.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm	01
TI134.8050.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm	01
TI134.8055.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm	01
TI134.8055.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm	01
TI134.8055.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm	01
TI134.8055.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm	01
TI134.8055.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm	01
TI134.8055.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm	01
TI134.8055.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm	01
TI134.8055.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm	01
TI134.8060.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm	01
TI134.8060.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm	01
TI134.8060.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm	01
TI134.8060.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm	01
TI134.8060.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm	01
TI134.8060.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm	01
TI134.8060.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm	01
TI134.8060.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm	01
TI134.8106.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm ES	01
TI134.8106.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm ES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8106.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm ES	01
TI134.8106.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm ES	01
TI134.8106.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm ES	01
TI134.8106.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm ES	01
TI134.8106.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm ES	01
TI134.8106.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm ES	01
TI134.8107.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm ES	01
TI134.8107.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm ES	01
TI134.8107.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm ES	01
TI134.8107.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm ES	01
TI134.8107.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm ES	01
TI134.8107.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm ES	01
TI134.8107.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm ES	01
TI134.8107.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm ES	01
TI134.8108.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm ES	01
TI134.8108.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm ES	01
TI134.8108.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm ES	01
TI134.8108.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm ES	01
TI134.8108.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm ES	01
TI134.8108.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm ES	01
TI134.8108.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm ES	01
TI134.8108.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm ES	01
TI134.8110.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm ES	01
TI134.8110.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm ES	01
TI134.8110.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm ES	01
TI134.8110.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm ES	01
TI134.8110.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm ES	01
TI134.8110.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm ES	01
TI134.8110.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm ES	01
TI134.8110.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm ES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8114.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm ES	01
TI134.8114.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm ES	01
TI134.8114.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm ES	01
TI134.8114.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm ES	01
TI134.8114.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm ES	01
TI134.8114.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm ES	01
TI134.8114.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm ES	01
TI134.8114.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm ES	01
TI134.8118.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm ES	01
TI134.8118.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm ES	01
TI134.8118.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm ES	01
TI134.8118.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm ES	01
TI134.8118.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm ES	01
TI134.8118.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm ES	01
TI134.8118.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm ES	01
TI134.8118.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm ES	01
TI134.8120.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm ES	01
TI134.8120.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm ES	01
TI134.8120.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm ES	01
TI134.8120.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm ES	01
TI134.8120.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm ES	01
TI134.8120.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm ES	01
TI134.8120.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm ES	01
TI134.8120.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm ES	01
TI134.8123.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm ES	01
TI134.8123.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm ES	01
TI134.8123.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm ES	01
TI134.8123.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm ES	01
TI134.8123.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm ES	01
TI134.8123.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm ES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8123.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm ES	01
TI134.8123.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm ES	01
TI134.8127.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm ES	01
TI134.8127.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm ES	01
TI134.8127.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm ES	01
TI134.8127.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm ES	01
TI134.8127.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm ES	01
TI134.8127.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm ES	01
TI134.8127.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm ES	01
TI134.8127.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm ES	01
TI134.8130.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm ES	01
TI134.8130.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm ES	01
TI134.8130.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm ES	01
TI134.8130.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm ES	01
TI134.8130.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm ES	01
TI134.8130.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm ES	01
TI134.8130.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm ES	01
TI134.8130.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm ES	01
TI134.8131.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm ES	01
TI134.8131.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm ES	01
TI134.8131.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm ES	01
TI134.8131.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm ES	01
TI134.8131.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm ES	01
TI134.8131.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm ES	01
TI134.8131.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm ES	01
TI134.8131.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm ES	01
TI134.8135.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm ES	01
TI134.8135.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm ES	01
TI134.8135.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm ES	01
TI134.8135.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm ES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8135.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm ES	01
TI134.8135.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm ES	01
TI134.8135.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm ES	01
TI134.8135.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm ES	01
TI134.8140.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm ES	01
TI134.8140.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm ES	01
TI134.8140.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm ES	01
TI134.8140.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm ES	01
TI134.8140.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm ES	01
TI134.8140.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm ES	01
TI134.8140.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm ES	01
TI134.8140.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm ES	01
TI134.8145.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm ES	01
TI134.8145.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm ES	01
TI134.8145.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm ES	01
TI134.8145.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm ES	01
TI134.8145.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm ES	01
TI134.8145.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm ES	01
TI134.8145.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm ES	01
TI134.8145.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm ES	01
TI134.8150.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm ES	01
TI134.8150.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm ES	01
TI134.8150.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm ES	01
TI134.8150.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm ES	01
TI134.8150.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm ES	01
TI134.8150.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm ES	01
TI134.8150.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm ES	01
TI134.8150.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm ES	01
TI134.8155.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm ES	01
TI134.8155.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm ES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8155.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm ES	01
TI134.8155.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm ES	01
TI134.8155.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm ES	01
TI134.8155.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm ES	01
TI134.8155.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm ES	01
TI134.8155.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm ES	01
TI134.8160.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm ES	01
TI134.8160.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm ES	01
TI134.8160.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm ES	01
TI134.8160.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm ES	01
TI134.8160.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm ES	01
TI134.8160.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm ES	01
TI134.8160.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm ES	01
TI134.8160.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm ES	01
TI134.8206.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm NPR2	01
TI134.8206.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm NPR2	01
TI134.8206.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm NPR2	01
TI134.8206.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm NPR2	01
TI134.8206.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm NPR2	01
TI134.8206.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm NPR2	01
TI134.8206.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm NPR2	01
TI134.8206.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm NPR2	01
TI134.8207.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm NPR2	01
TI134.8207.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm NPR2	01
TI134.8207.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm NPR2	01
TI134.8207.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm NPR2	01
TI134.8207.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm NPR2	01
TI134.8207.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm NPR2	01
TI134.8207.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm NPR2	01
TI134.8207.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm NPR2	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8208.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm NPR2	01
TI134.8208.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm NPR2	01
TI134.8208.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm NPR2	01
TI134.8208.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm NPR2	01
TI134.8208.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm NPR2	01
TI134.8208.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm NPR2	01
TI134.8208.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm NPR2	01
TI134.8208.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm NPR2	01
TI134.8210.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm NPR2	01
TI134.8210.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm NPR2	01
TI134.8210.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm NPR2	01
TI134.8210.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm NPR2	01
TI134.8210.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm NPR2	01
TI134.8210.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm NPR2	01
TI134.8210.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm NPR2	01
TI134.8210.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm NPR2	01
TI134.8214.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm NPR2	01
TI134.8214.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm NPR2	01
TI134.8214.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm NPR2	01
TI134.8214.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm NPR2	01
TI134.8214.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm NPR2	01
TI134.8214.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm NPR2	01
TI134.8214.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm NPR2	01
TI134.8214.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm NPR2	01
TI134.8218.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm NPR2	01
TI134.8218.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm NPR2	01
TI134.8218.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm NPR2	01
TI134.8218.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm NPR2	01
TI134.8218.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm NPR2	01
TI134.8218.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm NPR2	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8218.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm NPR2	01
TI134.8218.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm NPR2	01
TI134.8220.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm NPR2	01
TI134.8220.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm NPR2	01
TI134.8220.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm NPR2	01
TI134.8220.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm NPR2	01
TI134.8220.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm NPR2	01
TI134.8220.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm NPR2	01
TI134.8220.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm NPR2	01
TI134.8220.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm NPR2	01
TI134.8223.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm NPR2	01
TI134.8223.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm NPR2	01
TI134.8223.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm NPR2	01
TI134.8223.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm NPR2	01
TI134.8223.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm NPR2	01
TI134.8223.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm NPR2	01
TI134.8223.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm NPR2	01
TI134.8223.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm NPR2	01
TI134.8227.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm NPR2	01
TI134.8227.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm NPR2	01
TI134.8227.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm NPR2	01
TI134.8227.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm NPR2	01
TI134.8227.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm NPR2	01
TI134.8227.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm NPR2	01
TI134.8227.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm NPR2	01
TI134.8227.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm NPR2	01
TI134.8230.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm NPR2	01
TI134.8230.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm NPR2	01
TI134.8230.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm NPR2	01
TI134.8230.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm NPR2	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8230.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm NPR2	01
TI134.8230.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm NPR2	01
TI134.8230.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm NPR2	01
TI134.8230.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm NPR2	01
TI134.8231.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm NPR2	01
TI134.8231.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm NPR2	01
TI134.8231.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm NPR2	01
TI134.8231.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm NPR2	01
TI134.8231.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm NPR2	01
TI134.8231.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm NPR2	01
TI134.8231.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm NPR2	01
TI134.8231.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm NPR2	01
TI134.8235.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm NPR2	01
TI134.8235.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm NPR2	01
TI134.8235.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm NPR2	01
TI134.8235.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm NPR2	01
TI134.8235.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm NPR2	01
TI134.8235.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm NPR2	01
TI134.8235.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm NPR2	01
TI134.8235.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm NPR2	01
TI134.8240.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm NPR2	01
TI134.8240.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm NPR2	01
TI134.8240.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm NPR2	01
TI134.8240.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm NPR2	01
TI134.8240.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm NPR2	01
TI134.8240.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm NPR2	01
TI134.8240.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm NPR2	01
TI134.8240.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm NPR2	01
TI134.8245.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm NPR2	01
TI134.8245.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm NPR2	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8245.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm NPR2	01
TI134.8245.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm NPR2	01
TI134.8245.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm NPR2	01
TI134.8245.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm NPR2	01
TI134.8245.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm NPR2	01
TI134.8245.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm NPR2	01
TI134.8250.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm NPR2	01
TI134.8250.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm NPR2	01
TI134.8250.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm NPR2	01
TI134.8250.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm NPR2	01
TI134.8250.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm NPR2	01
TI134.8250.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm NPR2	01
TI134.8250.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm NPR2	01
TI134.8250.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm NPR2	01
TI134.8255.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm NPR2	01
TI134.8255.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm NPR2	01
TI134.8255.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm NPR2	01
TI134.8255.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm NPR2	01
TI134.8255.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm NPR2	01
TI134.8255.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm NPR2	01
TI134.8255.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm NPR2	01
TI134.8255.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm NPR2	01
TI134.8260.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm NPR2	01
TI134.8260.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm NPR2	01
TI134.8260.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm NPR2	01
TI134.8260.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm NPR2	01
TI134.8260.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm NPR2	01
TI134.8260.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm NPR2	01
TI134.8260.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm NPR2	01
TI134.8260.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm NPR2	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8306.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm CTES	01
TI134.8306.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm CTES	01
TI134.8306.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm CTES	01
TI134.8306.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm CTES	01
TI134.8306.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm CTES	01
TI134.8306.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm CTES	01
TI134.8306.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm CTES	01
TI134.8306.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm CTES	01
TI134.8307.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm CTES	01
TI134.8307.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm CTES	01
TI134.8307.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm CTES	01
TI134.8307.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm CTES	01
TI134.8307.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm CTES	01
TI134.8307.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm CTES	01
TI134.8307.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm CTES	01
TI134.8307.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm CTES	01
TI134.8308.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm CTES	01
TI134.8308.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm CTES	01
TI134.8308.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm CTES	01
TI134.8308.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm CTES	01
TI134.8308.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm CTES	01
TI134.8308.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm CTES	01
TI134.8308.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm CTES	01
TI134.8308.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm CTES	01
TI134.8310.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm CTES	01
TI134.8310.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm CTES	01
TI134.8310.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm CTES	01
TI134.8310.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm CTES	01
TI134.8310.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm CTES	01
TI134.8310.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm CTES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8310.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm CTES	01
TI134.8310.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm CTES	01
TI134.8314.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm CTES	01
TI134.8314.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm CTES	01
TI134.8314.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm CTES	01
TI134.8314.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm CTES	01
TI134.8314.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm CTES	01
TI134.8314.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm CTES	01
TI134.8314.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm CTES	01
TI134.8314.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm CTES	01
TI134.8318.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm CTES	01
TI134.8318.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm CTES	01
TI134.8318.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm CTES	01
TI134.8318.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm CTES	01
TI134.8318.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm CTES	01
TI134.8318.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm CTES	01
TI134.8318.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm CTES	01
TI134.8318.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm CTES	01
TI134.8320.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm CTES	01
TI134.8320.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm CTES	01
TI134.8320.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm CTES	01
TI134.8320.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm CTES	01
TI134.8320.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm CTES	01
TI134.8320.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm CTES	01
TI134.8320.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm CTES	01
TI134.8320.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm CTES	01
TI134.8323.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm CTES	01
TI134.8323.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm CTES	01
TI134.8323.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm CTES	01
TI134.8323.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm CTES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8323.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm CTES	01
TI134.8323.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm CTES	01
TI134.8323.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm CTES	01
TI134.8323.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm CTES	01
TI134.8327.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm CTES	01
TI134.8327.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm CTES	01
TI134.8327.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm CTES	01
TI134.8327.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm CTES	01
TI134.8327.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm CTES	01
TI134.8327.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm CTES	01
TI134.8327.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm CTES	01
TI134.8327.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm CTES	01
TI134.8330.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm CTES	01
TI134.8330.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm CTES	01
TI134.8330.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm CTES	01
TI134.8330.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm CTES	01
TI134.8330.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm CTES	01
TI134.8330.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm CTES	01
TI134.8330.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm CTES	01
TI134.8330.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm CTES	01
TI134.8331.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm CTES	01
TI134.8331.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm CTES	01
TI134.8331.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm CTES	01
TI134.8331.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm CTES	01
TI134.8331.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm CTES	01
TI134.8331.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm CTES	01
TI134.8331.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm CTES	01
TI134.8331.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm CTES	01
TI134.8335.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm CTES	01
TI134.8335.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm CTES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8335.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm CTES	01
TI134.8335.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm CTES	01
TI134.8335.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm CTES	01
TI134.8335.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm CTES	01
TI134.8335.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm CTES	01
TI134.8335.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm CTES	01
TI134.8340.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm CTES	01
TI134.8340.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm CTES	01
TI134.8340.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm CTES	01
TI134.8340.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm CTES	01
TI134.8340.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm CTES	01
TI134.8340.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm CTES	01
TI134.8340.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm CTES	01
TI134.8340.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm CTES	01
TI134.8345.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm CTES	01
TI134.8345.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm CTES	01
TI134.8345.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm CTES	01
TI134.8345.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm CTES	01
TI134.8345.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm CTES	01
TI134.8345.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm CTES	01
TI134.8345.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm CTES	01
TI134.8345.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm CTES	01
TI134.8350.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm CTES	01
TI134.8350.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm CTES	01
TI134.8350.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm CTES	01
TI134.8350.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm CTES	01
TI134.8350.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm CTES	01
TI134.8350.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm CTES	01
TI134.8350.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm CTES	01
TI134.8350.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm CTES	01

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8355.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm CTES	01
TI134.8355.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm CTES	01
TI134.8355.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm CTES	01
TI134.8355.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm CTES	01
TI134.8355.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm CTES	01
TI134.8355.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm CTES	01
TI134.8355.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm CTES	01
TI134.8355.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm CTES	01
TI134.8360.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm CTES	01
TI134.8360.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm CTES	01
TI134.8360.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm CTES	01
TI134.8360.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm CTES	01
TI134.8360.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm CTES	01
TI134.8360.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm CTES	01
TI134.8360.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm CTES	01
TI134.8360.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm CTES	01

Composição

Os materiais selecionados para a composição do produto apresentam as propriedades requeridas para atingir desempenho pretendido. Essa seleção considerou fatores como a biocompatibilidade e propriedades físicas, químicas e mecânicas requeridas para o produto.

As Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis são fabricadas em **AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 COM REVESTIMENTO DE DIAMANTE E DLC BLACK** material cujas propriedades o torna ideal para a produção de dispositivos médicos implantáveis.

AÇO INOXIDÁVEL MARTENSÍTICO ASTM F899 utilizado para a fabricação do produto cumpre os requisitos especificados pela norma ASTM F899 - Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments.


Caracterizado como material com propriedades físicas, químicas e mecânicas favoráveis para esse fim, apresentam biocompatibilidade comprovada por um vasto histórico clínico amplamente descrito em literatura mundial.

Indicação e Finalidade

Auxílio em procedimento cirúrgico para colocação dos implantes para traumatologia, artroplastia e buco maxilo. A finalidade dessas brocas e fresas é realizar perfuração óssea.

As Brocas e fresas D-Coating com DLC estéreis possuem encaixes diferentes conforme indicados abaixo:

Imagem ilustrativa dos encaixes:

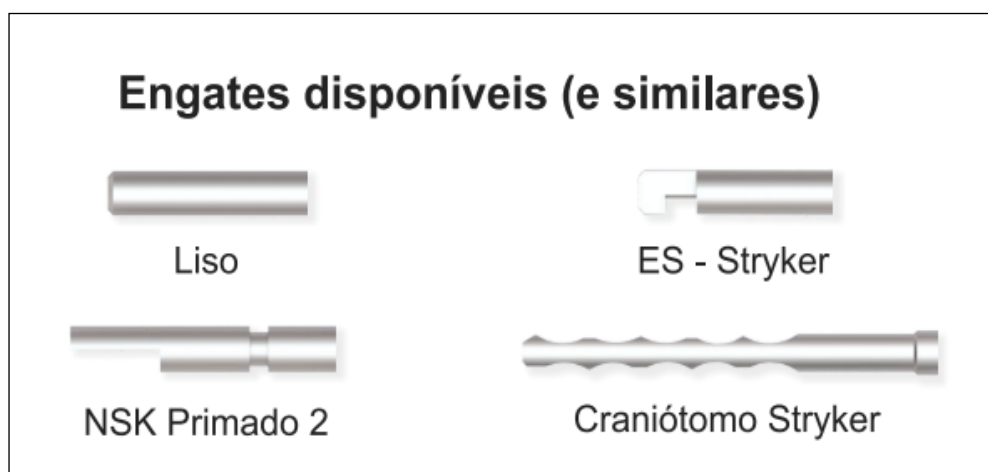

Código	Descrição	Tipo de Encaixe
TI134.8006.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm	Liso
TI134.8006.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm	Liso
TI134.8006.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm	Liso
TI134.8006.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm	Liso
TI134.8006.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm	Liso
TI134.8006.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm	Liso
TI134.8006.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm	Liso
TI134.8006.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm	Liso
TI134.8007.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm	Liso
TI134.8007.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm	Liso

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8007.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm	Liso
TI134.8007.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm	Liso
TI134.8007.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm	Liso
TI134.8007.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm	Liso
TI134.8007.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm	Liso
TI134.8007.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm	Liso
TI134.8008.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm	Liso
TI134.8008.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm	Liso
TI134.8008.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm	Liso
TI134.8008.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm	Liso
TI134.8008.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm	Liso
TI134.8008.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm	Liso
TI134.8008.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm	Liso
TI134.8008.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm	Liso
TI134.8010.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm	Liso
TI134.8010.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm	Liso
TI134.8010.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm	Liso
TI134.8010.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm	Liso
TI134.8010.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm	Liso
TI134.8010.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm	Liso
TI134.8010.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm	Liso
TI134.8010.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm	Liso
TI134.8014.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm	Liso
TI134.8014.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm	Liso
TI134.8014.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm	Liso
TI134.8014.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm	Liso
TI134.8014.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm	Liso
TI134.8014.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm	Liso
TI134.8014.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm	Liso
TI134.8014.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm	Liso

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8018.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm	Liso
TI134.8018.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm	Liso
TI134.8018.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm	Liso
TI134.8018.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm	Liso
TI134.8018.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm	Liso
TI134.8018.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm	Liso
TI134.8018.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm	Liso
TI134.8018.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm	Liso
TI134.8020.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm	Liso
TI134.8020.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm	Liso
TI134.8020.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm	Liso
TI134.8020.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm	Liso
TI134.8020.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm	Liso
TI134.8020.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm	Liso
TI134.8020.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm	Liso
TI134.8020.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm	Liso
TI134.8023.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm	Liso
TI134.8023.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm	Liso
TI134.8023.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm	Liso
TI134.8023.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm	Liso
TI134.8023.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm	Liso
TI134.8023.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm	Liso
TI134.8023.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm	Liso
TI134.8023.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm	Liso
TI134.8027.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm	Liso
TI134.8027.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm	Liso
TI134.8027.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm	Liso
TI134.8027.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm	Liso
TI134.8027.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm	Liso
TI134.8027.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm	Liso

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8027.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm	Liso
TI134.8027.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm	Liso
TI134.8030.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm	Liso
TI134.8030.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm	Liso
TI134.8030.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm	Liso
TI134.8030.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm	Liso
TI134.8030.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm	Liso
TI134.8030.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm	Liso
TI134.8030.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm	Liso
TI134.8030.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm	Liso
TI134.8031.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm	Liso
TI134.8031.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm	Liso
TI134.8031.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm	Liso
TI134.8031.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm	Liso
TI134.8031.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm	Liso
TI134.8031.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm	Liso
TI134.8031.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm	Liso
TI134.8031.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm	Liso
TI134.8035.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm	Liso
TI134.8035.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm	Liso
TI134.8035.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm	Liso
TI134.8035.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm	Liso
TI134.8035.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm	Liso
TI134.8035.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm	Liso
TI134.8035.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm	Liso
TI134.8035.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm	Liso
TI134.8040.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm	Liso
TI134.8040.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm	Liso
TI134.8040.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm	Liso
TI134.8040.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm	Liso

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8040.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm	Liso
TI134.8040.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm	Liso
TI134.8040.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm	Liso
TI134.8040.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm	Liso
TI134.8045.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm	Liso
TI134.8045.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm	Liso
TI134.8045.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm	Liso
TI134.8045.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm	Liso
TI134.8045.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm	Liso
TI134.8045.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm	Liso
TI134.8045.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm	Liso
TI134.8045.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm	Liso
TI134.8050.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm	Liso
TI134.8050.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm	Liso
TI134.8050.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm	Liso
TI134.8050.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm	Liso
TI134.8050.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm	Liso
TI134.8050.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm	Liso
TI134.8050.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm	Liso
TI134.8050.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm	Liso
TI134.8055.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm	Liso
TI134.8055.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm	Liso
TI134.8055.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm	Liso
TI134.8055.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm	Liso
TI134.8055.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm	Liso
TI134.8055.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm	Liso
TI134.8055.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm	Liso
TI134.8055.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm	Liso
TI134.8060.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm	Liso
TI134.8060.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm	Liso

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8060.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm	Liso
TI134.8060.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm	Liso
TI134.8060.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm	Liso
TI134.8060.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm	Liso
TI134.8060.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm	Liso
TI134.8060.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm	Liso
TI134.8106.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8106.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8106.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8106.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8106.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8106.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8106.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8106.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8107.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8107.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8107.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8107.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8107.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8107.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8107.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8107.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8108.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8108.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8108.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8108.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8108.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8108.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8108.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8108.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm ES	ES-Stryker

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8110.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8110.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8110.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8110.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8110.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8110.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8110.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8110.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8114.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8114.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8114.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8114.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8114.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8114.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8114.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8114.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8118.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8118.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8118.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8118.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8118.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8118.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8118.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8118.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8120.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8120.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8120.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8120.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8120.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8120.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm ES	ES-Stryker

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8120.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8120.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8123.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8123.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8123.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8123.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8123.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8123.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8123.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8123.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8127.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8127.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8127.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8127.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8127.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8127.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8127.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8127.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8130.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8130.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8130.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8130.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8130.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8130.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8130.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8130.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8131.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8131.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8131.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8131.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm ES	ES-Stryker

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8131.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8131.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8131.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8131.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8135.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8135.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8135.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8135.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8135.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8135.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8135.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8135.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8140.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8140.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8140.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8140.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8140.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8140.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8140.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8140.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8145.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8145.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8145.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8145.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8145.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8145.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8145.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8145.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8150.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8150.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm ES	ES-Stryker

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8150.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8150.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8150.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8150.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8150.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8150.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8155.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8155.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8155.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8155.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8155.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8155.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8155.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8155.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8160.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm ES	ES-Stryker
TI134.8160.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm ES	ES-Stryker
TI134.8160.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm ES	ES-Stryker
TI134.8160.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm ES	ES-Stryker
TI134.8160.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm ES	ES-Stryker
TI134.8160.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm ES	ES-Stryker
TI134.8160.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm ES	ES-Stryker
TI134.8160.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm ES	ES-Stryker
TI134.8206.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8206.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8206.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8206.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8206.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8206.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8206.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8206.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm NPR2	NSK Primado 2

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8207.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8207.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8207.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8207.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8207.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8207.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8207.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8207.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8208.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8208.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8208.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8208.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8208.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8208.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8208.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8208.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8210.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8210.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8210.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8210.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8210.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8210.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8210.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8210.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8214.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8214.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8214.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8214.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8214.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8214.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm NPR2	NSK Primado 2

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8214.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8214.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8218.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8218.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8218.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8218.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8218.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8218.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8218.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8218.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8220.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8220.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8220.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8220.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8220.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8220.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8220.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8220.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8223.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8223.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8223.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8223.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8223.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8223.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8223.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8223.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8227.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8227.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8227.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8227.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm NPR2	NSK Primado 2

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8227.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8227.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8227.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8227.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8230.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8230.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8230.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8230.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8230.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8230.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8230.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8230.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8231.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8231.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8231.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8231.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8231.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8231.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8231.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8231.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8235.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8235.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8235.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8235.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8235.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8235.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8235.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8235.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8240.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8240.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm NPR2	NSK Primado 2

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8240.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8240.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8240.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8240.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8240.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8240.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8245.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8245.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8245.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8245.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8245.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8245.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8245.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8245.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8250.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8250.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8250.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8250.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8250.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8250.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8250.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8250.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8255.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8255.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8255.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8255.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8255.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8255.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8255.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8255.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm NPR2	NSK Primado 2

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8260.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8260.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8260.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8260.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8260.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8260.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8260.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8260.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm NPR2	NSK Primado 2
TI134.8306.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8306.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8306.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8306.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8306.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8306.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8306.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8306.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,6 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8307.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8307.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8307.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8307.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8307.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8307.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8307.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8307.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,7 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8308.045	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8308.055	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8308.070	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8308.080	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8308.095	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8308.100	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8308.115	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8308.130	Fresa esférica D-Coating Ø0,8 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8310.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8310.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8310.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8310.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8310.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8310.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8310.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8310.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,0 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8314.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8314.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8314.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8314.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8314.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8314.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8314.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8314.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,4 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8318.045	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8318.055	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8318.070	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8318.080	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8318.095	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8318.100	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8318.115	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8318.130	Fresa esférica D-Coating Ø1,8 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8320.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8320.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8320.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8320.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8320.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8320.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8320.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8320.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,0 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8323.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8323.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8323.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8323.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8323.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8323.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8323.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8323.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,3 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8327.045	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8327.055	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8327.070	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8327.080	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8327.095	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8327.100	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8327.115	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8327.130	Fresa esférica D-Coating Ø2,7 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8330.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8330.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8330.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8330.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8330.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8330.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8330.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8330.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,0 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8331.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8331.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8331.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8331.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8331.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8331.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8331.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8331.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,1 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8335.045	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8335.055	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8335.070	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8335.080	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8335.095	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8335.100	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8335.115	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8335.130	Fresa esférica D-Coating Ø3,5 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8340.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8340.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8340.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8340.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8340.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8340.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8340.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8340.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,0 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8345.045	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8345.055	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8345.070	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8345.080	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8345.095	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8345.100	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8345.115	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8345.130	Fresa esférica D-Coating Ø4,5 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

TI134.8350.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8350.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8350.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8350.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8350.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8350.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8350.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8350.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,0 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8355.045	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8355.055	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8355.070	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8355.080	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8355.095	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8355.100	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8355.115	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8355.130	Fresa esférica D-Coating Ø5,5 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8360.045	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 45mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8360.055	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 55mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8360.070	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 70mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8360.080	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 80mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8360.095	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 95mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8360.100	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 100mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8360.115	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 115mm CTES	Craniótomo Stryker
TI134.8360.130	Fresa esférica D-Coating Ø6,0 X 130mm CTES	Craniótomo Stryker

Contraindicação

As Brocas e fresas D-Coating com DLC estéreis não devem ser utilizadas em regiões de infecção ativa.

Forma de Embalagem:

As Brocas e fresas D-Coating com DLC estéreis são comercializadas na forma estéril unitariamente, em duplo blister tipo PET (embalagem primária e secundário) e acondicionado posteriormente em cartonagem.

Material de Apoio

Este produto não possui Material de Apoio.

Componentes Ancilares

Esse produto não possui Componentes Ancilares.

Advertências e precauções

A TECHIMPORT recomenda o uso único dos instrumentais cirurgicos estéreis. A reutilização dos instrumentais podem causar danos ao paciente, como, por exemplo, necrose termica do osso.

A utilização destes instrumentais deve ser feito apenas por medicos cirurgiões aptos e familiarizados com a técnica cirurgica.

Nunca misturar instrumentais diferentes ou de outro fabricante, pois sempre há mudanças a ser considerada em diferentes produtos. Não utilizar instrumental de outro fabricante.

Cada Instrumental é fornecido individualmente. Deverá ser tomado todo o cuidado necessário ao manusear o produto (seguir Instruções de Uso), este não poderá sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois poderá comprometer a qualidade do mesmo.

As embalagens auxiliam na conservação, manutenção e no transporte do produto. As embalagens são apropriadas e extremamente protetoras.

Efeitos Adversos

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidades de complicações, sendo que alguns riscos comuns são as infecções, sangramentos, reações alérgicas medicamentosas e riscos anestésicos, entre outros, podendo ser ainda associadas a implantação dos produtos, as seguintes complicações e efeitos adversos:

- Hematomas na região da operação;
- Início de infecções agudas tardias na região da operação;
- Alterações funcionais persistentes ou momentâneas nos nervos da região anatômicas de interesse;
- Trombose venosa, embolismo pulmonar, insuficiência cardíaca;
- Infecção superficial ou profunda;
- Cicatriz no local de inserção do produto médico devido à via de acesso;
- Como em todas as intervenções cirúrgicas há uma incidência de enfermidade e mortalidade.

Instruções de Uso

Para a correta utilização do produto, as seguintes instruções devem ser adotadas:

- A embalagem deve ser aberta em ambiente estéril, para garantir as condições perfeitas de uso recomendadas nessa instrução.
- As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo a ele a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.
- Manipular produto exclusivamente em ambientes adequados, com os devidos cuidados e somente por profissionais capacitados.

ESTERILIZAÇÃO

Todos os modelos das Brocas e fresas D-Coating com DLC estéreis são comercializados estéreis, em Óxido de Etileno, e possuem validade de 3 anos a partir da data de esterilização.

Descarte do Produto

Quando necessário o descarte do instrumental cirurgico, deverão ser seguidos procedimentos definidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde estabelecido pelo hospital dando o melhor destino ao material extraído, que se caracteriza como lixo hospitalar potencialmente contaminante.

- Esses dispositivos devem ser inutilizados/descaracterizados para uso antes do descarte. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Techimport recomenda que tais produtos médicos sejam deformados mecanicamente, através da utilização de prensa de impacto, martelo, ou marreta. Em seguida, os produtos médicos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.
- Descartar todo resíduo perfurocortante e abrasivo, inclusive os que não foram usados, em recipiente exclusivo, resistente à perfuração e com tampa, sem ultrapassar o limite de 2/3 da capacidade total.
- Para o envio desses produtos médicos utilizados em cirurgia ao fabricante, devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade dos mesmos. Na embalagem devem constar informações sobre as condições desses produtos, tais como: método de limpeza e desinfecção utilizada, assim como, a identificação dos mesmos.

Rastreabilidade

Para garantir a rastreabilidade do produto, e cumprir com os requisitos de vigilância sanitária, o cirurgião ou sua equipe deve registrar no prontuário do paciente as informações acerca do produto. Além disso, essas informações devem ser também repassadas ao distribuidor do produto e ao paciente, de modo a completar o ciclo de rastreabilidade do produto implantado. As informações

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

necessárias para rastreabilidade dão as relativas ao produto utilizado, cirurgia e paciente, conforme abaixo:

- Dados do Fabricante;
- Código do Produto;
- Descrição do Produto;
- Número do lote do produto;
- Número do registro Anvisa;
- Identificação do Distribuidor;
- Composição (Matéria-prima);
- Responsável Técnico;
- Conteúdo da embalagem;
- Data de fabricação;
- Nome Técnico do Produto;

O cirurgião responsável e sua equipe devem fazer uso das etiquetas de rastreabilidade fornecidas, em 06 vias, na embalagem do produto, colocando as no prontuário do paciente para manutenção da rastreabilidade do produto implantado. Além disso uma dessas etiquetas deve ser fornecida ao paciente para que esse tenha informações a respeito do produto implantado em seu procedimento cirúrgico.

As informações de rastreabilidade são necessárias para notificação pelo serviço de saúde e/ou pelo próprio paciente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e ao fabricante, quando da ocorrência de eventos adversos graves, para a condução das investigações cabíveis.

Armazenamento

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura máxima de 25oC e umidade relativa de 30–75% e ao abrigo da luz solar direta.

O produto deve ser mantido em sua embalagem individual até o momento do uso com os devidos cuidados da área médica hospitalar.

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

O produto deve ser conservado em temperatura ambiente, evitando o seu armazenamento em lugares úmidos. O tipo de embalagem na qual o produto está acondicionado permite fácil transporte e armazenamento, sempre que necessário. O produto não poderá sofrer choque mecânico como queda, batida, pois poderá danificar sua funcionalidade.

Transporte

Para ser entregue ao consumidor o produto é acondicionado em caixa que recebe uma embalagem em plásticos bolhas, acondicionados em caixa de papelão ondulado, impresso em sua lateral o nome da empresa, endereço, telefone e com os seguintes dizeres “Produto Hospitalar” e “Cuidado Frágil”. A caixa de papelão é lacrada com fita adesiva. Após a caixa ser devidamente fechada ela recebe a etiqueta com dados do destinatário.

Verificação do estado da embalagem e do estado superficial do produto .

Verificar a integridade e caracterizar a necessidade de desqualificar o produto no caso de acidentes de manuseio e transporte que restrinjam o uso.

A embalagem deve estar íntegra sem perfuração, rasgo e com o Rótulo externamente. Caso algum destes requisitos esteja em desacordo, o produto não deve ser utilizados.

Caso haja alguma não conformidade na embalagem ou no Rótulo ou do Instrumental deve-se entrar em contato com a empresa TECHIMPORT para realizar a devolução do produto. Todos os dados da empresa estão impresso no rótulo

Precauções quanto ao manuseio:

A família de Brocas e fresas D-Coating com DLC estéreis é apresentada na forma estéril, dispensando cuidados pré-operatórios, desde que os cuidados no transporte e armazenamento sejam seguidos e que a embalagem não esteja violada.

A embalagem do instrumental estéril só deverá ser aberta dentro do centro cirurgico de modo que o instrumentador tenha acesso ao blister primário, sem contato com o exterior do blister secundário.

Reclamação/Atendimento Ao Cliente:

Instrução de Uso

Brocas e Fresas D-Coating com DLC estéreis

Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail gerencia@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Em casos de dúvidas o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

Fabricado por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172, RUA 06, CONDOMINIO CONPARK, CAIXA POSTAL 223 - RIO CLARO-SP-BRASIL CEP: 13.501-600